

DE - EINWEG-MUNDSTÜCKE GEBRAUCHSANWEISUNG

VERWENDUNGSZWECK: Einwegmundstücke sind für die Verwendung zusammen mit Geräten zur Lungenfunktionsuntersuchung vorgesehen und ermöglichen dem Patienten die Durchführung des Tests, ohne direkten Kontakt mit dem Gerät zu haben. Der Patient manipuliert das Mundstück persönlich, indem er es in das Gerät einführt. Die Mundstücke dürfen nur bei Kontakt mit intakter, sauberer und gesunder Haut angewendet werden.

PRODUKTIDENTIFIKATION: Die Identifikationsdaten (Code, Charge und Produktionsdatum) sind auf dem Identifikationsetikett auf der Verpackung angegeben.

VERWENDUNG:

- Befolgen Sie immer die Gebrauchsanweisung des Geräts, an dem das Mundstück angebracht wird
- Führen Sie das Mundstück ohne Gewalt in den Sensor des Geräts (Turbine oder Pneumotachometer) ein.
- Verwenden Sie das Mundstück niemals wieder, um den Patienten nicht dem Risiko einer Kreuzkontamination auszusetzen.
- Vor Gebrauch nicht öffnen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in der Neugeborenen-Pädiatrie geeignet.
- Vor Gebrauch an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

ENTSORGUNG UND SICHERHEIT: Nach Gebrauch muss das Produkt in normalen ungiftigen Feststoffabfallbehältern oder im allgemeinen Krankenhausabfall entsorgt werden.



KONTRAINDIKATIONEN: Aufgrund der Erfahrungen und der Ergebnisse verschiedener Analysen.

LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

ACHTUNG:

- Die Einzelverpackung in einem heißversiegelten Beutel garantiert die Abwesenheit von Bakterien, die gemäß dem Qualitätssystem des Herstellers regelmäßig überwacht wird. Wenn das Gerät wiederverwendet wird, besteht das Risiko einer Kreuzinfektion für den Patienten, der es wiederverwendet.
- Bei Wiederverwendung des Geräts besteht die Gefahr einer Kreuzinfektion für den Patienten, der es wiederverwendet

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

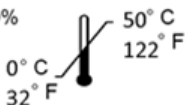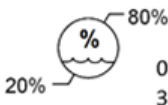

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750