

## ET - ÜHEKORDELT KASUTATAVAD SUUTURID KASUTUSJUHEND

**SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE:** ühekordselt kasutatavad huulikud on ette nähtud kasutamiseks koos kopsufunktsiooni testimisseadmetega ja võimaldavad patsiendil läbida uuringu ilma seadmega otsese kokkupuuteta.

Patsient manipuleerib huulikuga isiklikult, sisestades selle seadmesse. Huulikuid tohib kanda ainult tervele, puhtale ja tervele nahale.

**TOOTE IDENTIFITSEERIMINE:** Identifitseerimisandmed (viide, partii ja tootmiskuupäev) on karbile kinnitatud etiketil.

### KASUTAMINE:

- Järgige alati spiromeetri juhiseid.
- Sisestage huulik ilma sundimata seadme andurisse (turbiin või pneumotakomeeter).
- Ärge kunagi kasutage huulikut uuesti, et vältida patsiendi kokkupuudet ristsaastumisega.
- Ärge avage enne kasutamist.
- Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud.
- Seade ei sobi kasutamiseks vastsündinute pediatrias.
- Hoida jahedas ja kuivas kohas.

**KÕRVALDAMINE JA OHUTUS:** Pärast kasutamist tuleb toode visata tavalistesse mittetoksilistest tahketest jäätmekonteineritesse või üldistesse haiglajäätmetesse.



**VASTUNÄIDUSTUSED:** Kogemuste ja erinevate analüüside tulemuste põhjal ei ole toote õigel kasutamisel kahjulikke mõjusid.

**SÄILITAMINE:** Hoida jahedas ja kuivas kohas.

### HOIATUS:

- Pakendamine individuaalsesse kuumsuletud ümbrikusse (single wrap) tagab bakterite puudumise, mida jälgitakse regulaarselt vastavalt tootja kvaliteedisüsteemile. Meditsiiniseadme korduvkasutamisel tekib seda taaskasutava patsiendi jaoks ristinfektsiooni oht.
- Kui seadet kasutatakse uuesti, on patsiendil, kes seda uuesti kasutab, ristinfektsiooni oht.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

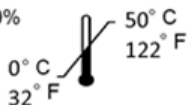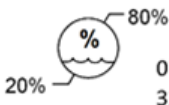

**LUMED Srl**  
Via Staffora 18/9  
20073 Opera ITALIA  
www.lumed.com  
tel +39 (0)2 57606750