



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MISURATORE CORPOREO
BODY METER**

RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

MEDIDOR CORPORAL

KÖRPERFETTMESSGERÄT

MEDIDOR CORPORAL

Μεζούρα Σώματος

م س ج ل ا س ا ي ق م

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يف قصتخ م ل ا ق ط ل س ل ا و ق ع ر ن ا ص ل ا ق م ج ل ا ي ل ا ه ا ب ا ن د و ز ي ذ ل ا ي ب ط ل ا ز ا ه ج ل ا ب ق ل ع ت ي ا م ي ف ع ق و ر ي ط خ ث د ا ح ي ا ن م ا ر و ف غ ا ل ب ا ل ا ب ج ي ا ه ي ف ع ق ي ي ت ل ا و ض ع ل ا ق ل و د ل ا

REF G006D (Gima 27347 - 27350)

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Vertrieben von/Διανέμονται από/توزيع من عزوم/
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Eingeführt von/Εισαγωγή από/عناصلا:
Solution Group S.r.l. - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller/Κατασκευαστής/عناصلا:
Samson Innovation Corporation Ltd. - Room F, 8th Floor, Hop Hing Industrial Building, 704 Castle Peak Road,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong - Made in China




Cinta para la evaluación de la distribución del tejido adiposo. Cuerpo en ABS con empuñadura ergonómica. La cinta está hecha de un material plástico especial indeformable, con doble escala de evaluación de color para las indicaciones de riesgo dividido, hombre-mujer.

Utilizable en todas las circunferencias corporales, gracias a su botón retráctil y a su pestillo flexible para facilitar la lectura de los datos.

La especial flexibilidad de su brazo termoplástico atóxico, permite un uso específico en entornos pediátricos

Posición de la cinta, para una medición correcta de la circunferencia abdominal

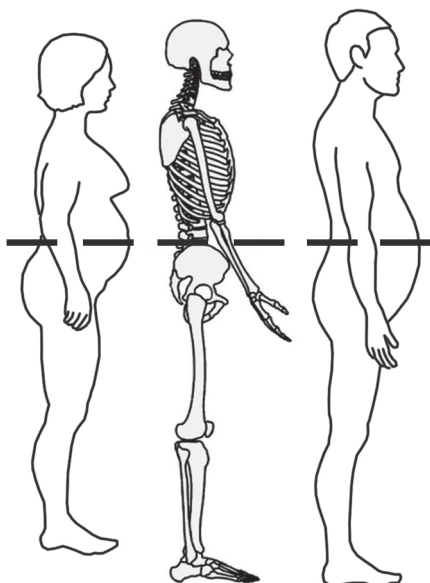

Individuo en posición recta.

Localizar el margen superior de la cadera y el vértice de la cresta ilíaca derecha.

Colocar la cinta horizontal alrededor del abdomen a la altura del margen de la cresta ilíaca.

Antes de tomar la medida, asegurarse de que la cinta está ajustada pero que no comprima la piel y que está paralela al suelo.

Tomar la medida al final de una exhalación normal.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.