

ES - BOQUILLAS DESECHABLES: INSTRUCCIONES DE USO

USO PREVISTO: Las boquillas desechables están diseñadas para usarse junto con equipos de prueba de función pulmonar y permiten que el paciente realice el examen sin tener contacto directo con el equipo. El paciente manipula personalmente la boquilla introduciéndola en el equipo. Las boquillas deben aplicarse únicamente sobre la piel intacta, limpia y sana.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO: Los datos de identificación (referencia, lote y fecha de producción) se encuentran en la etiqueta adherida a la caja.

USO:

- Siga siempre las instrucciones del espirómetro.
- Inserte la boquilla en el sensor del dispositivo (turbina o neumotacómetro) sin forzar. - - Nunca reutilice la boquilla para evitar exponer al paciente a contaminación cruzada.
- No abrir antes de su uso.
- No utilizar si el embalaje está dañado.
- El dispositivo no es adecuado para su uso en pediatría neonatal.

ELIMINACIÓN Y SEGURIDAD: Después de su uso, el producto debe eliminarse en contenedores normales de residuos sólidos no tóxicos o en residuos hospitalarios en general.




CONTRAINDICACIONES: Basado en la experiencia y resultados de diferentes análisis, no existen efectos adversos como resultado del uso adecuado del producto.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco.

ADVERTENCIA:

- El envasado en sobre individual termosellado (single-wrap) garantiza la ausencia de bacterias, que se controla periódicamente según el sistema de calidad del fabricante. Si el dispositivo médico se reutiliza, existe riesgo de infección cruzada para el paciente que lo reutiliza.
- Si se reutiliza el dispositivo, existen riesgos de infección cruzada para el paciente que lo reutiliza.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

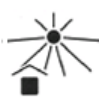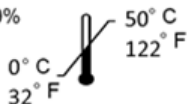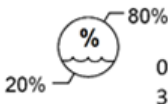

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750