



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MISURATORE CORPOREO
BODY METER**

RUBAN PÉRIMÉTRIQUE

MEDIDOR CORPORAL

KÖRPERFETTMESSGERÄT

MEDIDOR CORPORAL

Μεζούρα Σώματος

م س ج ل ا س ا ي ق م

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يف قصتخ م ل ا ق ط ل س ل ا و ق ع ر ن ا ص ل ا ق م ج ل ا ي ل ا ه ا ب ا ن د و ز ي ذ ل ا ي ب ط ل ا ز ا ه ج ل ا ب ق ل ع ت ي ا م ي ف ع ق و ر ي ط خ ث د ا ح ي ا ن م ا ر و ف غ ا ل ب ا ل ا ب ج ي ا ه ي ف ع ق ي ي ت ل ا و ض ع ل ا ق ل و د ل ا

REF G006D (Gima 27347 - 27350)

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Vertrieben von/Διανέμονται από/توزيع من عزوم/
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Eingeführt von/Εισαγωγή από/عناصلا:
Solution Group S.r.l. - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy
solutiongroup@legalmail.it - www.solutiongroup.it

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller/Κατασκευαστής/عناصلا:
Samson Innovation Corporation Ltd. - Room F, 8th Floor, Hop Hing Industrial Building, 704 Castle Peak Road,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong - Made in China




Ruban pour mesurer la distribution du tissu adipeux. Corps en ABS à poignée ergonomique. Le ruban est fait en matière plastique indéformable spéciale, avec double échelles de mesure colorée pour les indications de risque divisé, homme-femme.

Utilisable sur toutes les circonférences du corps, grâce à son bouton rétractable et à l'arrêt flexible qui permet une lecture facile des données.

La flexibilité particulière de son bras en thermoplastique atoxique permet une utilisation spécifique dans la branche pédiatrique

Position du ruban, pour une mesure correcte de la circonférence abdominale

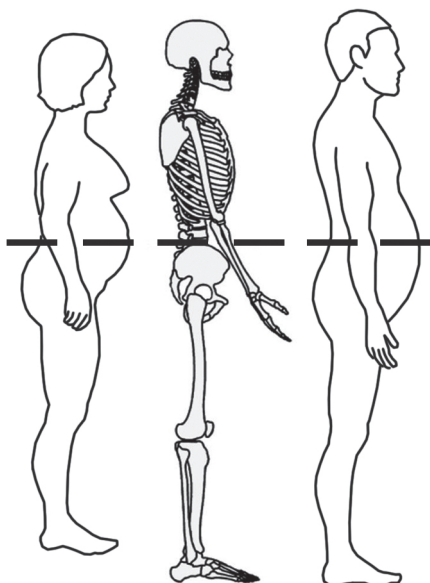

Individu debout.

Localiser la marge supérieure de la hanche et le sommet de la crête iliaque droite.

Positionner le ruban horizontal autour de l'abdomen au niveau de la marge de la crête iliaque.

Avant de prendre la mesure, s'assurer que le ruban est adhérent mais qu'il ne comprime pas la peau, et qu'il est parallèle au sol.

Prendre la mesure à la fin d'une expiration normale.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.