



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CARRELLO EXCEL
EXCEL TROLLEY
CHARIOT EXCEL
CARRO EXCEL
CARRINHO EXCEL
WAGEN "EXCEL"
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ EXCEL**

**Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης**

REF 27440 - 27441



Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por /
vertrieben von / distribuído por / Διανέμεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής:

SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL

Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com

INTRODUCTION

Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement.

DESCRIPTION


Cet article est un chariot fabriqué en acier peint à 3 ou 4 étagères fixes. Il s'agit d'un chariot de service destiné à l'usage hospitalier. Le chariot de soins médicaux Excel est un chariot très pratique indiqué pour le rangement et/ou le transport de petits appareils médicaux.

COMPOSANTS


- 3 étagères code 27440
- 4 étagères code 27441
- 2 pieds

Sachet avec matériel de montage:

- 4 roues

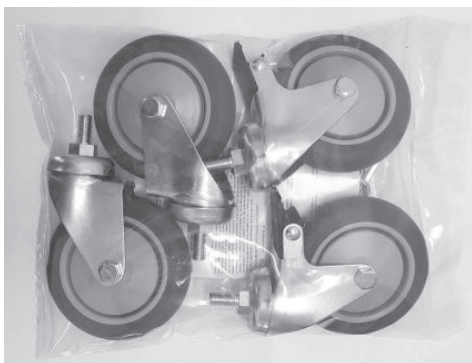

- 12 vis TTBE 8 X 25 code 27440
- 16 vis TTBE 8 x 25 code 27441
- 12 rondelles 8 X 16 code 27440
- 16 rondelles 8 X 16 code 27441
- 12 vis TT 8 X 16 FE code 27440
- 16 vis TT 8 X 16 FE code 27441
- 2 CLÉS ALLEN

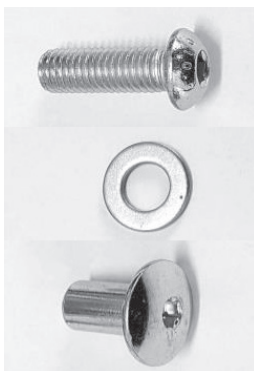


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.

Vissez les roues à la base des deux pieds.

Pour fixer les étagères à la structure commencez par un côté et prenez les vis de fixation.

Visserie de fixation	Vis et rondelle à insérer dans l'étagère	Vis TT à insérer dans la structure sur le côté extérieur du pied

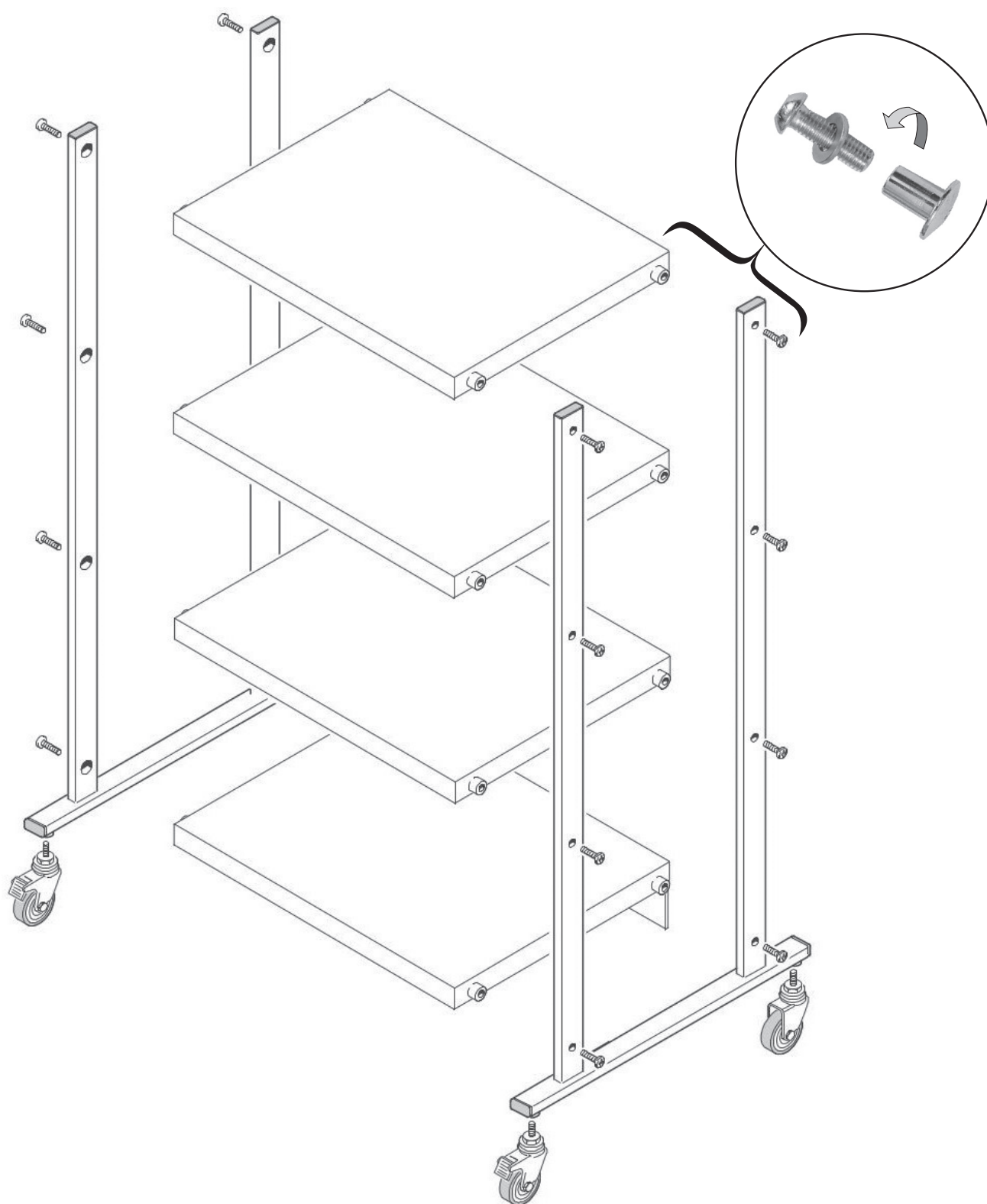

FICHE TECHNIQUE

Dimensions	Chariot à 3 étagères : 66 x 68 x h 81 cm Chariot 4 étagères : 66 x 68 x h 111 cm Étagère : 60 x 45 x h 2,5 cm Boîte : 96,5 x 18,5 x h 74 cm
Poids	Chariot à 3 étagères : 27 kg (28,8 kg avec boîte) Chariot à 4 étagères : 35,5 kg (37,3 kg avec boîte)
Capacité de charge maximale	80 kg

**AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION**

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil ; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.