



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE
SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNİKA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-
TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK


GIMA 29544

REF B01

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

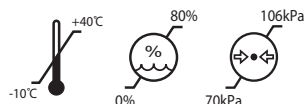

Utilisation prévue :

- Ce produit permet d'ajuster la position de la boucle sur la ceinture afin de fixer le capteur foetal.

Présentation du produit:

- Nom du produit: Ceinture transductrice foetale jetable.
- Structure du produit: Il est composé d'une ceinture élastique et d'une boucle.

Gamme de produits:

- Il est utilisé pour fixer un capteur foetal pendant la surveillance foetale.

Condition d'utilisation:

- Température: 0°C ~ 40°C
- Humidité relative: 15% ~ 95%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Emballage et stockage:

- La ceinture foetale jetable doit être emballée individuellement, le produit emballé doit être stocké dans un gaz non corrosif et dans un lieu bien ventilé.

Conditions de stockage :

- Température: -10°C ~ 40°C
- Humidité relative: ≤80%
- Pression atmosphérique: 70kpa ~ 106kpa

Installation/utilisation:

- Fixez une extrémité de la ceinture au capteur en engageant l'un des trous de la ceinture sur le bouton situé au-dessus du capteur.
- Maintenez le capteur en position, tendez l'autre extrémité de la ceinture et engagez la ceinture sur le bouton, en veillant à une tension suffisante pour maintenir le capteur en contact ferme avec

l'abdomen.

- Évitez de trop serrer car cela causera un inconfort inutile au patient.

Propreté du produit :

- Lavez la ceinture à l'eau tiède, ne pas frotter le bord de la ceinture foetale pour éviter son retrait et ne pas l'exposer.

Période de validité:

- Période de validité: 2 ans.

Remplacer / jeter:

- Dans les situations telles que la casse ou les dommages liés à l'élasticité, veuillez changer la ceinture foetale.
- La ceinture peut être traitée comme un déchet normal.

Contre-indications, précautions, avertissements et mises en garde:

- Contre-indications: Les ceintures ne doivent pas être fixées sur une blessure.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie au spandex.
- Mises en garde: Ce produit est un produit à usage unique pour éviter les infections croisées. Veuillez lire les instructions avant utilisation.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

