



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST

www.led.it

FR 00900.FST - Première ULPA filtre (5h) - BLEU
00900.FU01 - Filtre ULPA pour SURTRON EVAC (20h) - ROUGE



Vérifier le status du produits avant de l'utiliser.
Produit jetable. Ne reutiliser pas.
N' aspirer pas des liquides.
Le produit doit être éliminé en conformité avec les procédures pour le contrôle des déchets hospitaliers.
Les connexions doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Le produit est compatible pour une utilisation avec aspirateurs des fumées chirurgicaux SURTRON® EVAC (10200.10 - 10200.10/115V).

Voir les instructions pour la connexion de l'unité d'aspiration des fumées chirurgicaux SURTRON® EVAC.

Spécifications techniques


Model de filtre: ULPA avec charbons activés
Efficacité de filtre: 99,999X%
Diamètre des particules: 0,12 micron
Diamètre raccord de tuyau de sortie: 22 mm
Duration de filtre 00900.FST: 5 heures
Duration de filtre 00900.FU01: 20 heures

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY



IT EN ES FR DE PT TR IA00900-XXXAr2 ed.07/2013 2013 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

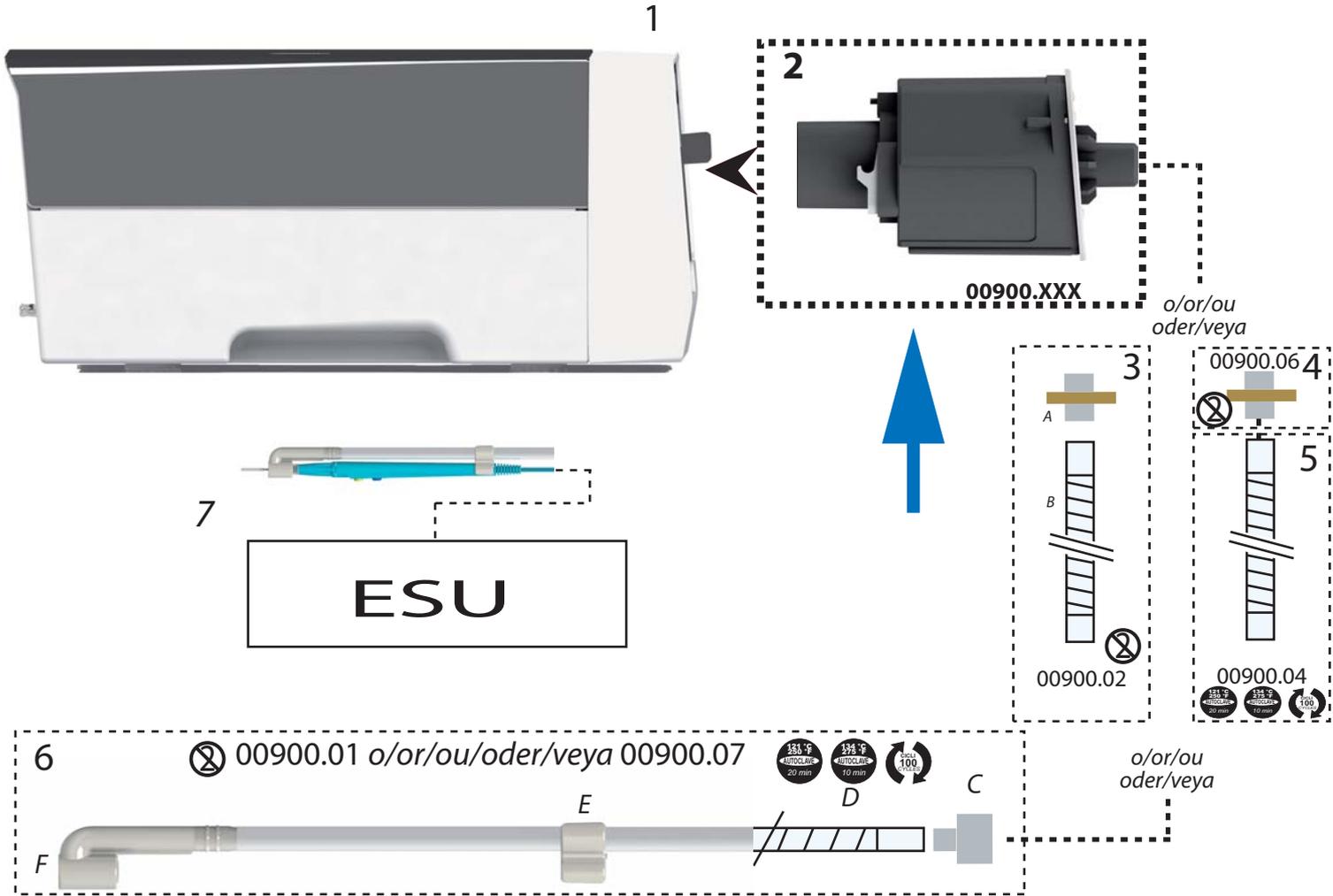

1 UNITÉ D'ASPIRATION DES FUMÉES* séries 10200.10 - 10200.10/115V
2 FILTRE série 00900.XXX
3 KIT ASPIRATION (00900.02)* - A Filtre - B tuyau dia. 22mm longueur 2,4 mt
4 Filtre dia. 22 mm (00900.06)*
5 Tuyau autoclavable dia. 22 mm (00900.04)*
6 KIT ASPIRATION DU MANCHE (00900.01 ou 00900.07)* - C Adaptateur 10mm/22mm - D tuyau longueur 1,5 mt - E Clip pour le fixation du tuyau sur le manche - F Adaptateur pour le manche
7 Détails du manche* avec 00900.01 ou 00900.07, le manche doit être connecté à votre unité électrochirurgique (ESU)*. *pas fornit



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST



LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-XXXAr2 ed.07/2013 2013 (C) LED SpA