




www.led.it

**(FR)** KIT D'ASPIRATION pour LES EVACUATEURS DES BRUMES

REF 00900.02

LED SpA  
Via Selciatella 40  
04011 Aprilia (LT) - ITALY

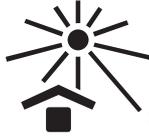

50°C  
0°C  
RH  
20% - 80%



IT EN ES FR DE PT TR

IA00900-01Ar2  
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA


Vérifier le status du produits avant de l'utilise.  
Produit jetable. Ne reutiliser pas.  
N' aspirer pas des liquides.  
Le produit doit être éliminé en conformité avec les procédures pour le contrôle des déchets hospitaliers.

Les connexions doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Le produit est fourni pour l'extraction des fumées en la chirurgie à «ouvrir» (laparotomie, par exemple). La connexion est typique:  
-connexion du code 00900.01 (fourni séparément) (fig. A - part.4)  
-connexion sur filtres séries XXX00900.XXX (fig. A -part. 2)

Adpte pour une connexion directe à un accessoire endoscopique (par exemple la chirurgie laparoscopique) ou autre système de collecte de l'attachement de diamètre compatible (22mm).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

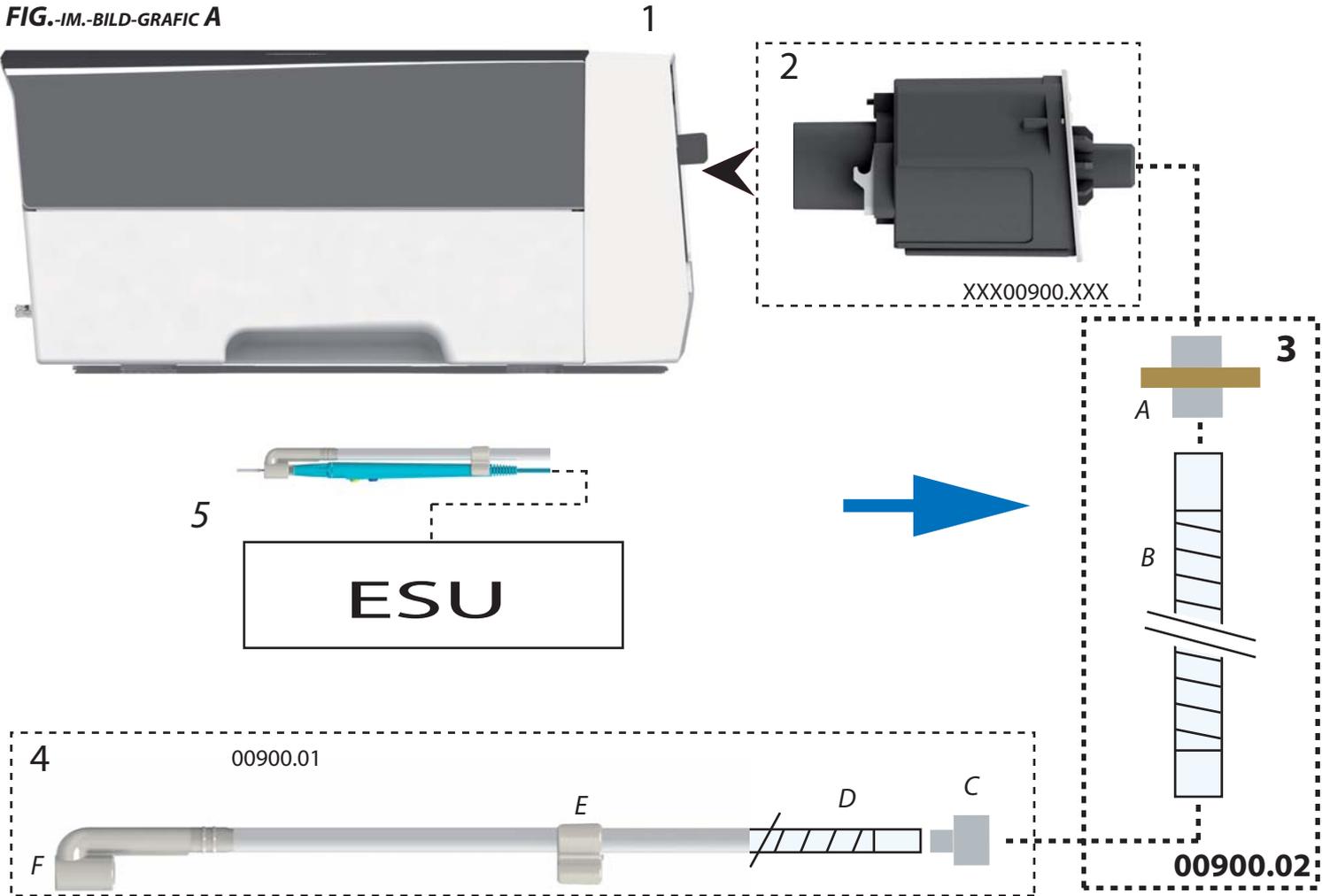

1 UNITÉ D'ASPIRATION DES FUMÉES\* séries XXX10200.10 - XXX10200.10/115V **(FR)**  
 2 FILTRE série XXX00900.XXX  
**3 KIT ASPIRATION (00900.02) - A Filtre - B tuyau dia. 22mm longueur 2,4 mt**  
 4 KIT ASPIRATION DU MANCHE (00900.01)\* - C Adaptateur 10mm/22mm - D tuyau dia. 10mm longueur 1,8 mt - E Clip pour le fixation du tuyau sur le manche - F Adaptateur pour le manche  
 5 Détails du manche\* avec 00900.01, le manche doit être connecté à votre unité électrochirurgicale (ESU\*). \*pas fornit



REF 00900.02

LED SpA  
Via Selciatella 40  
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-02Ar2  
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA