

**MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE
DI TIPO II AD USO MEDICALE**

**TYPE II WASHABLE SURGICAL MASK
FOR MEDICAL USE**

**MASQUE CHIRURGICAL LAVABLE
DE TYPE II À USAGE MÉDICAL**

**TYP II WASCHBARE CHIRURGISCHE MASKE
FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN**

**MASCARILLA FACIAL QUIRÚRGICA
DE TIPO II LAVABLE PARA USO MÉDICO**

**MÁSCARA CIRÚRGICA LAVÁVEL TIPO II
PARA USO MÉDICO**

**TYP II TVÁTTBART KIRURGMUNSKYDD MED
FÖR MEDICINSK ANVÄNDNING**

**ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΤΥΠΟΥ II ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**MASKA CHIRURGICZNA MEDYCZNA
MOŻLIWA DO PRANIA TYPU II**

**MASCĂ CHIRURGICALĂ DE UZ MEDICAL,
DE TIP II, LAVABILĂ**

قناع جراحي قابل للغسيل ومن النوع الثاني
للاستخدام الطبي



IT - La mascherina deve essere indossata come mostrato nella foto. Parte piccola sul naso, parte grande sotto

GB - The mask must be worn as shown in the photo. Small part on the nose, large part below.

FR - Le masque doit être porté de la façon montrée dans la photo : petite partie sur le nez, grande partie en-dessous.

DE - Die Maske muss, wie in der Abbildung gezeigt, getragen werden, d.h. der kleinere auf der Nase und der größere Teil unten.

ES - La mascarilla se debe colocar tal y como muestra la foto. Parte pequeña en la nariz, parte grande abajo.

PT - A máscara deve ser utilizada conforme mostrado na foto. Parte pequena sobre o nariz, parte grande para baixo.

SE - Ansiktsmasken ska bäras som fotot visar. Mindre del på näsan, större nedtill.

GR - Η μάσκα πρέπει να φοριέται όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το μικρό τμήμα στη μύτη, το μεγάλο τμήμα.

PL - Maseczka musi być noszona w sposób pokazany na zdjęciu stronie. Mniejsza część na nosie, większa część pod brodą.

RO - Masca trebuie purtată așa cum se observă în fotografia. Partea mai îngustă pe nas, partea mai lată dedesubt.

SA - يجب ارتداء القناع كما هو موضح في الصورة على اليمين، الجزء الصغير على الأنف، الجزء الكبير أدناه

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Vertrieben von
Distribuido por / Distribuído por / Distribuemas av / Διατίθεται από / Rozprowadzana przez / Distribuit de / توزيع :



REF 20765 / BP2020V3 S

MYCROCLEAN ITALIA SRL
Via Carlo Porta, 14
20064 Gorgonzola - Italy
Made in Italy



LOT Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

Vedere etichetta / See label / Voir l'étiquette
Siehe Etikett / Ver la etiqueta / Ver rótulo
Se etikett / Δείτε ετικέτα / Patrz etykieta
Consultati eticheta / انظر الملصق

UNI EN 14683:2019



000001

E96 (Γνωστό και ως ISO - 11092 ή τεστ Ret ή Hohenstein)
Το αποτέλεσμα που λαμβάνεται από τις μάσκες της σειράς BP2020 είναι 7,5 που σημαίνει ότι είναι καλές ή ότι έχουν μεγάλη αναπνευσιμότητα

4 - Τρόπος χρήσης και προειδοποιήσεις

Πιάστε τη μάσκα με καθαρά χέρια που τα έχετε απολυμάνει και προσαρμόστε την καλά στο πρόσωπο βρίσκοντας τη σωστή θέση, δηλαδή τοποθετώντας το μικρότερο τμήμα πάνω από τη μύτη και το μεγαλύτερο τμήμα πάνω από το στόμα και το πηγούνι.
ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΜΑΣΚΑ. ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ. ΦΟΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΩΣΤΑ (όπως υποδεικνύεται στην εικόνα)

Στην αντίθετη περίπτωση η μάσκα χάνει την προστατευτική της λειτουργία.

5 - Πλύσιμο




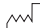



Στο χέρι ή στο πλυντήριο, με απορρυπαντικό, έως 60°C.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ

Αν ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, το προϊόν διατηρεί τα ίδια φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά για έως 500 πλύσεις περίπου

6 - Απορριψη

Μάσκα που πρέπει να απορρίπτεται ως ΑΣΑ (εκτός και να έχει μολυνθεί, οπότε θα πρέπει να απορρίπτεται ως «ειδικό απόβλητο»). Η εξωτερική συσκευασία απορρίπτεται ως πλαστικό.

 REF	Κωδικός προϊόντος	 LOT	Αριθμός παρτίδας
	Παραγωγός		Ημερομηνία παραγωγής
	Όχι αποστειρωμένο		Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
	Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE		

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1 - Περιγραφή προϊόντος και προβλεπόμενη χρήση

Πλενόμενη υφασμάτινη μάσκα, από 99% πολυεστέρα και 1% ανθρακόνημα, που προορίζεται για την προστασία της μύτης και του στόματος.

2 - Ταξινόμηση

Οι μάσκες της σειράς BP2020V3 ταξινομούνται στον Τύπο II, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14683:2019.

3 - Χαρακτηριστικά

Το προϊόν, αποτελούμενο από μια στρώση, μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 60°C (το ύφασμα αντέχει έως τους 150°C) Δεν είναι αποστειρωμένο

Τιμές PFE: Φιλτράρισμα Σωματιδίων (%) 0,3 μm 0,5 μm στο 95%

Το ύφασμα είναι **ΜΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟ**, όπως προέκυψε από τη δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε ινοβλάστες, σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN ISO 10993-5.

Φιλτράρισμα BFE

BFE = 99,8% (από τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14683:2019)

Βιολογικό Φορτίο

UFC < 30 UFC (από τις εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14683:2019) **Διαπερατότητα αέρα (cm2/cm3/sec) ASTM**