



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MISURATORE CORPOREO  
BODY METER**

**RUBAN PÉRIMÉTRIQUE**

**MEDIDOR CORPORAL**

**KÖRPERFETTMESSGERÄT**

**MEDIDOR CORPORAL**

**Μεζούρα Σώματος**

**م س ج ل ا س ا ي ق م**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يف قصتخ م ل ا ق ط ل س ل ا و ق ع ر ن ا ص ل ا ق م ج ل ا ي ل ا ! ه ب ا ن د و ز ي ذ ل ا ي ب ط ل ا ز ا ه ج ل ا ب ق ل ع ت ي ا م ي ف ع ق و ر ي ط خ ث د ا ح ي ا ن م ا ر و ف غ ا ل ب ا ل ا ب ج ي ا ه ي ف ع ق ي ي ت ل ا و ض ع ل ا ق ل و د ل ا

**REF G006D (Gima 27347 - 27350)**

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Vertrieben von/Διανέμονται από/توزيع من عزوم/  
**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Eingeführt von/Εισαγωγή από/عناصلا:  
**Solution Group S.r.l.** - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy  
solutiongroup@legalmail.it - [www.solutiongroup.it](http://www.solutiongroup.it)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller/Κατασκευαστής/عناصلا:  
Samson Innovation Corporation Ltd. - Room F, 8th Floor, Hop Hing Industrial Building, 704 Castle Peak Road,  
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong - Made in China




Μεζούρα για την ανίχνευση της κατανομής του λιπώδους ιστού. Σώμα από ABS με εργονομική λαβή. Η μεζούρα είναι κατασκευασμένη από ένα ειδικό μη παραμορφώσιμο πλαστικό υλικό, με διπλή χρωματιστή κλίμακα μέτρησης για τις προειδοποιήσεις κινδύνου χωριστά, για άνδρες και γυναίκες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες σώματος, χάρη στο ειδικό κουμπί και την ευέλικτη ασφάλεια, επιτρέποντας την εύκολη ανάγνωση των δεδομένων.

Η ιδιαίτερη ευκαμψία του βραχίονα από μη τοξικό θερμοπλαστικό υλικό, επιτρέπει τη χρήση της μεζούρας και από παιδιάτρους

Θέση της μεζούρας, για σωστή μέτρηση της κοιλιακής περιφέρειας

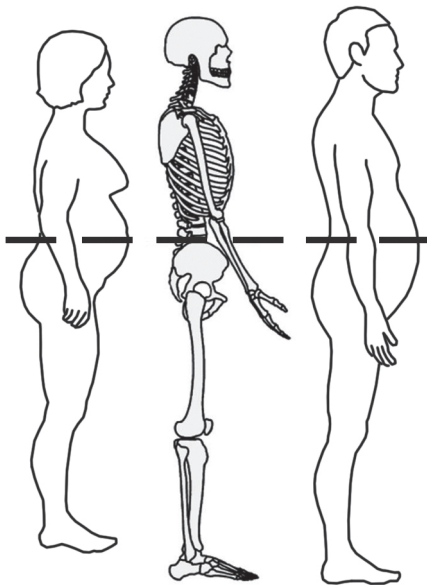

Άτομο σε όρθια στάση.

Εντοπίστε το ανώτερο άκρο του ισχίου και την κορυφή της δεξιάς λαγόνιας ακρολοφίας.

Τοποθετήστε τη μεζούρα οριζόντια γύρω από την κοιλιά στο ύψος του άκρου της λαγόνιας ακρολοφίας.

Προτού διαβάσετε τη μέτρηση βεβαιωθείτε ότι η μεζούρα εφάπτεται καλά χωρίς ωστόσο να πιέζει το δέρμα, και ότι είναι τοποθετημένη παράλληλα με το πάτωμα.

Διαβάστε τη μέτρηση μετά από μια κανονική εκπνοή.

## **ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA**

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.