



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

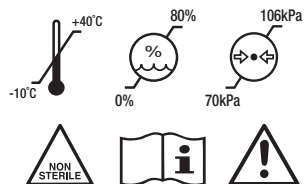

Προοριζόμενη χρήση:

- Το προϊόν αυτό λειτουργεί προσαρμόζοντας τη θέση της αγκράφας της ζώνης για τη στερέωση του μορφοτροπέα εμβρυϊκού ελέγχου.

Παρουσίαση προϊόντος:

- Όνομα προϊόντος: Επαναχρησιμοποιούμενη ζώνη μορφοτροπέα εμβρυϊκού ελέγχου.
- Δομή προϊόντος: Το προϊόν αποτελείται από την ελαστική ζώνη και από την αγκράφα.

Πεδίο εφαρμογής προϊόντος:

- Χρησιμοποιείται με τον μορφοτροπέα παρακολούθησης της εγκυμοσύνης, για τη στερέωση του μορφοτροπέα.

Συνθήκες χρήσης:

- Θερμοκρασία: 0°C ~ 40°C
- Σχετική υγρασία: 15% ~ 95%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 70kpa ~ 106kpa

Συσκευασία και αποθήκευση:

- Η ζώνη εμβρυϊκού ελέγχου πρέπει να είναι συσκευασμένη σε μεμονωμένη συσκευασία. Το συσκευασμένο προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς διαβρωτικά αέρια.

Οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι εξής:

- Θερμοκρασία: -10°C ~ +40°C
- Σχετική υγρασία: ≤80%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 70kpa ~ 106kpa

Τοποθέτηση/χρήση:

- Συνδέστε το ένα άκρο της ζώνης στον μορφοτροπέα εισάγοντας μία από τις οπές της ζώνης στο κουμπί στο επάνω μέρος του μορφοτροπέα.
- Κρατώντας τον μορφοτροπέα στη θέση του, τεντώστε το άλλο άκρο της ζώνης και συνδέστε το στο κουμπί, τεντώνοντας επαρκώς ώστε ο

μορφοτροπέας να παραμένει σε σταθερή επαφή με την κοιλιά.

- Αποφύγετε την υπερβολική σύσφιξη της ζώνης διότι μπορεί να προκληθεί δυσφορία στον ασθενή.

Καθαρισμός προϊόντος:

- Πλύνετε τη ζώνη με χλιαρό νερό, μην τρίβετε την άκρη της ζώνης, μην την εκθέτετε.

Περίοδος ισχύος:

- Περίοδος ισχύος: 2 έτη.

Αντικατάσταση και απόρριψη:

- Αντικατάσταση: Σε περίπτωση που προκληθεί θραύση, ζημιά στο ελαστικό ή παρέλθει η ημερομηνία λήξης, αντικαταστήστε τη ζώνη εμβρυϊκού ελέγχου με μια καινούργια.
- Απόρριψη: Απορρίψτε τη ζώνη μαζί με τα κοινά απορρίμματα.

Αντενδείξεις, προφυλάξεις, προειδοποιήσεις και συμβουλές:

- Αντενδείξεις: Οι ζώνες δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που φέρουν τραύμα.
- Σε περίπτωση αλλεργίας στην ελαστάνη (Spandex) θα πρέπει να διακόπτεται η χρήση.
- Συμβουλές: Διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών

