


GONIOMETRO DA 7" ROBINSON 180°

180° ROBINSON GONIOMETER 7"

GONIOMÈTRE 7" 180° ROBINSON 180°

GONIÓMETRO ROBINSON 180° - 7"

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso

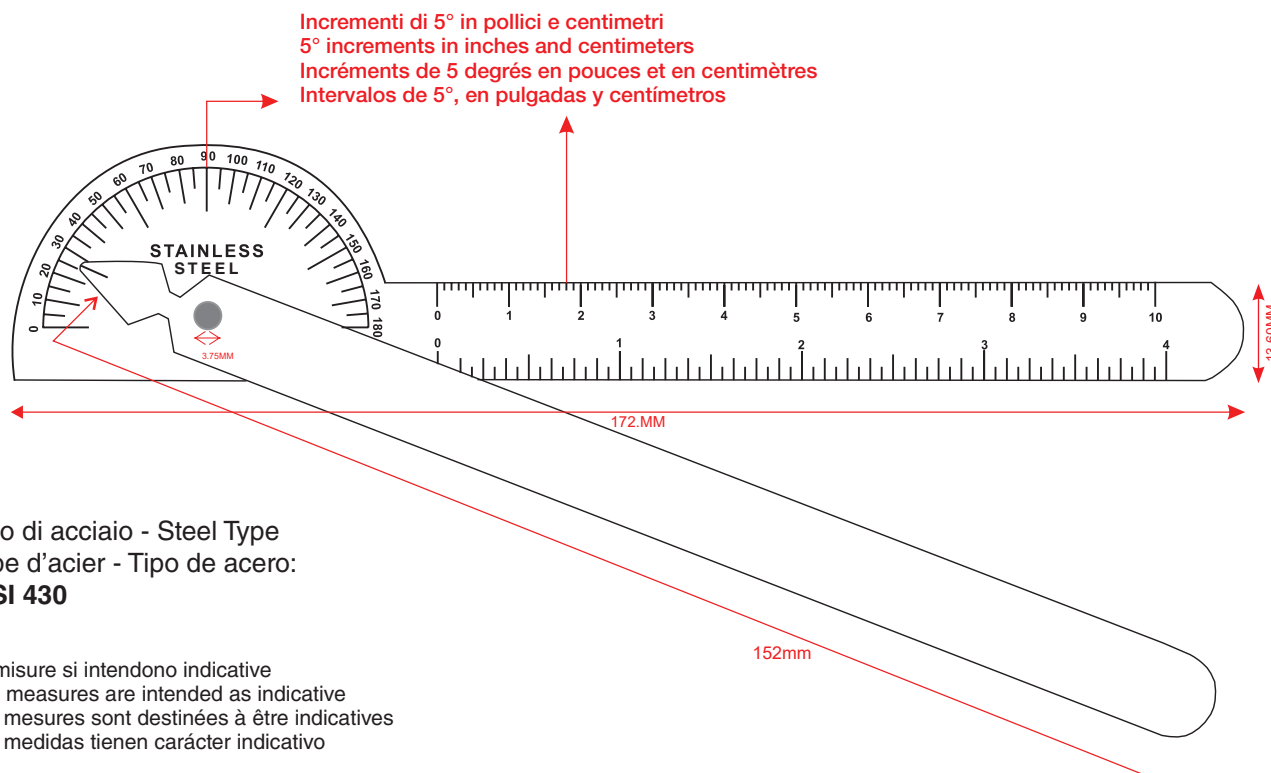

Tipo di acciaio - Steel Type
Type d'acier - Tipo de acero:
AISI 430

Le misure si intendono indicative
The measures are intended as indicative
Les mesures sont destinées à être indicatives
Las medidas tienen carácter indicativo

GIMA 24902

Fabbricante, Manufacturer, Fabricante, Fabricante:
JIMCO INDUSTRIES
4-KM Aimen Abad Road Near Akbar Abad Chowk Bhadal,
Sialkot-51310-Punjab - Pakistan - info@jimcoind.com
Made in Pakistan

REF RE-210-10

Importato da / Imported by / Importé par/ Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Con il goniometro, è possibile misurare il campo di movimento delle articolazioni delle dita (metacarpofalangee e interfalangee) e di altre piccole articolazioni, tra cui le dita dei piedi. Il goniometro misura il campo di movimento (ROM) di varie articolazioni.

La testa da 180° è marcata con incrementi di 5° Scala lineare sulle misure del braccio in pollici e centimetri. La tensione tra le braccia è controllata dalla manopola del pollice.

INDICAZIONE PER L'USO E PRECAUZIONI

I dispositivi sono destinati all'uso professionale da parte di operatori qualificati con le necessarie competenze. L'uso del prodotto comporta il contatto diretto con la cute del paziente; utilizzare sempre guanti protettivi, non usare su cute lesa, maneggiare con cura al fine di evitare abrasioni accidentali. Pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo; utilizzare soluzione disinfettante non aggressiva a pH neutro (PH7), non utilizzare soluzioni contenenti ioni di cloruro o ad alto contenuto di alcol. Prodotto destinato a fornire misurazioni indicative di facile lettura.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi

Simboli / Symbols / Symboles / Simbolos				
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar	LOT IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso		IT Conservare in luogo fresco e asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco	REF IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto