



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**MISURATORE CORPOREO**

**BODY METER**

**RUBAN PÉRIMÉTRIQUE**

**MEDIDOR CORPORAL**

**KÖRPERFETTMESSGERÄT**

**MEDIDOR CORPORAL**

**Μεζούρα Σώματος**

**مساجلا سايقم**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

يف قصتكملا ةطلسلاو ئمناصللا ةهجلا ملادن اندوز يذلا يبطة زاهجلا بقلعه اييف عقو ريطم ثدام يانعم اروف غ الدبلا بجي  
اهيف مقتبي يتلا وضملا قلودلا

**REF G006D (Gima 27347 - 27350)**

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Distribuido por/Vertrieben von/Διανέμονται από/دistribuito da:  
**Gima S.p.A.** - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Eingeführt von/Εισαγωγή από/  
**Solution Group S.r.l.** - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy  
solutiongroup@legalmail.it - [www.solutiongroup.it](http://www.solutiongroup.it)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Κατασκευαστής/  
Samson Innovation Corporation Ltd. - Room F, 8th Floor, Hop Hing Industrial Building, 704 Castle Peak Road,  
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong - Made in China




Nastro per la valutazione della distribuzione del tessuto adiposo. Corpo in ABS con impugnatura ergonomica. Il nastro è fatto con uno speciale materiale plastico indeformabile, con doppia scala di valutazione colorata per le indicazioni di rischio diviso, uomo donna.

Utilizzabile su tutte le circonferenze corporee, grazie al suo bottone retrattile e al fermo flessibile che ne permette una lettura agevolata dei dati.

La particolare flessibilità del suo braccio in materiale termoplastico atossico, ne permette uno specifico uso in ambito pediatrico

Posizione del nastro, per una corretta misurazione della circonferenza addominale

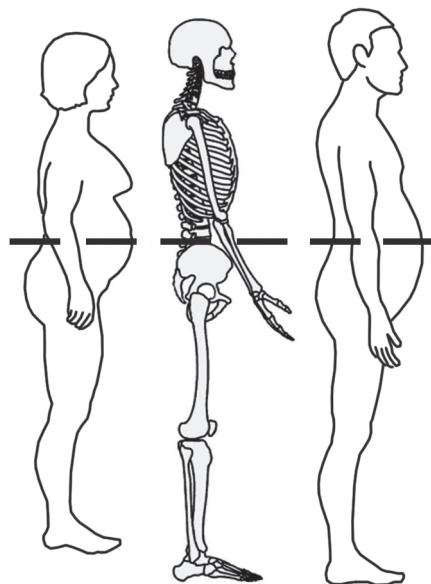

*Individuo in posizione eretta.*

*Localizzare il margine superiore dell'anca e l'apice della cresta iliaca destra.*

*Posizionare il nastro orizzontale attorno all'addome a livello del margine della cresta iliaca.*

*Prima di rilevare la misura assicurarsi che il nastro sia aderente ma che non comprima la cute e che sia parallelo al pavimento.*

*Rilevare la misura al termine di una espirazione normale.*

### **CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.