

**CHIAPPA ARREDAMENTI S.r.l.**

Via Monte Rosa, 15  
20014 Nerviano (MI) – ITALY  
T: +39-0331-587504

Email: [web@chiappaarredamenti.com](mailto:web@chiappaarredamenti.com)

Web: [www.chiappaarredamenti.com](http://www.chiappaarredamenti.com)

**Cod. 120765 SLB RD**

**LETTO BARIATRICO ELETTRICO a 4 SEZIONI ALLARGABILI**  
(regolazioni: ALZASCHIENA, ALZAGAMBE, ALTEZZA VARIABILE, TR-RTR)



< piano rete regolabile in larghezza da 90cm a 120cm >

## Specifiche Tecniche

Dimensioni Telaio Perimetrale	
1. Sezioni Chiuse	230 cm x 106 cm (sponde incluse)
2. Sezioni Estese	246 cm x 136 cm (sponde incluse)
Dimensioni e Regolazioni del Piano Rete	
1. Sezioni Chiuse	200 cm x 90 cm
2. Sezioni Aperte (1° regolazione)	200 cm x 105 cm
3. Sezioni Aperte (2° regolazione)	200 cm x 120 cm
4. Allungaletto	da 200 cm a 220 cm
Altezza Massima	75 cm (79 cm con Bilancia Integrata)
Altezza Minima	39 cm (43 cm con Bilancia Integrata)
Peso	175 kg (195 kg con Bilancia Integrata)
Classe di Isolamento Elettrico	Class 1
Grado di Protezione	IP 66
Peso Massimo del Paziente	450 kg
Carico di Lavoro in Sicurezza	500 kg

## Caratteristiche

Letto Bariatrico con 4 sezioni allargabili e spalle di testa/piedi allargabili, con movimenti di alzaschiena, alzagambe, altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.
Trendelenburg 12°
Reverse Trendelenburg 12°
Regolazione sezioni <ul style="list-style-type: none"><li>• Alzaschiena 0° - 52° (64° con accessorio 500937: retrotraslazione dell'alzaschiena)</li><li>• Alzagambe 0° - 32°</li></ul>
Altezza da terra 16,5 cm
Pulsantiera con grafica esplicativa per regolazione sezioni e Supervisore per regolazione sezioni ed interdizione movimenti
Pulsante CPR dedicato (regolazione elettrica 23" abbassamento rapido sezioni)
Configurazione ergonomica sponde in posizione poltrona per una maggior naturalezza e comfort
Batteria d'Emergenza
n.3 ruote gemellate Ø 150 mm e n.1 ruota gemellata direzionale Ø 150 mm antistatica
NUOVO pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande maneggevolezza: direzionale (n.1 ruota), libero (n.4 ruote), frenato (n.4 ruote).
n.4 NUOVE sponde laterali rimovibili e regolabili su 2 altezze (conformi alla UNI CEI EN 60601-2-52)
n.2 NUOVE spalle di testa e di piedi allargabili (conformi alla UNI CEI EN 60601-2-52) con inserto in HPL (avio, avorio, blu, giallo o verde) e facilmente rimovibili
n.4 paracolpi esterni in PVC color nero
n.2 sedi per asta flebo nella sezione di testa
Vernice anti-microbica



< posizione poltrona cardiaca con pulsante dedicato >



< Trendelenburg >



< Reverse Trendelenburg >



< allungaletto integrato da 200cm a 220cm >



< porta coperte estraibile >



**direzionale**



**girevole**



**frenato**

< NUOVO pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande maneggevolezza >

## Accessori non inclusi

Asta sollevammatati con 2 ganci Flebo inclusi (cod. 500933)

Asta Flebo regolabile in altezza (cod. 500691)


Asta Flebo ad altezza fissa (cod. 500699)

Sedi aggiuntive x 2 Aste Flebo alla sezione piedi (cod. 500698)

Ruote Gemellate Antistatiche aggiuntive (cod. 500864)

Retrotraslazione dell'alzaschiena (mod. 500937)

Porta Cassette X-Ray per alzaschiena (mod. 500953)(solo in combinazione con

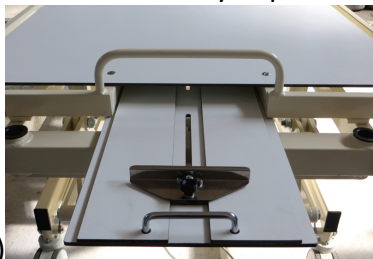

500937)

Materasso Bariatrico (mod. 500453)

### DISPONIBILE ANCHE con **BILANCIA INTEGRATA**




Il **LETTO BARIATRICO ELETTRICO con **BILANCIA INTEGRATA**** permette allo Staff Medico di verificare il peso mentre il paziente giace comodamente nel letto. Lo Staff può così velocemente ottenere questo dato, senza dover far alzare il paziente e senza condurlo ad una bilancia classica, ogni qualvolta sia necessario controllarne il peso.


Capacità: 500kg

Divisione: 200g

*Classe III di precisione secondo Nawi [Non Automatic Weighing Instrument - European Directive 90/384/EEC].*

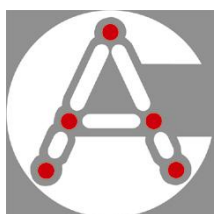

Conforme ai requisiti dell'Allegato VII della Direttiva 93/42 CEE - Sistemi Medicali Classe I e successive modifiche 2007/47/CE  
Classificazione RDM presso il Ministero della Salute (Repertorio Dispositivi Medici): 106290/R  
Classificazione CND: z12030799  
Classificazione GMDN: 35563

RDM **106290-R**  
# 000000001   
::: made in italy :::