



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE
SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-
TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

REF B01 (GIMA 29544)


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

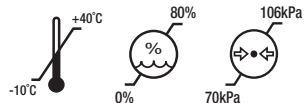

Uso previsto:

- Questo prodotto funziona in base alla regolazione della posizione della fibbia sulla cintura per fissare il trasduttore fetale.

Introduzione al prodotto:

- Nome del prodotto: Cintura monouso con trasduttore fetale.
- Struttura del prodotto: È composto da una cintura elastica e da una fibbia.

Gamma di prodotti:

- Viene utilizzato con il trasduttore fetale in gravidanza nel monitoraggio fetale, per fissare il trasduttore fetale.

Condizione d'uso:

- Temperatura: 0°C~40°C
- Umidità relativa: 15%~95%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

Confezione e conservazione:

- La cintura fetale monouso deve essere confezionata in un unico imballaggio; il prodotto confezionato deve essere conservato in un locale non corrosivo e con una buona ventilazione.

Conservare l'ambiente come indicato di seguito:

- Temperatura: -10°C~+40°C
- Umidità relativa: ≤80%
- Pressione atmosferica: 70kpa~106kpa

Installazione/utilizzo:

- Fissare un'estremità della cintura al trasduttore inserendo uno dei fori della cintura sul pulsante in cima al trasduttore.
- Mantenendo il trasduttore in posizione, tendere l'altra estremità della cintura e agganciarla al

pulsante, assicurando una tensione sufficiente a mantenere il trasduttore in contatto con l'addome.

- Evitare di stringere eccessivamente per non creare inutili disagi al paziente.

Prodotto pulito:

- Lavare la cintura in acqua tiepida, non strofinare il bordo della cintura fetale per evitare la rimozione, non esporla.

Periodo di validità:

- Periodo di validità: 2 anni.

Sostituire e abbandonare:

- Sostituire: In queste situazioni, come fratture, danni elastici, data di scadenza, sostituire la cintura fetale con una nuova.
- Abbandono: Il nastro abbandonato può essere trattato come un normale rifiuto.

Controindicazioni, precauzioni, avvertenze e consigli di prudenza:

- Controindicazioni: Le cinture non devono essere fissate nel punto della lesione.
- Allergie allo spandex da smettere di usare.
- Avvertenze: Questo prodotto è monouso per evitare infezioni incrociate. Leggere le istruzioni prima dell'uso.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

