



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE
SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-
TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

REF B01 (GIMA 29544)


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

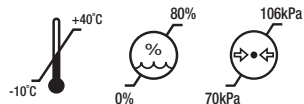

Verwachte gebruiksmogelijkheden:

- Dit product is gebaseerd op de positie van de gesp op de riem om de foetale transducer te bevestigen.

Productintroductie:

- Productnaam: wegwerpbaar foetale transducer riem.
- Productstructuur: bestaande uit elastische banden en gespen.

Productbereik:

- Het wordt gebruikt voor foetale monitoring met foetale transducers tijdens de zwangerschap om foetale transducers te fixeren.

Gebruiksvoorwaarden:

- Temperatuur: 0°C ~ 40°C
- Relatieve vochtigheid: 15% ~ 95%
- Atmosferische druk: 70 kPa ~ 106 kPa

Verpakkingen en opslag:

- De banden voor wegwerpbaar gebruik moeten afzonderlijk worden verpakt en de verpakte producten moeten worden opgeslagen in een niet-corrosieve, goed geventileerde ruimte.

De opslagomgeving is als volgt:

- Temperatuur: 10°C ~ 40°C
- Relatieve vochtigheid: < 80%
- Atmosferische druk: 70 kPa ~ 106 kPa

Installatie/gebruik:

- Een uiteinde van de riem is verbonden met de transducer door een gat in de riem aan de bovenste knop van de transducer te binden.
- Houd de transducer op zijn plaats, trek het andere uiteinde van de riem aan en bind de riem aan de knop om voldoende spanning te

garanderen om de transducer stevig in contact te brengen met de buik.

- Vermijd overmatige verkrapping omdat dit onnodig ongemak voor de patiënt kan veroorzaken.

Producten schoon:

- Spoel de riem met warm water, wrijf de rand van de band niet, om te voorkomen dat deze wordt verwijderd en niet wordt blootgesteld.

Geldigheidsduur:

- Geldigheidsperiode: 2 jaar.

Vervanging en stopzetting:

- Vervanging: vervang de nieuwe band in het geval van breuk, elastische schade, verval, enz.
- Afval: afgedankte riemen kunnen als normaal afval worden behandeld.

Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en waarschuwingsverklaringen:

- Contra-indicaties: de riem mag niet op de beschadigde plaats worden bevestigd.
- Spandex allergieën stoppen met gebruiken.
- Opmerking: dit product is een product voor eenmalig gebruik dat kruisbesmetting voorkomt. Lees de instructies voor gebruik

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast

