

CALIBRO PER NEONATI
BABY MEASURING ROD WITH CALIPERS
JAUGE POUR BÉBÉ
CALIBRE PARA BEBÉS
MEDIDOR PARA RECÉM-NASCIDOS
MESSSCHIEBER FÜR NEUGEBORENE
PEDIOMETRU TIP RIGLĂ PENTRU NOU-NĂSCUȚI
KROPPSMÄTARE FÖR SPÄDBARN
SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW
ΒΡΕΦΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch -
Manual de utilizare și întreținere - Instruktioner för användning och underhåll
Instrukcja użytkownika - Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.

VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.

ATENȚIE: Operatorii trebuie să citească și să înțeleagă complet acest manual înainte de a utiliza produsul.

FÖRSIKTIGHET: Operatörer måste läsa och förstå denna manual helt innan de använder produkten.

UWAGA: Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν πλήρως αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του προϊόντος.

GIMA 27326



Metrica S.p.A.,
Via A. Grandi 18, 20097
San Donato Milanese (MI) - Italy
Made in Italy





10455



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



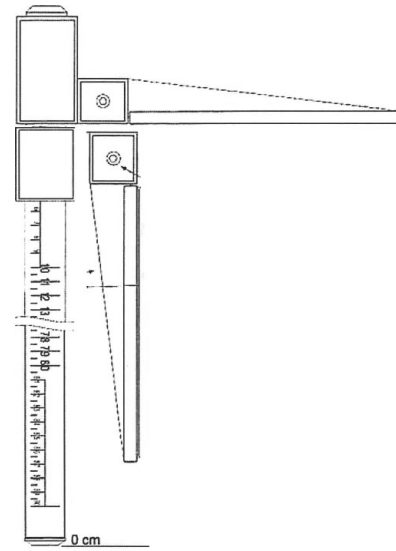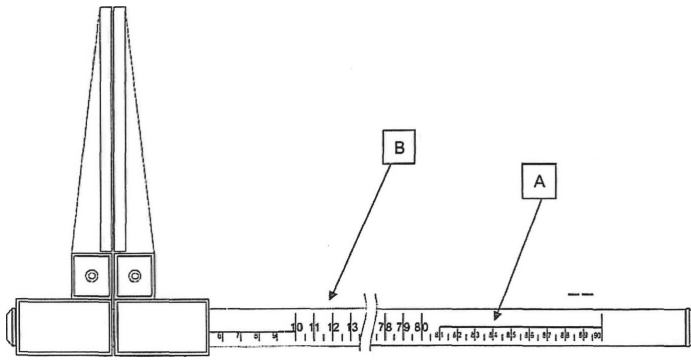

WSTĘP

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie Klientowi wszelkich informacji na temat SUWMIARKI DLA NOWORODKÓW, oraz instrukcji obsługi i konserwacji SUWMIARKI DLA NOWORODKÓW.

Instrukcja obsługi musi być utrzymywana w dobrym stanie i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW to przyrząd, którego funkcją jest pomiar długości ciała noworodka lub jego części w cm, z dokładnością ± 1 cm.

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Zbliżyć dwie końcówki suwmiarki do mierzonej części ciała i odczytać wartość wskazywaną przez wskaźnik na podziałce.

Przyrząd posiada pręt z podziałką z dwoma rodzajami skali do pomiaru: w cm

A) skala z mniejszą czcionką od 0-90 cm co 0,5 cm z tolerancją $\pm 0,5$ cm

B) skala z większą czcionką od 0-90 cm co 0,5 cm z tolerancją $\pm 0,5$ cm

Można jej również używać w pozycji pionowej, obracając wewnętrzną końcówkę o 90° względem pręta z podziałką

OSTRZEŻENIA/KONSERWACJA

SUWMIARKA DLA NOWORODKÓW może być używana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Nie używać przyrządu, jeśli jest on uszkodzony. Unikać samodzielnych napraw. W razie potrzeby skontaktować się z producentem.

Po otwarciu opakowania, dokładnie sprawdzić wszystkie części przyrządu. Sprawdzić obecność i idealny stan wszystkich elementów.

Czyścić SUWMIARKĘ DLA NOWORODKÓW szmatką zwilżoną substancjami, jak alkohol lub płyn do mycia szyb, które nie uszkodzą aluminium.

Należy poinformować producenta i kompetentne władze danego Kraju członkowskiego o każdym poważnym wypadku związanym z wyrobem medycznym naszej produkcji.

OPIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Nr. Elementu	Opis części
1	Końcówki
2	Ruchomy uchwyt
3	Stałe wsparcie
4	Aluminiowy pręt z podziałką
5	Plastikowa nasadka zamykająca

W celu wymiany komponentów, należy wysłać przyrząd do producenta.

REF	Kod produktu	LOT	Numer partii
	Przechowywać z dala od działania promieni słonecznych		Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu
	Wyrób medyczny zgodne z Rozporządzeniem 2017/745		Producent
	Wyrób medyczny		Data produkcji
	Uwaga: Uważnie przeczytać instrukcje i postępować zgodnie z nimi (ostrzeżenia) dotyczące użytkowania		Przeczytać instrukcję obsługi
	Numer seryjny		Dystrybuowane przez
	Unikalny identyfikator urządzenia		

WARUNKI GWARANCJI FIRMY GIMA

Obowiązuje standardowa 12-miesięczna gwarancja B2B Gima