



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE SINGOLO PAZIENTE
SINGLE PATIENT FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL À USAGE UNIQUE
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA DESCARTÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΑ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU JEDNORAZOWEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FE-
TALĂ, DE UNICĂ FOLOSINȚĂ
FOSTERGIVAREBÄLTE FÖR ENGÅNGSBRUK

REF B01 (GIMA 29544)


Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

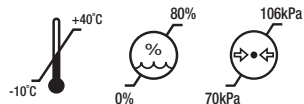

Zamierzone zastosowanie:

- Produkt umożliwia regulację sprzączki na pasku w celu poprawnego zamocowania przetwornika do monitorowania płodu.

Informacje o produkcie:

- Nazwa produktu: Pasek przetwornika płodu jednorazowego użytku.
- Struktura produktu: Składa się z elastycznego paska i sprzączki.

Zakres zastosowania produktu:

- Umożliwia zamocowanie przetwornika płodu w celu monitorowania płodu.

Warunki używania:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Wilgotność względna: 15% ~ 95%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

Opakowanie i przechowywanie:

- Pasek do przetwornika płodu jednorazowego użytku musi być zapakowany pojedynczo i przechowywany w pomieszczeniu bez gazów korozyjnych i dobrze wentylowanym.

Przechowywać w środowisku o następującej charakterystyce:

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Wilgotność względna: ≤80%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

Instalacja/używanie:

- Zamocować jedną końcówkę pasa do przetwornika poprzez wprowadzenie jednego z otworów paska na przycisk znajdujący się w górnej części przetwornika.
- Utrzymując przetwornik w pozycji, przytrzymać drugą końcówkę pasa i zaczepić ją na przycisku

tak, aby zapewnić napięcie wystarczające dla utrzymania przetwornika w kontakcie z brzuchem.

- Nie zaciskać nadmiernie paska, aby nie spowodować uczucia dyskomfortu u pacjenta.

Czyszczenie produktu:

- Pasek myć w ciepłej wodzie, nie trzeć krawędzi paska, aby uniknąć usunięcia, nie wystawiać na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Okres ważności:

- Okres ważności: 2 lata.

Wymiana i utylizacja:

- Wymiana: W przypadku pęknięcia, uszkodzenia, upływu terminu ważności, wymienić pasek do monitorowania płodu na nowy.
- Utylizacja: Pasek może być utylizowany jako odpad zwykły.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia, wskazania i środki ostrożności:

- Przeciwwskazania: Nie stosować w miejscu urazu.
- Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia alergii na spandex.
- Ostrzeżenia: Przedmiotowy produkt jest jednorazowego użytku, aby uniknąć zakażenia krzyżowego. Przed użyciem przeczytać instrukcję

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

