



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


**CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI**  
**REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ**  
**ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO**  
**UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,**  
**REFOLOSIBILĂ**  
**ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE**

**REF B08 (GIMA 29545)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710.  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado  
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /  
Importowane przez / Importat de / Importerad av:  
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

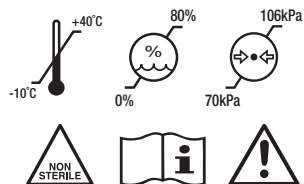

### Zamierzone zastosowanie:

- Produkt umożliwi regulację sprzączki na pasku w celu poprawnego zamocowania przetwornika do monitorowania płodu.

### Informacje o produkcie:

- Nazwa produktu: Pasek przetwornika płodu do wielokrotnego użytku.
- Struktura produktu: Składa się z elastycznego paska i sprzączki.

### Zakres zastosowania produktu:

- Umożliwia zamocowanie przetwornika płodu w celu monitorowania płodu.

### Warunki używania:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Wilgotność względna: 15% ~ 95%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

### Opakowanie i przechowywanie:

- Pasek do przetwornika płodu użytku musi być zapakowany pojedynczo i przechowywany w pomieszczeniu bez gazów korozyjnych i dobrze wentylowanym.

### Przechowywać w środowisku o następującej charakterystyce:

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Wilgotność względna: ≤80%
- Ciśnienie atmosferyczne: 70kpa ~ 106kpa

### Instalacja/używanie:

- Zamocować jedną końcówkę pasa do przetwornika poprzez wprowadzenie jednego z otworów paska na przycisk znajdujący się w górnej części przetwornika.
- Utrzymując przetwornik w pozycji, przytrzymać drugą końcówkę pasa i zaczepić ją na przycisku

tak, aby zapewnić napięcie wystarczające dla utrzymania przetwornika w kontakcie z brzuchem.

- Nie zaciskać nadmiernie paska, aby nie spowodować uczucia dyskomfortu u pacjenta.

### Czyszczenie produktu:

- Pasek myć w ciepłej wodzie, nie trzeć krawędzi paska, aby uniknąć usunięcia, nie wystawiać na oddziaływanie czynników zewnętrznych.

### Okres ważności:

- Okres ważności: 2 lata.

### Wymiana i utylizacja:

- Wymiana: W przypadku pęknięcia, uszkodzenia, upływu terminu ważności, wymienić pasek do monitorowania płodu na nowy.
- Utylizacja: Pasek może być utylizowany jako odpad zwykły.

### Przeciwwskazania, ostrzeżenia, wskazania i środki ostrożności:

- Przeciwwskazania: Nie stosować w miejscu urazu.
- Zaprzestać stosowania w przypadku wystąpienia alergii na spandex.
- Opmmerking: Lees de instructies voor gebruik.

### WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

