




Cureta dérmica descartável

- Lâminas de aço inoxidável com alça de polipropileno
- Pega com nervuras para manuseamento e controle seguros
- Identificação do tamanho em cada cureta
- Utilização para curetagem de tecido, maioritariamente pele
- As curetas estão esterilizadas e são de uso único
- Áreas clínicas: Dermatologia, cirurgia, veterinária e podologia

Tamanhos:

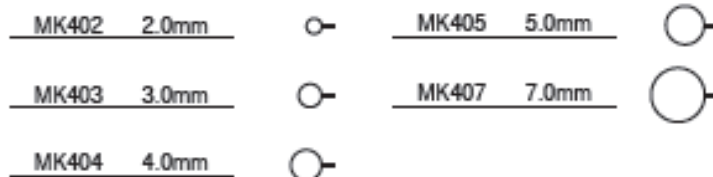


Embalagem: cada cureta encontra-se numa embalagem alveolar, 20 unidades estão numa caixa distribuidora e estão disponíveis 20 caixas por cada caixote de exportação.

Manuseamento seguro

- Armazene quaisquer novos produtos num lugar seco, limpo e seguro.
- Evite temperaturas altas, humidade elevada, luz solar direta e imersão em água, conservando à temperatura ambiente.
- Não conserve num local com produtos químicos ou com gás.
- É necessário confirmar o período de utilização em cada embalagem e caixa (5 anos de prazo de validade).
- Após confirmar o prazo de validade em cada pacote e a caixa, descarte os produtos cujo prazo já tenha sido ultrapassado.
- Antes de cada utilização, verifique se o produto possui: componentes soltos, tortos, quebrados, rachados, desgastados ou fraturados.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou defeituoso. Ponha o produto de lado se estiver danificado.
- Reutilização proibida
- Reesterilização proibida
- Não use após a data limite de validade
- Não use se considerar que a condição asséptica dos produtos está comprometida pela embalagem quebrada.
- Verifique se a embalagem está intacta ou perfurada antes de a abrir.



kai industries co.ltd, 1110 Oyana, Seki City, Gifu Pref., 501-3992, Japan

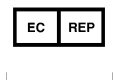

kai Europe GmbH, Kottendorfer Straße 5, 42697 Solingen, Germany

CE0197

O produto respeita os requisitos da diretiva 93/42CEE