



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST

www.led.it

(PT) 00900.FST - Filtro ULPA estandar (5h) - AZUL
00900.FU01 - Filtro ULPA para SURTRON EVAC (20h) - VERMELHO

Verifique status do produto antes de usar.
Produto descartável. Não reutilize.
Não inalar líquido.
O produto tem que ser eliminado conforme com os procedimentos da eliminação de resíduos hospitalares.
As conexões devem ser realizados por pessoal treinado.


O produto é compatível para o utilizo com evacuadores de fumaças cirúrgicas SURTRON® EVAC (10200.10 - 10200.10/115V).

ara a conexão siga as instruções da unidade de aspiração de fumaças cirúrgicas SURTRON® EVAC.

Especificações técnicas

Tipo filtro: ULPA carvões activados
Eficiência do filtro: 99,999X%
Diâmetro partículas: 0,12 micron
Diâmetro ataque tubo saída: 22 mm
Duração filtro 00900.FST: 5 horas
Duração filtro 00900.FU01: 20 horas


LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

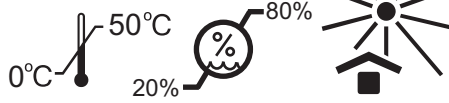

(IT) (EN) (ES) (FR) (DE) (PT) (TR)

IA00900-XXXAr2
ed. 07/2013 2013 (C) LED SpA

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

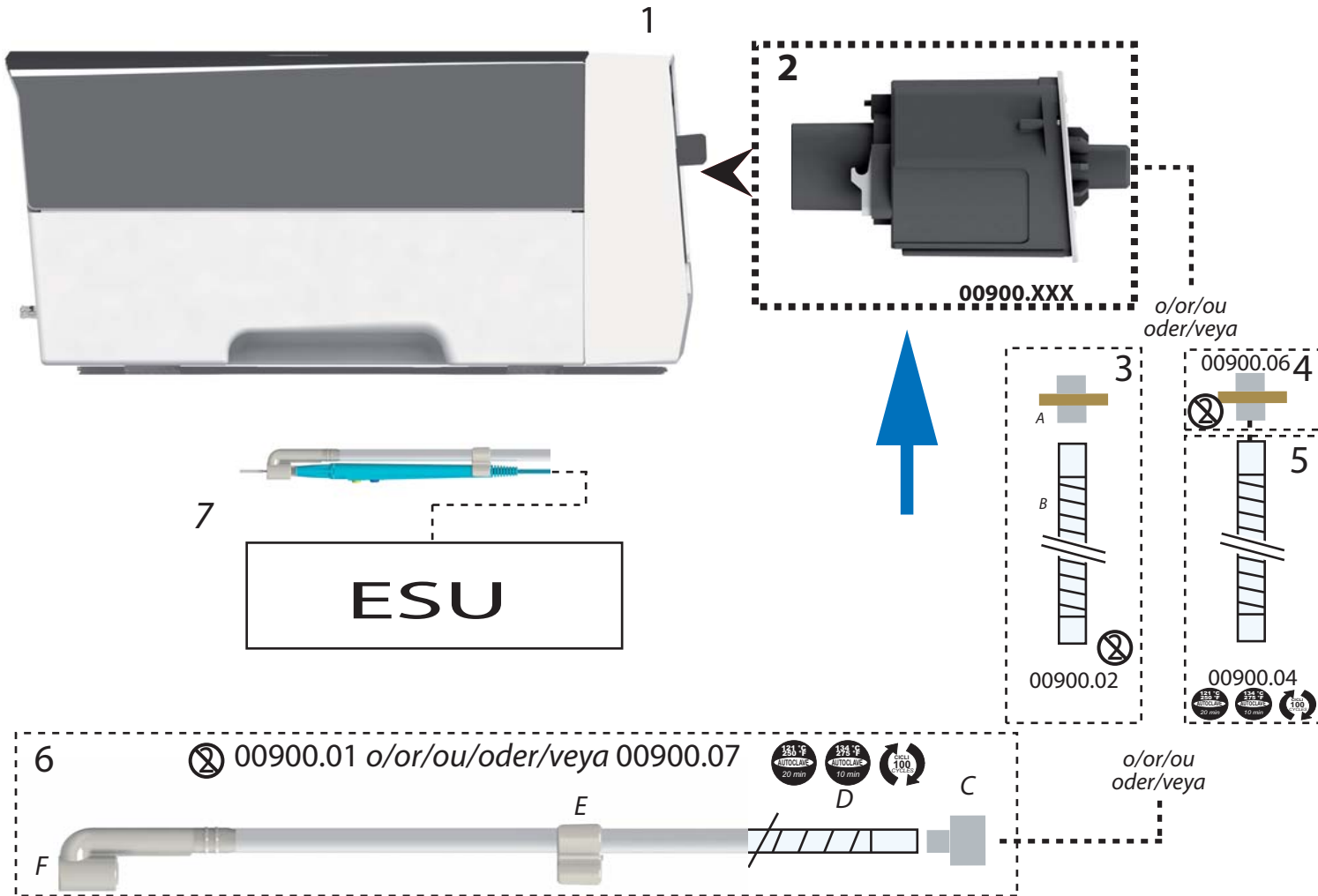

1 ASPIRADOR DE FUMAÇA* série 10200.10 - 10200.10/115V
2 FILTRO série 00900.XXX
3 KIT ASPIRAÇÃO (00900.02)* - A Filtro - B Tubo dia. 22mm largura 2,4 mt
4 Filtro dia. 22mm (00900.06)*
5 Tubo autoclavavel dia. 22mm (00900.04)*
6 KIT ASPIRAÇÃO CANETA (00900.01 o 00900.07)* C Adaptador 10mm/22mm . D Tubo Largura 1,5 mt E Clipa para o fisejo do tubo na caneta - F Adaptador para a caneta
7 Detalhe da caneta* com 00900.01 o 00900.07, a caneta tem que ser conectada à sua unidade electrocirurgica (ESU)*. * Não incluido



REF 20h
00900.FU01

REF 5h
00900.FST

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-XXXAr2
ed. 07/2013
2013 (C) LED SpA