



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SGABELLO DA ESTETISTA
BEAUTICIAN STOOL
TABOURET D'ESTHÉTICIENNE
TABURETE PARA ESTÉTICA
BANCO DE ESTETICISTA
KOSMETIKHOCKER**

REF 1025A (GIMA 45260 - 45261 - 45262)

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante/Hersteller

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District, JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par /
Importado por / Importado por / Eingeführt von:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



1 ACERCA DESTA MANUAL

Este manual deve ser utilizado apenas como referência de operação deste modelo específico. Se o manual for utilizado para outros fins, o fabricante não vai assumir o comando as consequências e responsabilidades correspondentes. Todas as informações deste manual devem ser protegidas por direitos de autor e não devem ser copiadas nem traduzidas em qualquer parte desta especificação sem o consentimento por escrito do fabricante.

2 AVISO

- Não se ponha de pé em cima do produto.
- Não permita que crianças brinquem com o produto.
- Não coloque o equipamento em locais húmidos, tais como casas de banho, não exponha à luz solar direta.
- Não utilize este produto em locais onde estiver a pintar / pulverizar tintas.

3 PRECAUÇÕES


- Os operadores devem usar este produto estritamente de acordo com as instruções e guardar este manual para referência futura.
- Os operadores devem usar este produto estritamente de acordo com as instruções e guardar este manual para referência futura.
- Cumpra com os procedimentos operacionais de segurança, não sobrecarregue. Certifique-se de que os componentes do produto estejam em boas condições, elimine os fatores inseguros.
- Aperte os rodízios, encostos e o assento regularmente para evitar avarias causadas por peças soltas ou em queda.
- Este produto não deve ser usado com falhas. Quando fenómenos ou sons anormais são encontrados, verifique imediatamente acerca disso. Use após o problema ter sido resolvido.
- O operador deve estar familiarizado com as precauções descritas em cada capítulo do manual do produto para garantir a segurança pessoal e do produto.
- Coloque o equipamento num solo nivelado.
- Se os rodízios estiverem danificados, substitua-os antes de usar.
- Após cada tratamento, use um reagente neutro para remover a poeira e manchas no couro e na madeira.
- Coloque o produto em local adequado, de acordo com o layout geral, a iluminação natural ou artificial e as condições de funcionamento do ambiente de trabalho. E mantenha-o em ambiente limpo, seco e fresco.

4 MONTAGEM E OPERAÇÃO


1. Ponha o produto em local apropriado, de acordo com a disposição geral, a iluminação natural ou artificial e as condições de funcionamento do ambiente de trabalho. E mantenha-o no ambiente limpo, seco e fresco.
2. Abra a caixa de cartão da embalagem para verificar se a cama está intacta e se os acessórios ou sobressalentes estão completos. Entre em contacto com o distribuidor ou conosco se houver algum problema.
3. Instalação.

Este gráfico de produto é apenas para exibição, para a estrutura específica do produto, consulte o produto atual.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

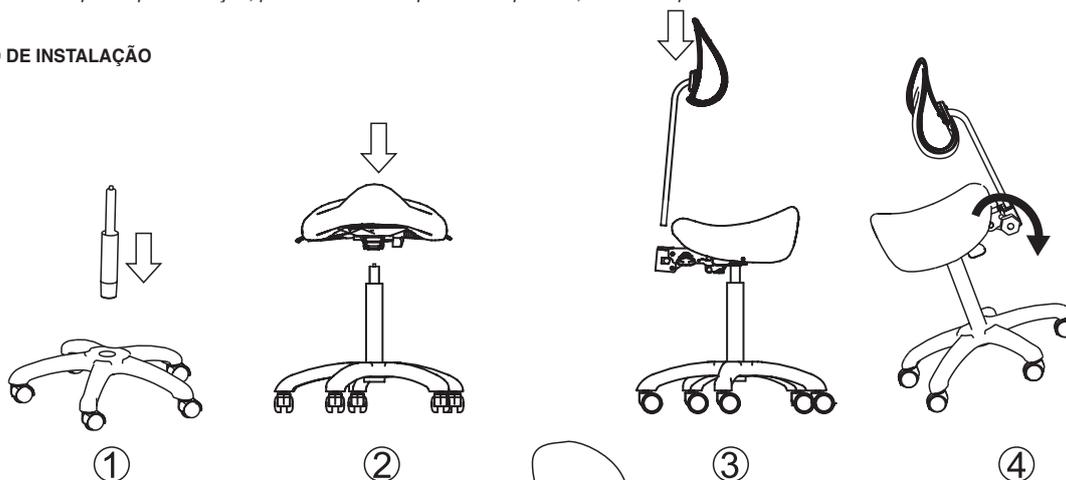


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

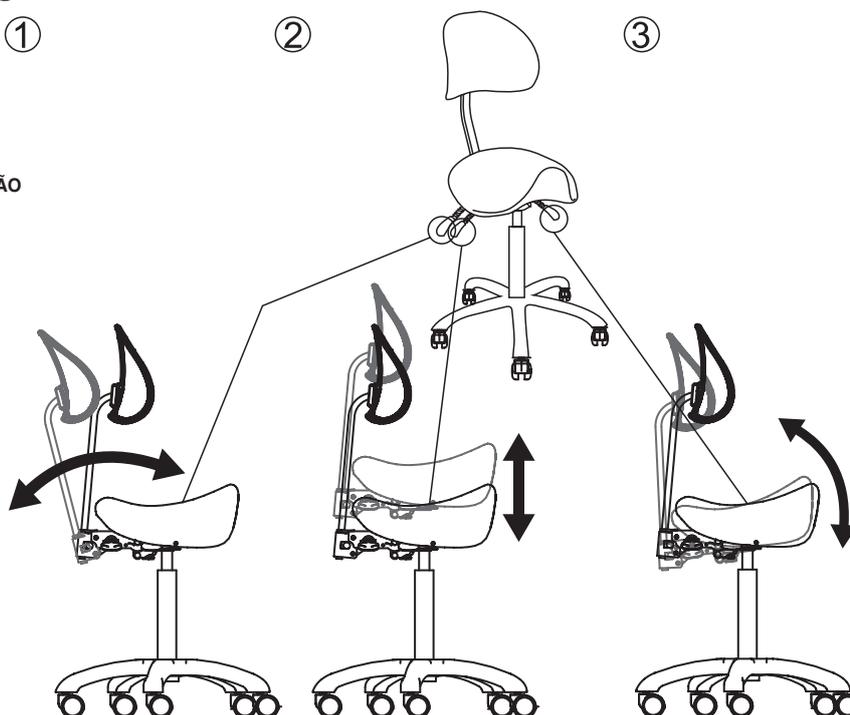

5 PARÂMETROS TÉCNICOS

As ilustrações do produto neste manual baseiam-se nos parâmetros de configuração do elevador de gás padrão. Se estiver equipado com outro elevador de gás opcional, os parâmetros estão sujeitos ao produto atual.

Elevação de carga nominal	170kg
Tamanho do pacote	590x300x600mm
Peso líquido	9.3kg
Peso bruto	11.2kg

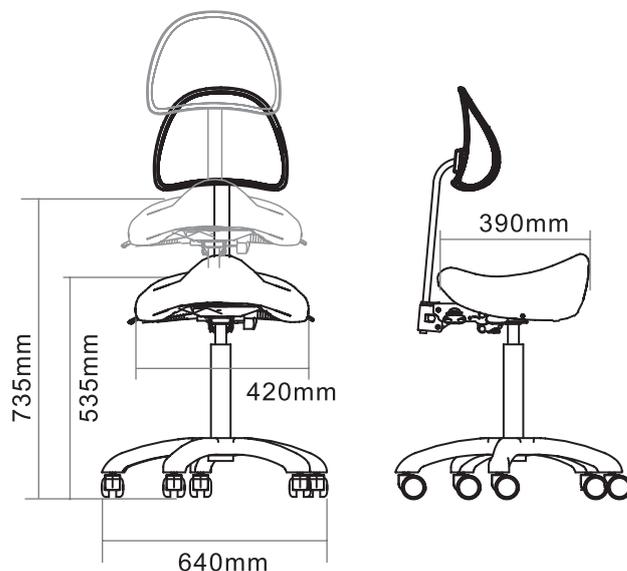

6 MANUTENÇÃO

Se houver massa consistente, limpe a superfície com água limpa e reagente neutro e use um pano macio para remover a poeira e manchas. É proibido usar álcool, ácido forte, álcali forte e outros solventes para prevenir a deterioração prematura das peças de plástico.

7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

NÃO ESTÁ A FUNCIONAR DEVIDAMENTE	1. Não é possível elevar ou baixar o banco.	1. Substitua o elevador de gás.
	2. Os rodízios não podem rodar ou mover-se.	2. Substitua o rodízio.

Se o problema ainda não estiver resolvido após a operação acima, entre em contacto com o centro de manutenção ou o fornecedor para resolvê-lo.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.