



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


**CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI**  
**REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS**  
**SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL**  
**CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL**  
**CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL**  
**EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF**  
**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ**  
**ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM**  
**PASEK PRZETWORNIA PŁODU DO WIELOKROTNEGO**  
**UŻYTKU**  
**CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,**  
**REFOLOSIBILĂ**  
**ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE**

**REF B08 (GIMA 29545)**

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /  
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:  
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.  
503 of 2nd. Block, #2 of Shaping Road, Tangxia Town,  
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com  
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado  
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /  
Importowane przez / Importat de / Importerad av:  
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

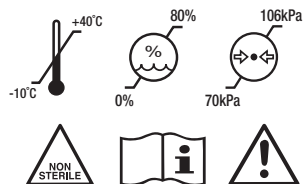

**Utilizare prevăzută:**

- Acest produs se utilizează pentru a fixa traductorul fetal, prin reglarea poziției cataramei pe centură.

**Prezentare produs:**

- Nume produs: Cureau abdominală pentru monitorizarea fetală, re folosibilă .
- Alcătuire produs: Este realizat dintr-o curea elastică și o cataramă.

**Interval produs:**

- Se utilizează cu traductorul fetal în timpul monitorizării fetale la femeile gravide, pentru a fixa traductorul fetal.

**Condiții de utilizare:**

- Temperatură: 0°C ~ 40°C
- Umiditate relativă: 15% ~ 95%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

**Ambalare și depozitare:**

- Cureaua abdominală pentru monitorizare fetală este ambalată individual. Produsul ambalat trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, fără gaze corozive.

**Condiții mediu de depozitare:**

- Temperatură: -10°C ~ +40°C
- Umiditate relativă: ≤80%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

**Instalare/utilizare:**

- Prindeți un capăt al curelei pe traductor, introducând butonul din partea de sus a traductorului într-una din găurile de pe curea.
- Menținând traductorul pe poziție, tensionați celălalt capăt al curelei și cuplați cureaua pe buton, asigurând un grad suficient de tensionare pentru a menține traductorul nemișcat, în contact cu

abdomenul.

- Evitați o strângere excesivă, care ar cauza un disconfort inutil pacientului.

**Curățare produs:**

- Spălați cureaua în apă caldă. Nu frecați marginea curelei pentru a evita desprinderea și nu o expuneți la radiații și la raze directe ale soarelui.

**Perioadă de valabilitate:**

- Perioadă de valabilitate: 2 ani.

**Înlocuire și dezafectare:**

- Înlocuire: În caz de fisurare, deteriorare a țesăturii elastice, depășire a termenului de valabilitate, schimbați cureaua de monitorizare fetală cu una nouă.
- Dezafectare: Curelele dezafectate pot fi aruncate la un loc cu deșeurile normale.

**Contraindicații, precauții, avertismente și atenționări:**

- Contraindicații: Nu fixați curelele pe o zonă lezionată.
- Întrerupeți utilizarea în caz de alergii la spandex.
- Atenționări: Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

**CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA**

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni

