

FÖRSTÄRKTA KIRURGISKA SKYDDSKLÄDER - STERILA

SVENSKA

Produktnamn Förstärkta skyddskläder av SMMS för engångsbruk (Sterila)

Produktkod FGS-RF-SM50-M, FGS-RF-SM50-L, FGS-RF-SM50-XL, FGS-RF-SM50-XXL

Produktstorlek Enhet: cm

GIMA-KOD	21052	21053	21054	21055
FULL GUARD KOD	FGS-RF-SM50-M	FGS-RF-SM50-L	FGS-RF-SM50-XL	FGS-RF-SM50-XXL
Storlekar	120x140 (M)	120x150 (L)	130x150 (XL)	140x160 (XXL)
Längd (Axel till nederkant)	120	120	130	140
Bredd (ett skikt)	140	150	150	160
Bålllängd	65	65	65	69
Ärmlängd	58	59	59	61
Avvikelse	±2	±2	±2	±2

Produktmodell Typ av skyddsrock M/L/XL/XXL

Struktur och sammansättning Produkten använder non-woven-material med 50g SMMS. Den består av framsida, baksida, ärmar, knytband och ärmuppslag. Den teknologiska processen består i utskärning, ultraljudssvetsning av band, karborrband, ärmuppslag, vikning och tätning.

Avsedd användning Produkterna används huvudsakligen för allmän isolering inom öppenvård, akutmottagning, undersökningsrum, rengöringsrum, laboratorier med mera. De är avsedda att användas av sjukvårdspersonal på sjukhus och kliniker för att uppehålla en god hygienisk nivå och bidra till kontroll av infektioner.

Kontraindikationer Produkterna kan endast användas en gång och ska omedelbart användas efter att förpackningen öppnats. Om produkten är skadad, kan den vara våt eller möglig. Använd inte.

Så här används produkten Öppna förpackningen och ta ur produkten, skaka försiktigt skyddsrocken, lyft kragens sidor, sätt in händerna i ärmarna och sträck ut armarna framåt och dra åt skärpen.

Förvaring Förvaras i ett rent rum med relativ fuktighet som inte överskrider 80 %, inga frätande gaser, och förvaras svalt, torrt och väl ventilerat.

⚠ Varning

1. Denna produkt är för engångsbruk, återanvänd inte.
2. Denna produkt är för engångsbruk, dela aldrig med andra personer.
3. Det är förbjudet att använda när förpackningen eller produkterna är skadade.

Anm.: Alla allvariga skador som uppstått i relation till anordningen ska rapporteras till tillverkaren och kompetent myndighet i medlemsstaten där användaren eller patienten befinner sig.















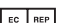





Giltighet 3 år.

Tillverkningsdatum Se datum på förpackningen

Utgångsdatum Se datum på förpackningen

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

 REF	Produktkod	 Skyddas från solljus	 Förvara på svalt och torrt ställe	 MD	Medicinteknisk produkt
 LOT	Satsnummer	 Den medicintekniska produkten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745	 Utgångsdatum	 Temperaturgräns	
 Tillverkare		 Tillverkningsdatum	 Steriliserad med etylen oxid	 Denna sida uppåt	
 Fuktighetsgräns		 Använd inte en förpackning som är skadad	 Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen	 Ömtålig, hanteras varsamt	
 Engångsanordning, får ej återanvändas		 Läs bruksanvisningen	 Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga	 UDI	Unik identifierare för enheten

GIMA 21052
GIMA 21053
GIMA 21054
GIMA 21055



Xianning Full Guard Medical Products Co., Ltd
Yongan East Road Wenquan Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China



FGS-RF-SM50-M
FGS-RF-SM50-L
FGS-RF-SM50-XL
FGS-RF-SM50-XXL



ZOUSTECH S.L.
Pso. Castellana, 141 - Planta 19,
28046 - Madrid, Spain

Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

