



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

en	English	pp. 1	sl	Slovenski	pp. 33
fr	Français	pp. 3	et	Eesti	pp. 35
de	Deutsch	pp. 5	lv	Latviesu	pp. 37
it	Italiano	pp. 7	lt	Lietuviskai	pp. 39
es	Español	pp. 9	ro	Romana	pp. 41
nl	Nederlands	pp. 11	hr	Hrvatski	pp. 43
sv	Svenska	pp. 13	bg	Български	pp. 45
da	Dansk	pp. 15			
no	Norsk	pp. 17			
fi	Suomi	pp. 19			
pt	Português	pp. 21			
el	Ελληνικά	pp. 23			
pl	Polski	pp. 25			
hu	Magyar	pp. 27			
cs	Čeština	pp. 29			
sk	Slovensky	pp. 31			

Digitalni stetoskop 3M™ Littmann® CORE

Priročnik za hiter začetek

Prenešite aplikacijo Eko iz trgovine Apple App Store® ali Google Play Store®.

Vklopite brezžično tehnologijo Bluetooth® na telefonu ali tabličnem računalniku, zaženite aplikacijo in vklopite digitalni pripomoček stetoskop CORE.


Eko

Vsebina škatle

- Digitalni priključek Eko CORE in stetoskop 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Dodatni komplet (majhnih) mehkih oliv 3M Littmann, ki dobro tesnijo
- Nastavek za preprečevanje hladnega občutka
- Napajalni kabel USB
- Priročnik za hiter začetek

Olive

Vstavite olive v smeri naprej.

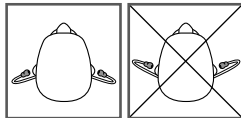

Glasnost

Glasnost prilagodite z gumboma (+) in (-). Na voljo je 7 stopenj glasnosti.

Vklop in izklop

Ko je stetoskop CORE izklopljen, deluje kot neojačeni stetoskop.

Za vklop stetoskopa CORE pritisnite preklonno stikalo navznoter. Lučka bo začela utripati. Zdaj boste v olivah zaslišati ojačeni in filtrirani zvok.

Funkcije telemedicine in umetne inteligence

Družba Eko ponuja funkcije telemedicine in umetne inteligence, za katere je potrebna naročnina na programsko opremo (kjer so na voljo, se prodajajo ločeno).

Naročite se lahko na spletni strani ekohealth.com

Aktivno izničenje hrupa

Za odstranjevanje ambientalnega hrupa iz bližnjega okolja je v stetoskop CORE vključeno aktivno izničenje hrupa. Aktivno izničenje hrupa je mogoče izklopiti ali vklopiti prek aplikacije Eko.



Obvestila

⓪ (utripa)
stetoskop CORE je vklopljen in išče napravo

● (rumeno)
stetoskop CORE je izklopljen in se polni

⦿ (rumeno)
Raven napolnjenosti baterije digitalnega stetoskopa CORE je nizka


○
stetoskop CORE je vklopljen in priključen

● (zelena)
stetoskop CORE je do konca napolnjen

⦿ (modra)
stetoskop CORE snema

Snemanje

Ko je povezava z aplikacijo Eko vzpostavljena, pritisnite gumb (o), da začnete snemati.

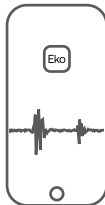

Polnjenje

Kabel mikro USB priključite na stetoskop CORE in za polnjenje uporabite polnilnik 5 V, ki ima potrdilo UL ali oznako CE in je namenjen priklopu v stensko vtičnico. Stetoskop CORE se bo do konca napolnil v približno 2 urah. Ko bo do konca napolnjen, bo lučka zasvetila zeleno.

Uporabniški priročnik

Pred uporabo stetoskopa Littmann CORE preberite uporabniški priročnik. Če si želite ogledati priročnik, obiščite spletno stran:

ekohealth.com/getstarted

Za več informacij o pripomočkih 3M pojdite na HCBRegulatory.3M.com

Servis in podpora

Če ste v ZDA, obiščite spletno stran littmann.com/service ali pokličite telefonsko številko 1-800-228-3957. Če ste zunaj ZDA, poiščite kontaktne podatke za lokalno pisarno družbe 3M na spletni strani littmann.com.

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**
2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA


MD

CE

 **3M Deutschland GmbH**
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany




Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**
1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA

MD

CE

0537

 **Emergo Europe**
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11
34-8726-3344-0