

REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IT EN ES FR DE PT TR

IA00900-01Ar2
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA

TR CERRAHİ DUMAN EMİCİ İÇİN ASPIRASYON KİTİ

Kullanmadan önce cihazın durumunu gözden geçirin.

Tek kullanımlık ürün. Tekrar kullanılmaz.

Sıvı içerisine koymayın.

Bu cihaz zararlı atıkların kontrolü prosedürlerine uygun olarak imha edilmelidir.

Bağlantılar eğitimli personel tarafından yapılmalıdır.


Cihaz “açık ameliyatlarda” ortaya çıkan dumanların aspirasyonunu sağlayacak şekilde üretilmiştir. Tipik babağlantı biçimi:

-Kod 00900.01'e bağlantı (grafik.A-bölüm.4)

-XXX00900.XXX filtre serisine bağlantı (grafik.A-bölüm.2)

Laparoskopik aksesuarlara veya 22 mm çaplı başka uyumlu par.alara bağlamak.

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

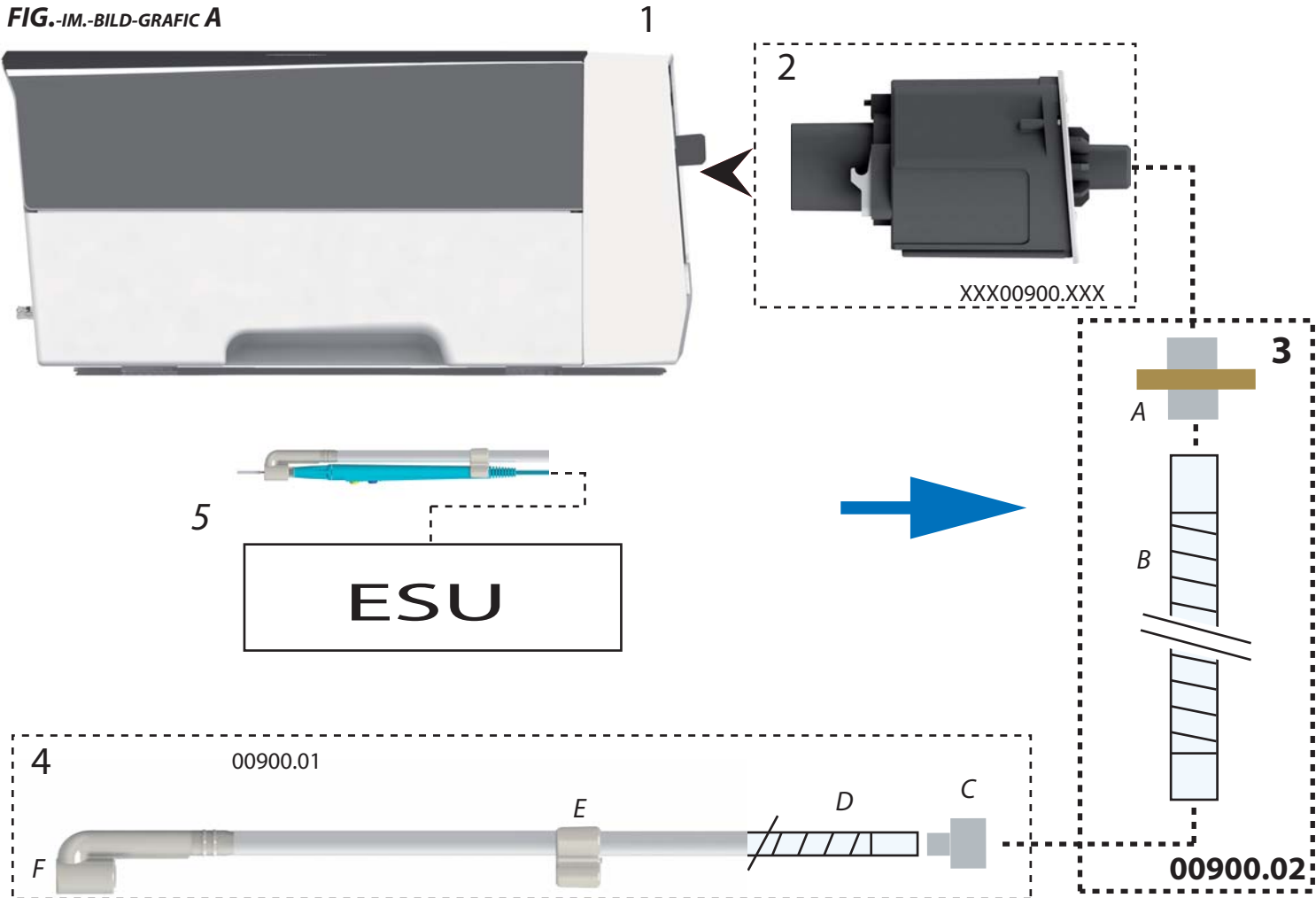

1 DUMAN EMİCİ* seri XXX10200.10 - XXX10200.10/115V

2 FİLTRE* seri XXX00900.XXX

**3 ASPIRASYON KİTİ (00900.02) - A Filtre –
B Hortum çapı: 22mm, Uzunluğu: 2,4 metre**

4 ASPIRASYON KİTİ TUTAMAĞI (00900.01)* – C Adaptörü
10mm/22mm, D Hortum çapı:10, Uzunluk: 1,8 metre, E Hortumu
tutumağa tutturma klipsi, F Tutamak adaptörü

5 Tutamak detayı* 00900.01, tutamak elektrokoter cihazına bağlanmalıdır.



REF 00900.02



LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-02Ar2
ed.05/2012

2012 (C) IED SpA