

iHEALTH: PRODOTTI WIRELESS PER LA SALUTE PERSONALE

5 ACTIVITY TRACKER iHEALTH

• 23530 DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITÀ FISICA E DEL SONNO

Questo dispositivo per il monitoraggio dell'attività fisica vi aiuta a controllare il vostro stato di salute. Vi permette di conoscere il vostro corpo in movimento e a riposo e di tracciare i vostri parametri vitali ovunque e in qualsiasi momento.

Potete tracciare:

ATTIVITÀ FISICA: numero di passi
distanza percorsa
calorie bruciate
livello di attività

SONNO: ore di sonno
numero di risvegli
qualità del sonno
allarme silenzioso

Tutti i dati possono essere sincronizzati su smartphone o tablet. L'applicazione gratuita iHealth Myvitals vi aiuterà ad impostare tendenze, visualizzare statistiche e vi stimolerà a fissare nuovi obiettivi di fitness.

Questo dispositivo innovativo può essere indossato come un orologio (bracciale) e alla cintura. Resiste alla pioggia e al sudore. Connettività wireless con tecnologia bluetooth 4.0.


Batteria: 1 x 3,7 V Li-Ion 165 mAh - durata 3 anni
Fornito con 2 bracciali (blu e nero), 2 clip da cintura (blu e nero) e un cavo USB di ricarica.



Dispositivo fornito con 2 bracciali (blu e nero) e 2 clip da cintura (blu e nero)



6 PULSOXIMETRO iHEALTH

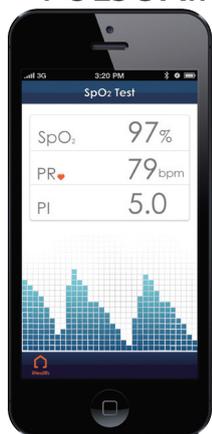

CE 0197

• 23525 PULSOXIMETRO WIRELESS

Il pulsossimetro è un dispositivo affidabile per controllare la saturazione di ossigeno del sangue (SpO₂), la frequenza cardiaca (bpm) e il volume dell'afflusso di sangue (indice di perfusione). Questo dispositivo leggero e portatile permette la rilevazione dei valori, rapida e non invasiva, dal dito.

- misura la vostra saturazione di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca dal vostro telefono mobile o tablet
- registra la SpO₂ e la frequenza cardiaca
- display LED facile da leggere, indica la SpO₂, la frequenza cardiaca e l'indice di perfusione
- connessione wireless con bluetooth 4.0 a basso consumo energetico
- applicazione iHealth gratuita e servizio cloud
- fornito con un cordino e cavo di ricarica USB

Per telemedicina vedere anche cod. 35095 PULSOXIMETRO OXY-10 Bluetooth a pagina 254.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	alimentato internamente, tipo BF
Display:	LED
Alimentazione:	batteria, 3,7 V Li-ion, 300 mAh
Range di misurazione SpO ₂ :	70-99%, ± 2%
Range di misurazione frequenza cardiaca:	30-250 bpm, ± 2 bpm o ± 2% il maggiore dei due
Dimensioni:	62x33x28 mm

7 GLUCOMETRO INTELLIGENTE iHEALTH

• 23510 KIT GLUCOMETRO INTELLIGENTE WIRELESS BG5

Glucometro tascabile, ergonomico e wireless con tecnologia avanzata e grande affidabilità. Il sistema di controllo della glicemia wireless è un modo conveniente per misurare e registrare i livelli di glicemia nel sangue dal vostro dispositivo portatile.

- visualizza subito i risultati sul dispositivo wireless
- salva fino a 500 risultati di test sul dispositivo wireless
- imposta dei reminder e visualizza le tendenze dei livelli di glucosio e insulina con diverse modalità, traccia automaticamente la quantità e la data di scadenza delle strisce di test, senza bisogno di calcolo o di un codice, lavora on-line e off-line e carica i dati automaticamente ad ogni connessione. Il kit comprende 10 strisce di test, 10 lancette, penna pungidito, soluzione di controllo, cavo di ricarica USB e valigetta di trasporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni dell'apparecchio:	90x34,5x19 mm (3,8"x1,35"x0,75")
Metodo di misurazione:	tecnologia amperometrica con glucosio ossidasi
Range di risultati:	20 mg/dL ~ 600 mg/dL (1,1 mmol/L ~ 33,3 mmol/L)
Fonte di alimentazione:	DC 3,6 V
Campione di sangue:	sangue intero capillare
Volume di sangue:	Min. 0,7 micro litri

CE 0197



Codice GIMA	ACCESSORI GLUCOMETRO
23511	Strisce glucosio - conf. da 25 strisce - rimborsabili SSN
23512	Strisce glucosio - conf. da 50 strisce - rimborsabili SSN
23916	Lancette 28G - conf. da 100 lancette - rimborsabili SSN
23915	Penna pungidito "OnCall"