

CARRELLI MODULARI VERNICIATI O IN ACCIAIO INOX



CARRELLI MODULARI

Carrelli modulari in acciaio verniciato o INOX, struttura mono-blocco, parte superiore con ampio piano di appoggio in materiale plastico tecnopolimero, con tre lati di contenimento e senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia, maniglione ergonomico in tubolare. Parte frontale con vari cassetti (piccolo giallo, medio blu, grande rosso) a seconda del modello, con pannelli

verniciati con polveri epossidiche e maniglia di presa integrata, scorrevoli su guide silenziose e con fine corsa, con la possibilità di staccarli dalle guide per la pulizia e la disinfezione. Chiusura centralizzata con chiave. Provvisto di paracolpi e montato su ruote antistatiche di diametro 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 67x63x104 cm. Peso: 53 kg. Produzione Italiana. Possibilità di personalizzare il colore con un ordine minimo di 10 pz.

Acciaio verniciato	Acciaio inox	CARRELLI
45600	45620	Carrello con 7 cassetti piccoli
45601	45621	Carrello con 1 cassetto piccolo, 3 medi
45602	45622	Carrello con 2 cassetti piccoli, 1 medio e 1 grande
45603	45623	Carrello con 1 cassetto piccolo, 1 vano con ripiano
45604	45624	Carrello con 2 cassetti medi, 1 grande

ACCESSORI PER TUTTI I CARRELLI MODULARI

45640	Asta portaflebo
45641	Cassetti superiori pensili (5 medi + 4 grandi)
45644	Divisorio h 4 cm per cassetto giallo (49x48x10 cm)
45645	Divisorio h 14 cm per cassetto blu (49x48x20 cm)
45646	Divisorio h 20 cm per cassetto rosso (49x48x30 cm)



LAVELLO - CON POMPA


• **45410 LAVELLO - SISTEMA CON POMPA** - bianco
Lavello automatico con vasca in acciaio inox satinato non raccordato alla rete idrica. Il sistema consente la disponibilità dell'acqua anche dove per ragioni tecniche diventa dispendioso o impossibile mettere tubature sotto traccia nei muri e nei pavimenti per gli scarichi di raccordo.

Dimensioni:
47 x 54 x h 86 cm

Necessita soltanto di un punto di alimentazione da 230 V: il trasformatore a bassa tensione (12 V) aziona la pompa per l'erogazione dell'acqua con una semplice pressione del piede sullo zoccolo.

Dotato di 2 taniche da 20 litri per carico e scarico.

PENSILE MULTIFUNZIONE

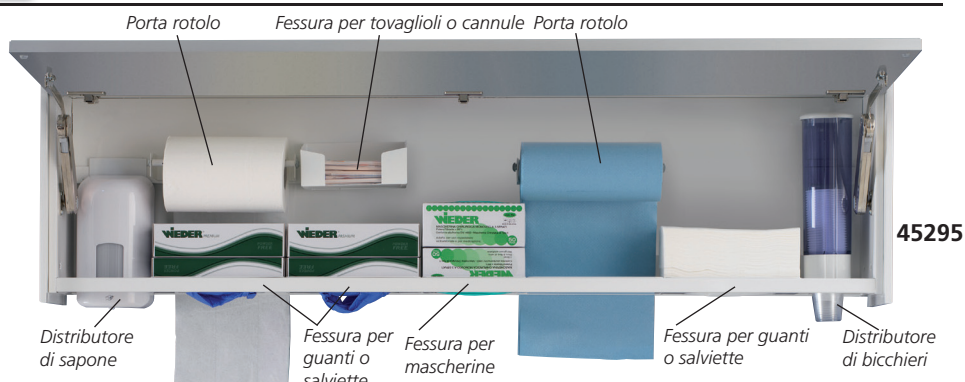

Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti monouso. Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati per le necessità dell'utente. Disponibile in 2 dimensioni: standard (103x20xh 40 cm) e grande (153x20xh 40 cm) e 8 colori. Anta laminata con apertura verticale. Fornito con distributore di sapone automatico, distributore di bicchieri e 5 (Standard) o 7 (Grande) fessure.

Fessura per distributore o prodotti monouso

DOTAZIONE STANDARD		45290	45295
		45293	45298
Distributore per bicchieri monouso	1	1	
Distributore automatico di sapone	1	1	
Fessura per guanti o salviette	2	3	
Fessura per mascherine	1	1	
Fessura per tovaglioli o cannule	-	1	
Porta rotolo	1	2	

PENSILI MULTIFUNZIONE								
Modello								
	bianco	azzurro	grigio	beige	giallo	blu	verde	arancio
Standard	45290 ←				45293*		→	
Grande	45295 ←				45298*		→	

**Disponibile in 30 giorni. Specificare il colore al momento dell'ordine.*

*Disponibile in 30 giorni. Specificare il colore al momento dell'ordine.