


POLTRONE GINECOLOGICHE GYNEX A 1-3 MOTORI

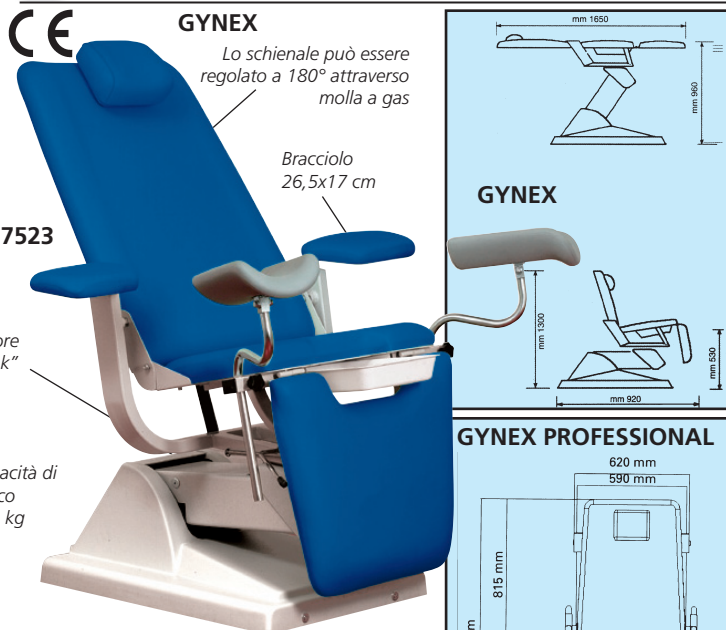

GYNEX
Lo schienale può essere regolato a 180° attraverso molla a gas

Bracciolo 26,5x17 cm

27523

Motore "Linak"

Capacità di carico 180 kg

POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX

GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilancianti, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort.


È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore silenzioso da 4'000 N attivato con pedale (alimentazione secondaria a 24 V) con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e porta-rotolo (tranne 27520). I poggia-gamba possono essere regolati, bloccati o rimossi separatamente.

Da una posizione a "sedia" può essere trasformata in "lettino". I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente.


Produzione Italiana.

Alimentazione 230 V - 50 Hz (su richiesta 110 V - 60 Hz).

Tutte le poltrone sono fornite con portarotolo.

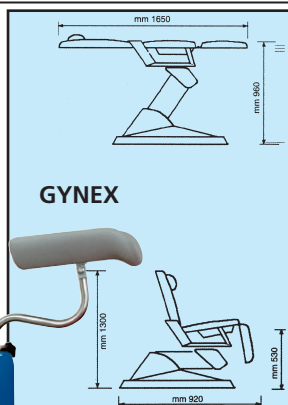

GYNEX

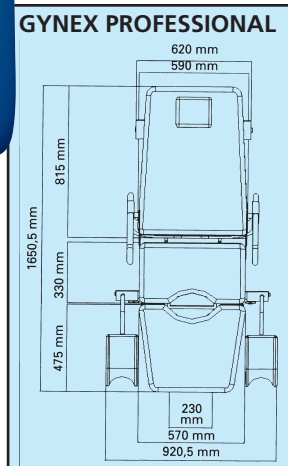

GYNEX PROFESSIONAL

GYNEX PROFESSIONALE con 3 motori



Gynex Professional può essere facilmente trasformata in lettino da visita (posizione completamente orizzontale).

Vaschetta in metallo

Portarotolo

27515

POLTRONA GINECOLOGICA - GYNEX PROFESSIONAL


Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale. I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale. Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite due motori silenziosi ciascuno di 1'000 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura, garantisce al paziente massimo confort. I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice gambale è regolabile autonomamente e indipendentemente da tutti gli altri movimenti (attraverso due motori silenziosi da 1'000 N). La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 cm, partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pratica pulsantiera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONE STANDARD	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	GYNEX	GYNEX PROFESSIONAL
Gambale in poliuretano	•	•
Gambale imbottito (colore coordinato)	•	•
Portarotolo	•	•
Vaschetta in metallo	•	•
Controllo remoto	•	•
Alimentazione:	230V - 50 Hz (110V - 60 Hz su richiesta)	230V - 50 Hz (110V - 60 Hz su richiesta)
Tensione ai motori:	24 V	24 V
Spinta motore sollevamento:	4'000 N	4'000 N
Spinta motori schienale:	800 N	2'000 N
Spinta motori gambale:	-	2'000 N
Capacità sollevamento:	180 Kg	180 Kg
Massima potenza:	90 VA	90 VA
Protezione fusibile:	1,6 A	1,6 A

• 27518 SERVOMOBILE

Struttura in metallo, verniciata in polvere epossidica. Dotato di 5 ampi cassetti (i vassoi all'interno dei cassetti sono opzionali) 4 ruote girevoli antistatiche. Produzione Italiana.

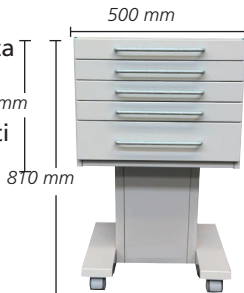

SGABELLO - con o senza anello poggipièdi

Per uso professionale, costruito interamente in acciaio INOX, ruote gommate girevoli autofrenanti e piroettanti a 360°. L'altezza può essere facilmente regolata tramite pompa a gas, lo schienale è girevole a 180° e registrabile in profondità. Le imbottiture sono a densità bilanciata e sono rivestite in Peltex. Produzione Italiana.



Altezza minima/massima: 530/660 mm

27532

27528

POLTRONE GYNEX, SGABELLI E SERVOMOBILE

	Blu-chiaro Parigi	Verde Vancouver	Blu Chicago	Arancione Amsterdam	Albicocca Metalliz.	Blu Metalliz.	Bianco	Bianco Helsinki	Grigio Stuttgart	Verde Marbella	Blu New York	Giallo Dubai	Verde Panama Metalliz.	Limone Metalliz.	Azzurro Metalliz.
Gynex professional	27514	27512**	27513	27512**	27515	←					27512**				→
Gynex	27521	27522	27523	27524	27525	27526	←				27520**				→
Sgabello con anello	27531	27532	27533	27534	27535	27536	←				27530**				→
Sgabello senza anello	27527	←						27528**							→
Servomobile	←	27517**	→	27519	←	27517**	→	27518	←						27517**

**Disponibili in 60 giorni, specificare il colore al momento dell'ordine.