

POLTRONE ORL

Con poggiatesta




27546



Pedale per alzare/abbassare


DISPONIBILE IN 24 COLORI

Trendelenburg +5°

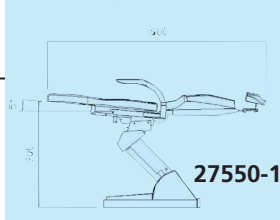

27550-1

Movimento schienale sincronizzato a quello del gambale può essere regolato a 90° ed operare una inclinazione fino ai 190°

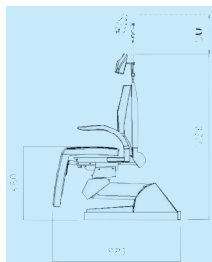

La seduta è regolabile (escursione verticale di 42 cm)

Poggiatesta su richiesta

27551

Base della seduta in metallo pesante verniciato a polvere, con supporto di braccio pantografo girevole - rotazione di 90° a destra e a sinistra - bloccaggio della rotazione tramite leva




Poggiabraccia ruotabili ed amovibili in poliuretano espanso grigio chiaro

- 27545 POLTRONA ORL con poggiatesta - colore a richiesta
 - 27546 POLTRONA ORL con poggiatesta - verde Marbella
 - 27547 POLTRONA ORL con poggiatesta - azzurro Parigi
- Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera a doppio comando. Schienale regolabile fino a 180° attraverso pompa a gas. La poltrona ruota completamente su se stessa ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.

- 27550 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - colore a richiesta
 - 27551 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - blu Chicago
 - 27552 POLTRONA ORL OTOPEX con poggiatesta - verde Vancouver
- Per piccoli interventi ambulatoriali, movimentata da silenziosi attuatori elettrici azionati da pedaliera a joystick. Dotata di pulsante per tornare nella posizione originale. Rivestimento in skay, imbottitura in gomma indeformabile ad alta densità (50 kg/cm³). Seduta e gambale in un pezzo unico. Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz). Produzione Italiana.


RIUNITI ORL

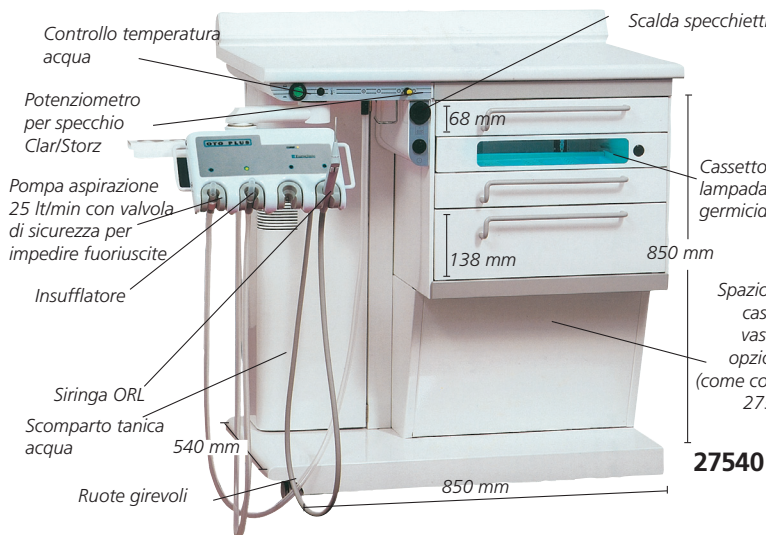

27540

- 27540 OTOPLUS - RIUNITO ORL
- Riunito per ORL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina. Dotato di 3 cassette (2 piccoli ed 1 grande) con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Il dispositivo Otoplus è fornito con una silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per specchio Clar/Storz, scaldia specchietti laringe, compressore monocilindro (26 l/min) a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti trovano alloggio la cannula terminale per l'insufflazione, con i suoi accessori, e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene la temperatura ad una temperatura costante di 37° C) e la cannula per insufflazione. Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz). Produzione Italiana.

Asta supporto per monitor

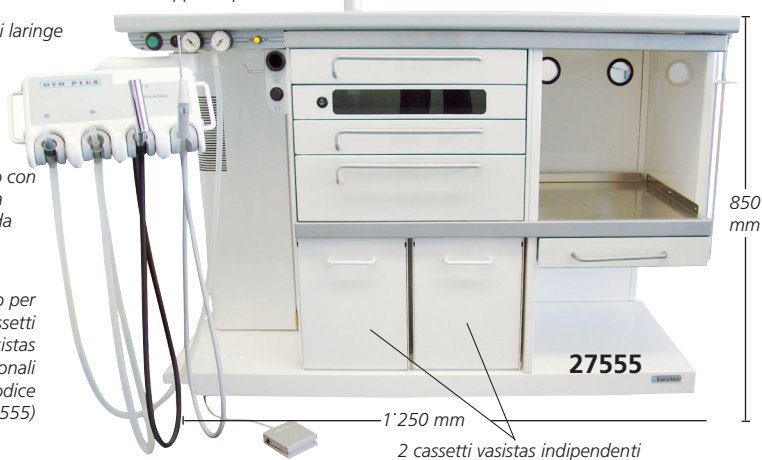

27555

- 27539 OTOPLUS COMPLETO
 - 27554 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL
 - 27555 OTOPLUS DC - RIUNITO ORL - completo
 - 27541 CASSETTI VASISTAS - 2 cassette indipendenti
 - 27543 SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi in plastica trasparenti
 - 27542 KIT MEDICAMENTI
 - 27544 FONTE DI LUCE A LED
- Simile al codice 27540, include i cassette vasistas (cod. 27541) ed il supporto endoscopico (cod. 27543). Unità otoplus con una colonna aggiuntiva, progettata per essere utilizzata con apparecchi diagnostici (fonte di luce, videocamera o stampante), ed un'asta di supporto per monitor. Simile al codice 27554 include i cassette vasistas (cod. 27541) ed il supporto per endoscopio (cod. 27543). Due tubi lunghi 50 cm e 25 cm chiusi sul fondo possono essere utilizzati per la sterilizzazione a freddo. Composto da 1 siringa, 2 nebulizzatori (per liquidi e polveri) e 3 ampole in vetro scuro da ordinare insieme al Riunito ORL. Fornisce luce fredda e bianca (5'500°K, 180 lumen) per uso endoscopico. Può essere connessa agli endoscopi senza il cavo a fibre ottiche.

27544

