

I-TECH PHYSIO - STIMOLATORE PROFESSIONALE A 2 CANALI

• 28382 STIMOLATORE PROFESSIONALE I-TECH PHYSIO

Stimolatore professionale con 2 canali indipendenti

- onda quadra bifasica e compensata: corrente uguale e costante da polo + a polo - (nessun effetto termico di polarizzazione)
- onda quadra monofasica
- programmi per incontinenza e per ionoforesi
- trattamento denervato
- TENS programmabile - memorie EMS
- frequenza regolabile, larghezza impulso, tempo, rampa
- istruzioni programmi e tempo residuo su schermo LCD
- batteria interna ricaricabile (rimovibile)
- Intensità massima 200 mA
- conforme alla norma 93/42/CEE MDD (dispositivo medico CE0476)

• 28381 KIT IONOFRESI

(2 elettrodi conduttivi in silicone, 2 spugne, 1 fascia elastica)

• 28372 ELETTRODI PREGELLATI 46x47 mm - conf. da 4

• 28373 ELETTRODI PREGELLATI 48x80 mm - conf. da 4

Fornito in una borsa per il trasporto con: Display retroilluminato

- batteria ricaricabile e carica batteria
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 48x48 mm
- 1 set di 4 elettrodi pregellati 50x90 mm
- 2 elettrodi conduttivi in silicone 60x90 mm
- 2 spugne 70x100 mm
- 1 fascia elastica per fissare gli elettrodi
- 2 cavi elettroterapia, spina maschio 2 mm
- 4 cavi sdoppiatori - spina maschio e femmina 2mm

Manuale utente (GB, IT, ES)



Tastiera digitale di semplice utilizzo

PROGRAMMI:

20 NEMS
14 TENS
15 BEAUTY

9 UROLOGIA
27 RIABILITAZIONE
13 MEMORIE LIBERE


MIO-IONOTENS, 2 CANALI

• 28380 MIO-IONOTENS 37 programmi

Nuovo stimolatore a 2 canali con una vasta scelta di programmi TENS, di riabilitazione e memorie interne. Portatile, semplice, dotato dell'innovativo sistema Safe RGB (Red-Green-Blue). Il colore del display indica il normale funzionamento (verde), il funzionamento anomalo (rosso) e il superamento dei 2/3 dell'intensità di corrente massima (blu). 14 programmi TENS, 10 programmi di riabilitazione inclusi 3 trattamenti di ionoforesi e 13 memorie libere (si può definire la frequenza di trattamento, la durata dell'impulso, il tempo di terapia). Fornito in borsa di trasporto con 2 cavi, 1 kit ionoforesi, 1 set di 4 elettrodi pregellati 41x41 mm, 1 set di 4 elettrodi pregellati 40x80 mm, 1 clip da cintura, batteria interna ricaricabile, carica batterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, ES).

• 28381 KIT IONOFRESI - ricambio

(fascia elastica, 2 elettrodi in gomma, 2 spugnette)

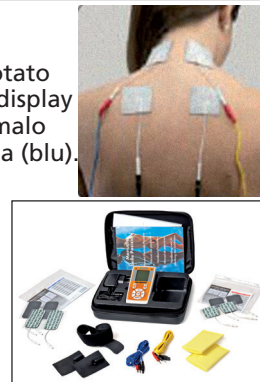

28380

MIO-VEIN STIMOLAZIONE VENOSA

• 28378 MIO-VEIN STIMOLAZIONE VENOSA

Mio-Vein è il nuovo dispositivo a 2 canali in grado di stimolare la muscolatura del polpaccio e aiutare in questo modo la corretta circolazione venosa. Mio-Vein può essere utilizzato anche come strumento di prevenzione per l'insufficienza venosa e la trombosi venosa profonda, nonché in presenza di edema agli arti inferiori, ulcere venose e disturbi venosi. Mio-Vein rappresenta, infine, un importante strumento di supporto alla terapia elasto compressiva (calze o specifiche fasciature), e quindi al trattamento della stasi venosa.

Caratteristiche tecniche

- elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare 4 elettrodi
- tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- display LCD retroilluminato
- programma FES specifico per la stimolazione venosa
- funzionamento con batteria interna ricaricabile
- intensità massima 60 mA
- larghezza d'impulso 30-240 µs

Fornito con 2 cavi di collegamento, 4 elettrodi ovali per i polpacci, 1 clip da arteria, 1 batteria ricaricabile Ni-Mh, 1 caricabatterie, 1 manuale utente (GB, FR, IT, DE, ES), una borsa da trasporto.

• 28379 ELETTRODI OVALI set di 2 - 130x76 mm

Dimensioni:
114x68x26 mm

CE 0476



28378

MINITENS SENZA FILI


• 28345 MINITENS - per alleviare il dolore

• 28346 ELETTRODO - 62x53 mm

Innovativo, semplice, efficace e sempre disponibile.

Risultato della combinazione tra la moderna conoscenza del comportamento elettro-fisiologico delle cellule e di un'antica tecnica, l'agopuntura, il minitens è il primo cerotto elettronico anti-dolore. Dotato di un potente micro-processore e di un programma di stimolazione che ripristina gli scambi elettrici sui due lati della membrana cellulare e blocca la trasmissione della sensazione di dolore al cervello e rilassa e stimola l'attività dei nervi, dei muscoli, dei tendini e delle giunture. La stimolazione elettrica è di tipo fisiologico, perché minitens allevia il dolore rapidamente, a fondo e in modo naturale.

Può essere utilizzato su bambini dai 5 anni di età

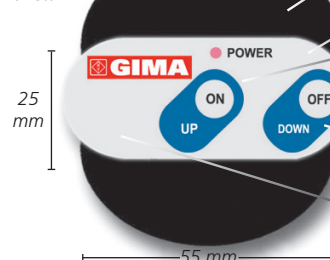

Elettrodo autoadesivo intercambiabile

Corpo principale del dispositivo

Pulsante
- di accensione
- per incrementare l'intensità di stimolazione (+)

Pulsante
- di spegnimento
- per ridurre l'intensità di stimolazione (-)

Vano (sotto il coperchio) della batteria 3V CR2032

CE 0434