


COPRISONDA IN LATTICE



- 29513 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 50 pz.
 - 29514 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 500 pz.
- Per sonde di ecografi e doppler, lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm. Ogni coprisonda è imbustato singolarmente in busta sigillata.


AGHI PER AMNIOCENTESI

Per il prelievo transaddominale di liquido amniotico per la diagnosi prenatale di difetti genetici del feto. Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici. L'affilatura accurata dell'ago permette una penetrazione agevole ed atraumatica. Il mandrino è provvisto di punta eco-marcata che permette un inserimento eco guidato ed è caratterizzato da un codice colore per un'immediata identificazione della misura dell'ago. La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento dell'ago e di un raccordo luer-lock femmina per la raccolta del liquido amniotico con la siringa. Produzione italiana.

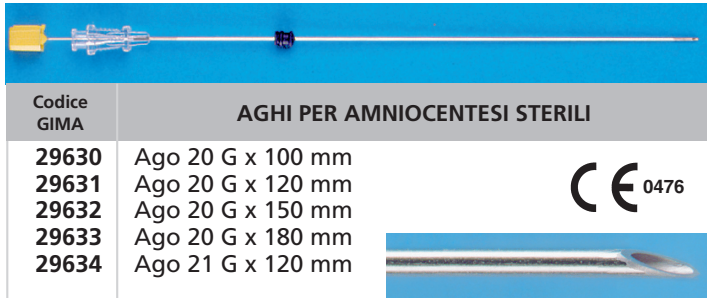

Codice GIMA	AGHI PER AMNIOCENTESI STERILI	CE 0476
29630	Ago 20 G x 100 mm	
29631	Ago 20 G x 120 mm	
29632	Ago 20 G x 150 mm	
29633	Ago 20 G x 180 mm	
29634	Ago 21 G x 120 mm	

PINZETTE OMBELICALI

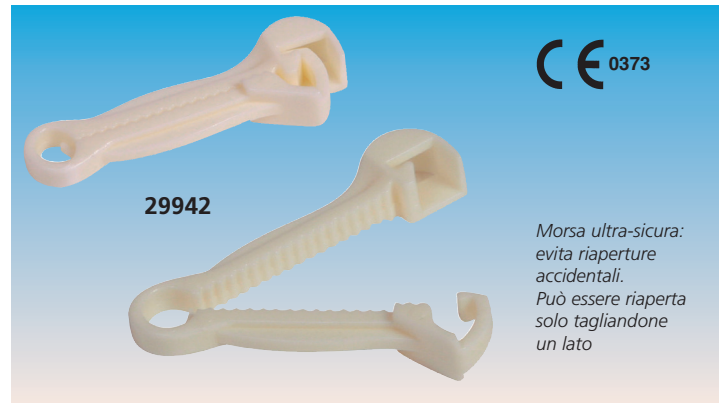


- 29942 PINZETTE OMBELICALI X-SAFE - monouso - sterili
- Pinzette ombelicali monouso di taglia grande che permettono un adeguato fissaggio di tutti i cordoni ombelicali ed evitarne la fuoriuscita dal pettine di chiusura. Confezionati singolarmente in contenitore in nylon/polietilene e scheda tecnica con istruzioni d'uso. Sterilizzate con ossido di etilene. Produzione italiana. minimo vendita: scatola da 500 pz.

PERFORATORE AMNIOTICO




- 29945 PERFORATORE AMNIOTICO - monouso sterile
- Perforatore amniotico monouso. Il sistema è completamente sicuro. Evita il rischio di lesioni al feto. Fornito in busta singola sterile.

BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI

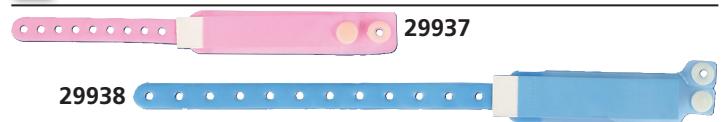

Codice GIMA	BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI	Colore	Minimo vendita
29936	Neonato	azzurro	conf. da 100 pz.
29937	Neonato	rosa	conf. da 100 pz.
29938	Mamma	azzurro	conf. da 100 pz.
29939	Mamma	rosa	conf. da 100 pz.

CUPOLE PER ISTEROGRAFIA E SIRINGA SIFT

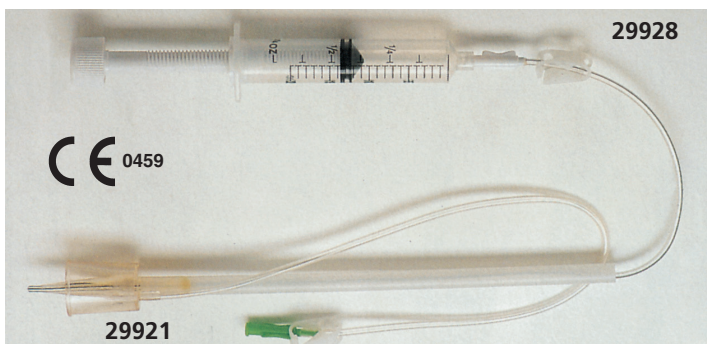

Codice GIMA	CUPOLE PER ISTEROGRAFIA MONOUSO - STERILI	Minimo vendita
29920	Cupole 25 mm	10 pz.
29921	Cupole 30 mm	10 pz.
29922	Cupole 35 mm	10 pz.
29923	Connettore Cupole - sterile	10 pz.
29928	Siringhe SIFT per cupole	10 pz.

CUPOLA PER ISTEROGRAFIA - monouso sterile - latex free
Dispositivo composto da una campana troncoconica con cannula conica, di un manipolatore lungo 25 cm flessibile incorporato alla base e di due cateteri in PVC con pinze. Il catetere esterno con rubinetto crea il vuoto, quello all'interno del manipolatore serve per l'iniezione del mezzo di contrasto. La forma troncoconica permette un'adesione perfetta al collo uterino per autocentratura. Il radiologo può quindi operare a distanza dal campo radioattivo dopo aver comodamente immobilizzato l'utero. La cupola/cannula è trasparente e permette di controllare la zona endocervicale.

SIRINGA SIFT CON PISTONE A VITE

Questa siringa è stata appositamente studiata per l'iniezione del liquido, essendo dotata di un pistone a vite che permette un'iniezione regolare e costante del mezzo di contrasto. Il connettore non è necessario nel caso la cupola sia utilizzata con la nostra siringa SIFT.