


Fornito con scatola e manuale in:
GB, FR, IT, DE, ES, NL, PL.
Disponibile su internet:
GR, PT, TH, Arab.

HISTOFREEZER®: SISTEMA CRIOTERAPICO PORTATILE

- **30587 HISTOFREEZER® - kit 2 mm**
Una bomboletta da 170 ml + 60 applicatori da 2 mm
 - **30588 HISTOFREEZER® - kit 5 mm**
Una bomboletta da 170 ml + 50 applicatori da 5 mm
 - **30586 HISTOFREEZER® - kit grande con applicatori misti**
Una bomboletta da 170 ml, 30 applicatori da 2 mm, 30 applicatori da 5 mm.
 - **30585 HISTOFREEZER® - mini kit di applicatori misti**
Una bomboletta da 80 ml, 15 applicatori da 2 mm, 30 applicatori da 5 mm. Il sistema di criochirurgia portatile Histofreezer® è un agente crioterapeutico economico e molto efficace. Questa terapia utilizza un metodo di congelamento localizzato per la distruzione controllata o la rimozione di tessuto vivo.
- Clinicamente provato per il trattamento di 9 diverse verruche e lesioni benigne**
- Verruca volgare
 - Verruca plantare
 - Mollusco contagioso (trasmesso per contatto)
 - Lentigo (macchie dell'età)
 - Condilomi (verruche genitali)
 - Cheratosi seborroica
 - Fibroma pedunculato
 - Verruca piana
 - Cheratosi attinica (facciale e non facciale)




Applicatori monouso da 2 mm per piccole lesioni
Applicatori monouso da 5 mm per grandi lesioni

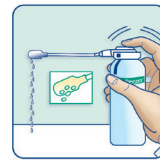


CARICARE

l'applicatore appropriato. Premere sulla valvola per 3 - 5 secondi fino a quando cominciano a formarsi delle goccioline.

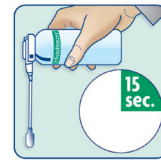

CAPOVOLGERE

la bomboletta per 15 secondi per ottenere una temperatura di congelamento ottimale.

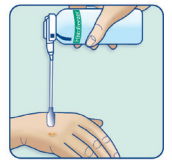

APPLICARE

sulla lesione l'applicatore congelato per 15-40 - secondi.

Gli applicatori monouso da 2 mm rimangono freddi per 90 secondi.
Gli applicatori monouso da 5 mm rimangono freddi per 120 secondi.

TERMOCAUTERI CON PUNTE INTERCAMBIABILI STERILI

TERMOCAUTERI BOVIE - 1'200 °C

- punte intercambiabili sterili
- batterie sostituibili
- manico riutilizzabile
- sterilizzazione non necessaria




Codice GIMA	PUNTE INTERCAMBIABILI minimo vendita 10 punte	Raccomandati per:
30590	Manico "AA" (punta inclusa)	Tutte le punte
30593	Punta ad ansa - alta temperatura - sterile	DER/ORL
30594	Punta ad ansa flessibile - alta temp. - sterile	GIN/ORL
30595	Punta ad ansa - stelo lungo- sterile	GINECOLOGIA
30596	Punta fine- alta temperatura - sterile	DER/CARDIO

TERMOCAUTERE RIUTILIZZABILE - CON PUNTE INTERCAMBIABILI

TERMOCAUTERE AD ALTA TEMPERATURA - 1'200°C - produzione italiana

- punte con filo in nickel-cromo intercambiabili
- manico riutilizzabile a batterie AA
- produzione italiana
- svariati campi di applicazione

Codice GIMA	PUNTE INTERCAMBIABILI minimo vendita 10 pezzi
30598	Manico cauterizzare (punta non inclusa)
30599	Punta lunga - sterile - conf. 10 pezzi
30600	Punta larga - sterile - conf. 10 pezzi
30601	Punta fine - sterile - conf. 10 pezzi

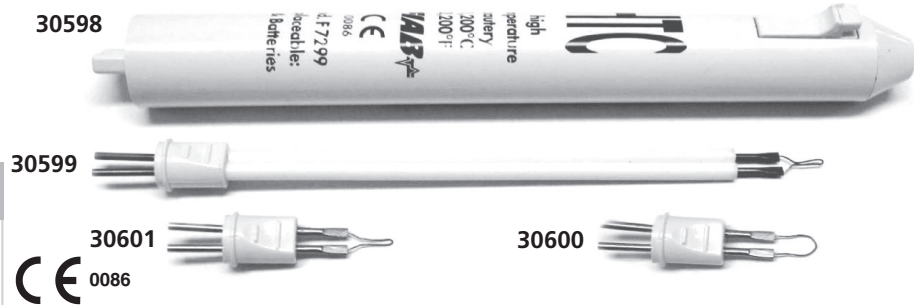

TERMOCAUTERI AD ALTA TEMPERATURA

- **30580 TERMOCAUTERE 1'200°C - Sterile - punta fine - produzione italiana**
Sistema bipolare autoalimentato monouso sterile per la cauterizzazione di piccoli vasi. Non necessita di cavi o placche. Temperatura sulla punta operativa di 1'200°C ideale per la maggioranza delle pratiche chirurgiche ed in particolare per tutte le specialità dove è necessaria una cauterizzazione precisa e di veloce esecuzione.
- **30582 TERMOCAUT. GINECOLOGICO - 1'200°C - punta fine**
Come cod. 30580 ma con punta montata su uno stelo lungo 12 cm.
- **30581 TERMOCAUTERE 600 °C - Sterile - punta fine**
Come cod. 30580 ma con temperatura inferiore (600°C), appositamente studiato per oftalmologia.
- **30583 TERMOCAUT. EMERGENZA - 800°C - punta rigida**
Grazie alla punta rigida consente la rimozione di ematomi.

