


LAMPADE AMBULATORIALI ALOGENE PER ESAMI E PICCOLA CHIRURGIA

CON 2 LAMPADE

40'000 LUX

Trasformatore elettronico integrato nella base con doppio fusibile di protezione

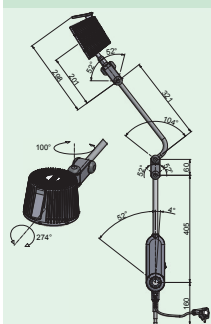

Altezza regolabile 60-160 cm

30747



35'000 LUX LED

30759

30'000 LUX ALOGENA

30760



Altezza regolabile 60-160 cm

30760

Manuale in:
GB, FR, IT, DE, ES, PT

50'000 LUX - ALOGENA
15'000 LUX - LED

MIMSAL




Altezza 50 cm (braccio) + 95 cm (carrello)

30754

- 30747 SOLESUD 2 su carrello - alogena
- 30748 SOLESUD 2 da parete - alogena [®]

Ideale per visite ginecologiche. Il riflettore in alluminio è dotato di due lampadine alogene dicroiche da 20 W 12 V IRC protette da vetro temperato, sigillato ermeticamente per proteggere da sporcizia e liquidi e dotato inoltre di una maniglia ergonomica. Le lampadine si accendono contemporaneamente, e, in caso di rottura di una delle due, la luce è sempre garantita. Il braccio flessibile è dotato di frizioni meccaniche. Un fascio di luce di diametro 180 mm si estende fino a 50 cm. Garantendo esaminazioni precise e affidabili. L'apparecchio è sorretto da un carrello a 5 ruote, alto 900 mm. Spina britannica a tre poli disponibile su richiesta. Produzione italiana.

- 30769 CARRELLO - ricambio - razza Ø 61 cm
- 30775 CONNETTORE DA ROTAIA
- 30764 LAMPADINA SOLESUD 2 - 20 W

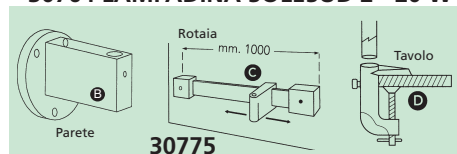

30775

- 30760 SIMPLEX su carrello - alogena
- 30761 SIMPLEX da parete [®]
- 30762 SIMPLEX da tavolo con morsetto [®]

Lampada versatile provvista di una lampadina alogena dicroica da 35 W 12 V alloggiata all'interno del riflettore e protetta da un vetro temperato. Dotata di trasformatore elettronico integrato nella base, fermacavi con protezione spiralata e interruttore bipolare con spia verde. Il braccio flessibile (60 cm) facilita il posizionamento della luce ed è ricoperto di una guaina protettiva bianca liscia per una pulizia e disinfezione più facili.

- 30759 SIMPLEX su carrello - LED
- Le tre fonti di luce indipendenti permettono di ridurre l'ombra e forniscono una luce cilindrica profonda con un irraggiamento del calore ridotto. Ogni led possiede una resistenza che garantisce il funzionamento continuo della lampada anche in caso di difetto di uno dei LED. Altre specifiche simili alla versione alogena. Fabbricata in Italia.

- 30766 LAMPADINA SIMPLEX - IRC 35 W
- 30768 CARRELLO - base Ø 61 cm
- 30775 CONNETTORE DA ROTAIA CON MORSETTO

Modelli	SOLESUD 2	SIMPLEX	LUXIFLEX	MINIMED
Tipo di illuminazione	alogena	alogena	LED	alogena LED
Consumo (Watt)	2x20	35	3x1,4	35 10
Vita lampadina (ore)	5'000	5'000	50'000	5'000 25'000
Intensità luce a 50 cm (lux)	40'000	30'000	35'000	50'000 15'000
Intensità luce a 1 m (lux)	8'000	8'000	13'000	- -
Temperatura colore ±5% a 1 m (K)	3'000	3'000	4'200	4'000 3'000
Luminosità a 50 cm (Ø mm)	180	100	140	3'100 6'500
Diametro esterno del riflettore (Ø mm)	104	105	86	
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco bianco
Norme	IEC 60601-1	IEC 598-2-25 IEC 60601-1	IEC 60601-1	IEC 60601-1
Marchi	CE 93/42	CE 2006/95 CE 93/42	CE 93/42	CE 93/42 CE 93/42
Peso (kg)	6	5	5	9 9
Alimentazione V	230	230	100-240	230 230
Frequenza Hz		50/60		50 50/60
Tensione su richiesta (V-Hz)		110 - 50/60		110-60*

*minimo 50 pz.

30742




30743



20'000 LUX

30742

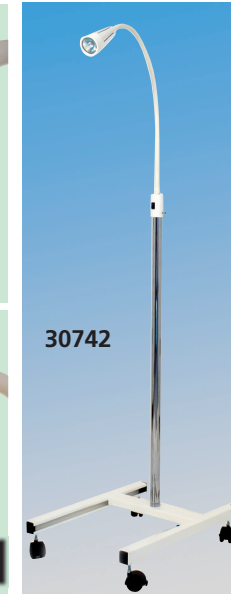

- 30742 MINIMED SU CARRELLO - alogena
 - 30743 MINIMED SU CARRELLO - LED
- Bassa tensione e alta definizione, illuminazione intensa. Braccio flessibile per un uso versatile. Fornite su un carrello con 4 rotelle per una facile mobilità. Fabbriate in Italia.

- 30744 LAMPADINA DI RICAMBIO - 50 W - alogena