

# RESCUE 230: DEFIBRILLATORE BIFASICO CON STAMPANTE

## DEFIBRILLATORE BIFASICO MANUALE RESCUE 230

Due modelli per tutte le esigenze:

- scarica BTE (Biphasic Truncated Exponential)
- rilascio energia con compensazione impedenza
- selezione energia da pannello frontale da 2 a 230 joule
- tempo di carica 5 sec per 230 joule a batteria carica
- 100 shock da 230 joule a batteria carica
- carica/scarica direttamente dagli elettrodi
- ECG "R" Sincrono/Asincrono
- display LCD alta risoluzione da 5,7" retroilluminato (320x240 pt)
- ECG da elettrodi e cavo paziente
- allarmi HR e SpO<sub>2</sub> impostabili

Non per uso pediatrico (meno di 8 anni o sotto i 25 kg)

- 33447 DEFIBRILLATORE BIFASICO RESCUE 230
- 33457 DEFIBRILLATORE BIFASICO CON PACEMAKER RESCUE 230

(impulso rettangolare, durata di impulso 22 millisecondi, ampiezza massima 150V, frequenza impulso 30 - 150 bpm)

- 33448 ELETTRODI monouso - conf. di 2 pezzi - adulti
- 33449 CAVO per elettrodi monouso
- 33439 SENSORE SpO<sub>2</sub> • 33250 CARTA TERMICA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### Display:

- Grande (5,7") alta risoluzione LCD (320x240) retroilluminato
- ECG attraverso gli elettrodi (1 traccia), o attraverso cavo ECG 4 fili (6 tracce): I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Cambio automatico con l'inserimento del cavo paziente
- Filtri: 50Hz/60 Hz linea base, passa basso
- Indicatore frequenza cardiaca

#### Stampante:

- Modalità stampa automatica
- Termica per tracciato ECG e stampa documentazione eventi
- Velocità 5, 10, 25 (carta da 58 mm)

#### Sicurezza:

- Due maniglie per la sicurezza durante scossa
- Isolamento rilevamento ECG classe CF
- Scarica interna energia dopo 30 sec. di standby dal caricamento

Alimentazione: Batterie interne Ni-Cd (tempo di carica al 95% = 2 ore)  
caricatore universale 110/220 VAC, 50/60 Hz

Dimensioni: 34x26x13 cm    Peso: 5,5 kg    Produzione Italiana

Caricabatterie  
per automobile  
su richiesta




33447



Placche standard per  
adulti e bambini

33448

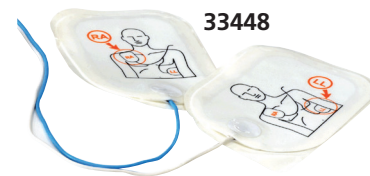

Elettrodi opzionali  
monouso

### DOTAZIONE STANDARD

Batteria interna Ni-Cd  
Borsa nylon  
Cavo paziente 4 derivazioni  
Manuale: GB, IT  
Su richiesta ES, TR

Stampante  
1 rotolo carta  
2 placche riutilizzabili  
Adattatore caricatore  
Cavo ed elettrodi monouso\*  
\*Solo 33457

## PLACCHE COMPATIBILI CON PIÙ DELL'80% DEI DEFIBRILLATORI



### ELETTRODI COMPATIBILI

Una vasta gamma di placche compatibili con la maggior parte dei defibrillatori presenti sul mercato, certificati BSI. Aderenza eccellente e adeguato spessore del gel. Includono una coppia di placche, cavo e connettore. Durata massima di validità, 2 anni dalla data di produzione. Produzione italiana.

Codice GIMA	PRODUTTORE	MODELLO	Codice GIMA	PRODUTTORE	MODELLO
33576	Agilent-Philips	- Heartstream/HeartStart XL M4735A - Heartstream/HeartStart XL T M3500B - HeartStart 4000 M5500B (tutti con cavo Philips M3508A)	33587 33576	Osatu Bexen Philips Laerdal Medical	- Reanibex 200 - 700 - Heartstream Fore Runner I AED modelli E, S, EM - Heartstart FR1 AED 940010XX - 940020XX & 940030XX - Heartstart FR2 AED M3840A & M3841A - Heartstart FR2 AED, con ECG modulo M3860A & M3861A - Codemaster M1722A/B, M1723A/B, M1724A & M2475B (con cavo Philips M3507A e adattatore elettrodo 05-200) - Heartstart MRx (con cavo Philips M3508A)
33577	Agilent Hewlett-Packard	- Codemaster 100-XE-XL-XL+ - Heartstream XL e XL T con cavo M3507A	33588	Schiller	- Fred Easy - Defigard DG4000 - DG5000 - DG6002
33448	Cmos Drake	- Futura	33586	Schiller	- Fred - Fred tele - Defigard DG1002 - DG3002 - DG2000EDOS
33448	CU Medical System	- I-PAD NF1200	33579 33579	S&W Welch-Allyn	- Cardio Aid LS - MC - MC+ - AED 10 - AED20 (adattatore pediatrico Welch-Allyn 002173/4-U) - PIC30 - PIC40 - PIC50
33579	Drager	- Cardiolog 2000	33589	Zoll Medical Corp	- Zoll PD 1200 - 1400 - 1600 - 1700 - 2000 - M series - E series - R series
33586	Esaote	- MDF SAED - MDF II			
33579	Innomed	- Cardioaid 200B - 200 - 100 - XL+ - XL			
33577	Laerdal Medical	- HeartStart 4000			
33587	Medtronic-Physiocontrol	- Lifepak 9 connettore quick-combo - Lifepak 10 - 12 - 15 - 20 - 500 - 1000			
33459	Metrax Primedic	- Heartsave AED - AED-M - 6 - 6S - Defimonitor XD			
33579	Nihon Kohden	- 7700 - 2202 - 2203 - 7531 - 8251 tutti con cavo JC-755V			

Connettori per defibrillatore di elettrodi compatibili

Busta multilingua: Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Greco, Olandese, Russo, Svedese

