

BARELLE BASKET

- 34094 BARELLA BASKET DIVISIBILE - arancione
- 34098 BARELLA BASKET - arancione

Questo guscio è un nuovo progetto con un ampio campo di utilizzo, come ad esempio le operazioni di recupero. È costituito da polietilene reticolato ad alta densità, per evitare fratture sfrangiate e fessurazioni. La superficie non può essere penetrata da fluidi e prodotti petroliferi, ed è di facile pulizia. Il guscio è in materiale non assorbente arancione, antiruggine e anticorrosione, resistente agli agenti chimici e a temperature estreme. Una struttura tubolare in alluminio è allacciata in modo permanente al guscio per assicurare la massima resistenza e rigidità della barella. Pattini e maniglie incorporate. Gli occhielli per il fissaggio dei moschettoni forniscono 4 punti di sollevamento posizionati strategicamente per garantire sicurezza e la massima maneggevolezza nell'alzare o abbassare il paziente. Include 3 cinghie per trattenere il paziente in sicurezza.

Barella basket divisibile

Può essere divisa trasversalmente a metà per un migliore stoccaggio e trasporto. Per garantire una perfetta tenuta tra i due gusci sono stati inseriti 4 coni di nylon e un sistema di sicurezza protetto da una protuberanza inserita nel guscio stesso.

- 34099 BRIGLIE DI SOLLEVAMENTO

Regolabili, possono essere utilizzate per situazioni di sollevamento orizzontale o verticale. Realizzata in tessuto di nylon durevole e attacchi in acciaio e meccanismo di blocco in ottone.

- 34100 DISPOSITIVO DI GALLEGGIAMENTO
- 34096 BORSA DI TRASPORTO PER 34094




34098


CARATTERISTICHE TECNICHE

	34098	34094
Dim. (LxPxH):	217x65x19 cm	118/215x64x19 cm
Capacità di carico:	280 kg	280 kg
Peso:	13,5 kg	17 kg

34098+34100

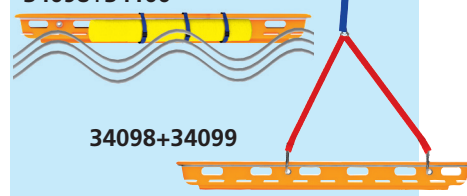

34098+34099

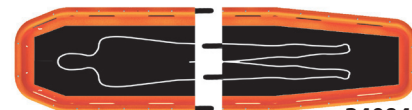

34094

BARELLA A SEDIA PORTANTINA

- 34060 BARELLA A SEDIA PORTANTINA - 2 ruote
- 34074 BARELLA A SEDIA PORTANTINA - 4 ruote

Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Costruita in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile. Dotata di 2 ruote fisse ø 12 cm di cui una dotata di blocco (34060) o 4 ruote, 2 con fermo (34074), 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili +30 cm, per facilitare il trasporto su terreni lisci. 2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Folded size:	91x52x19,5 cm	Misura aperta:	91x52x71 cm
Dimensione sedia:	- altezza schienale: 91 cm - larghezza: 52 cm		
	- altezza seduta: 48 cm - larghezza: 52 cm		
Capacità:	150 kg	Peso:	8,5 kg

Maniglie pieghevoli
verso il basso



34060

Maniglie pieghevoli
verso l'alto



34074

Maniglie
regolabili (+30 cm)

SEDIE PORTANTINE E SEDIE EVACUAZIONE

- 34058 SEDIA PORTANTINA - arancione/cromato

Progettata e costruita per rimuovere i pazienti in emergenza da luoghi ristretti. Ripiegata può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze. È stata costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo movimento, ed è dotata di due cinture a sgancio rapido per il blocco del paziente.

- 34059 SEDIA PORTANTINA PIEGHEVOLE - nero/giallo (arancione/cromato su richiesta)

Una valida alternativa per trasportare i pazienti in situazioni difficili.

Quattro impugnature antiscivolo rendono il trasporto del paziente più sicuro e più semplice. Due grandi ruote fanno in modo che sia più manovrabile.

La copertura della seduta dura, nera e rivestita in vinile, è facile da pulire, non si macchia, e fornisce una protezione batteriostatica. La struttura è dotata anche di un set di 3 cinghie con chiusura in plastica. Produzione Italiana.

- 34061 SEDIA PORTANTINA SKID - con slitte autofrenanti

La SKID è una sedia da evacuazione ultracompatta, dotata di un nuovo telaio in alluminio e del focellone a traliccio tubolare che ne esalta il design. Skid raggiunge elevati standard di qualità, utilizzando materiali e componenti innovativi che la rendono ultraleggera e maneggevole, in grado di operare in qualsiasi scenario operativo. La comodità è accentuata dalla presenza di due braccioli reclinabili rivestiti in gomma. L'innovativo sistema di slitte autofrenanti consente all'operatore un controllo perfetto durante la fase di discesa delle scale. Costruita in alluminio saldato e lucidato. Sedute regolabili e rinforzate in Spentex®. Skid viene fornita con due cinture in polipropilene da 50mm. Produzione italiana.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	34059 PIEGHEVOLE	34058 EVACUAZIONE	34061 SKID
Altezza (aperta/chiusa):	92 cm	98/78 cm	154/104 cm
Larghezza:	48 cm	41 cm	52 cm
Profondità con le impugnature ritratte:	59 cm	-	-
Profondità con le impugnature estese:	125 cm	aperta 80 cm	-
Profondità con le impugnature ripiegate:	19 cm	chiusa 31 cm	-
Peso:	10 kg	12 kg	10 kg
Capacità di carico:	165 kg	116 kg	150 kg

CE

34058



34059



34061