


■ ROTOLI PER AUTOCLAVE

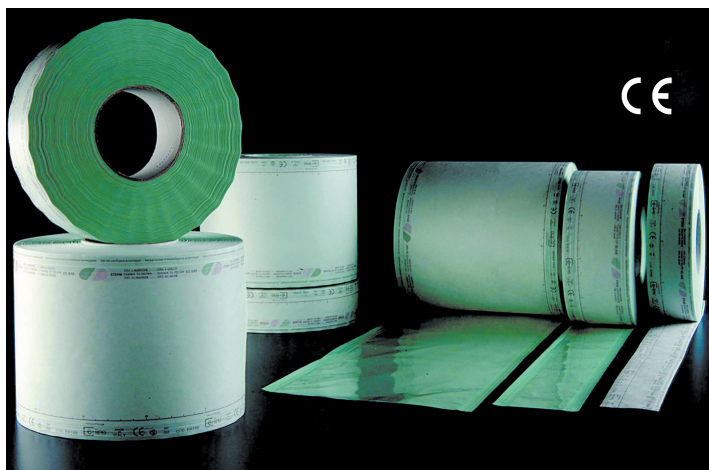

DISPONIBILI ALTRI FORMATI

ROTOI PIATTI per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO
Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medica per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati.
Ogni rotolo è lungo 200 metri.

Codice GIMA	ROTOI PIATTI PER AUTOCLAVE O ETO	Minimo vendita
35810	Rotoli piatti 200 metri x 50 mm	8 rotoli
35811	Rotoli piatti 200 metri x 75 mm	8 rotoli
35812	Rotoli piatti 200 metri x 100 mm	4 rotoli
35813	Rotoli piatti 200 metri x 150 mm	4 rotoli
35814	Rotoli piatti 200 metri x 200 mm	2 rotoli
35817	Rotoli piatti 200 metri x 250 mm	2 rotoli
35815	Rotoli piatti 200 metri x 300 mm	2 rotoli
35816	Rotoli piatti 200 metri x 400 mm	1 rotoli

Codice GIMA	ROTOI A SOFFIETTO PER AUTOCLAVE O ETO	Minimo vendita
35871	Rotoli a soffiutto 100 m x 100 mm x 25 mm	4 rotoli
35872	Rotoli a soffiutto 100 m x 150 mm x 25 mm	4 rotoli
35873	Rotoli a soffiutto 100 m x 200 mm x 30 mm	2 rotoli
35874	Rotoli a soffiutto 100 m x 250 mm x 32,5 mm	2 rotoli
35875	Rotoli a soffiutto 100 m x 300 mm x 40 mm	1 rotolo
35876	Rotoli a soffiutto 100 m x 400 mm x 40 mm	1 rotolo

ROTOI A SOFFIETTO per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO. Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Ogni rotolo è lungo 100 metri.

■ BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE



BUSTE PIATTE AUTOSALDANTI
per sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medica che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione.

Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.

1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura.

2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204.

La carta medica è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese).

3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura.

4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medica Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.

5. La saldatura "Multiline" è resistente e duratura; le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta.

Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti secondo gli standard internazionali DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485

DISPONIBILI ALTRI FORMATI
minimo 10'000 buste

Codice GIMA	BUSTE PIATTE PER AUTOCLAVE O ETO NON AUTOSALDANTI	Minimo vendita
35880	Buste piatte 100 x 300 mm	1'000 pz.
35881	Buste piatte 150 x 200 mm	1'000 pz.
35882	Buste piatte 150 x 250 mm	1'000 pz.
35883	Buste piatte 150 x 300 mm	1'000 pz.
35884	Buste piatte 150 x 400 mm	1'000 pz.
35885	Buste piatte 200 x 300 mm	1'000 pz.
35886	Buste piatte 200 x 350 mm	500 pz.
35887	Buste piatte 200 x 400 mm	500 pz.
35888	Buste piatte 250 x 400 mm	500 pz.
35889	Buste piatte 250 x 500 mm	500 pz.
35890	Buste piatte 300 x 400 mm	500 pz.
35891	Buste piatte 400 x 600 mm	500 pz.
35895	Buste formato speciale	10'000 pz.

Codice GIMA	BUSTE AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE O ETO	Minimo vendita
35860	Buste autosigillanti 90 x 165 mm	1'800 pz.
35861	Buste autosigillanti 90 x 230 mm	1'800 pz.
35862	Buste autosigillanti 140 x 250 mm	1'200 pz.
35863	Buste autosigillanti 190 x 330 mm	1'200 pz.
35864	Buste autosigillanti 190 x 400 mm	1'200 pz.
35866	Buste autosigillanti 300 x 450 mm	400 pz.