


# ECG VETERINARIA: 1 E 3 CANALI

33306

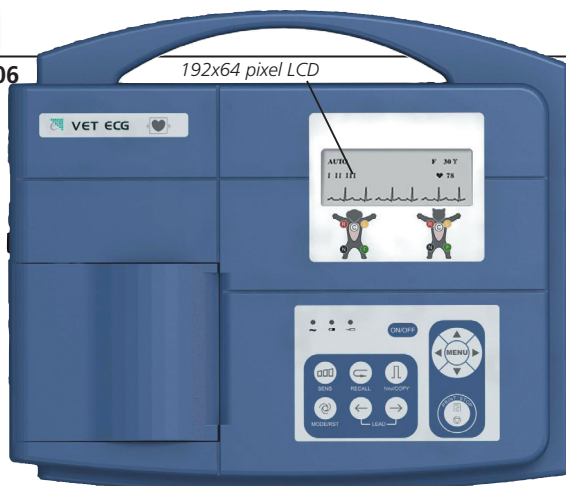


192x64 pixel LCD

- 33305 VE-100 - ECG 1 canale
- 33306 VE-300 - ECG 3 canali
- 33336 SOFTWARE ECG-VIEWER (GB, IT, FR, ES, RU, PT, PL, TU) per 33306

- gestione del segnale completamente digitale
- display LCD con forme d'onda, parametri configurabili
- stampante termica ad alta risoluzione
- batteria ricaricabile integrata per 3 ore d'uso (alimentazione AC/DC)
- Filtro digitale completo, evita la deviazione della linea di base, AC, interferenza EMG.
- Linea base regolabile automaticamente, ottimizza la posizione della stampa
- funzione auto/manuale selezionabile

### Caratteristiche solo di VE-300

Acquisizione automatica con 7 derivazioni, misura ed analisi parametri ECG automatici, supporta una stampante inkjet tramite USB per la stampa di 7 derivazioni, memorizzazione dati di 120 pazienti e trasferimento tramite flashdisk USB, Ethernet o porta seriale, revisione e gestione dei dati ECG su PC tramite software (opzionale 33336) Software interno: GB, IT (33305/6), DE, FR, ES (solo 33305)

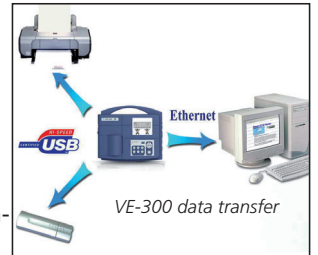

- 32963 ROTOLO CARTA TERMICA 50mm x 25m per 33305
- 32964 ROTOLO CARTA TERMICA 80mm x 25m per 33306
- 33318 BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 2200 mAh
- 33319 CAVO ECG VETERINARIO 5 DERIVAZIONI - ricambio

### DOTAZIONE STANDARD

- Cavo ECG veterinario a 5 derivazioni (Ø 4 mm, connettore a banana, IEC)
- Elettrodi veterinari a clip (set di 5, per cavi ECG Ø 3-4 mm)
- 1 rotolo di carta
- Batteria ricaricabile al litio (2200 mAh)
- Manuale in: GB, IT - FR, ES, DE su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	33305	33306
Derivazioni	standard 7 canali	7 canali simultaneamente
Metodo acquisizione	Singolo	7 canali simultaneamente
Risposta in frequenza	0,05 Hz ~ 150 Hz	0,05 Hz ~ 150 Hz
Sensibilità	2,5, 5, 10, 20 (mm/mV)	2,5, 5, 10, 20 (mm/mV)
Impedenza in ingresso	>10 MΩ	>50 MΩ
Filtri	Filtro EMG 35 Hz (-3dB) Filtro AC/DFT 50/60Hz (-20dB)	Filtro EMG 25/35/45Hz / spento Filtro DFT 0,05/0,15/0,25/0,5 Hz Filtro passa basso 150/100/75 Hz Filtro AC 50/60 Hz
Modalità di registrazione	Auto/manuale	Auto/manuale/ritmo/OFF/USBPRT
Standard di sicurezza		IEC I/CF
Alimentazione	AC: 100-115-220-240 V, 50/60 Hz	Batteria integrata ricaricabile al litio 14,4 V
		Più di 3 ore, in funzionamento continuo alimentato da batteria
Carta termica	5 mm x 30 m	80 mm x 20 m
Velocità di stampa	25/50 mm/s (± 3%)	5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s (± 3%)
Peso	2,3 kg (batteria inclusa)	2,5 kg (batteria inclusa)
Schermo	LCD 192 x 64 pixel	
Ingresso/uscite esterne	Ingresso: ≥100 kΩ; Sensibilità: 10 mm/V ± 5% Uscita: ≥100 kΩ; Sensibilità: 1 mm/V ± 5%	
Interfaccia di comunicazione	RS232	Ethernet, RS232, USB

# DOPPLER VETERINARIA

## • 80600 DOPPLER VET GIMA - SONDA FISSA 8 MHZ

Nuovo doppler per rilevare il flusso di sangue nei piccoli vasi periferici grazie all'esclusiva sonda da 8 MHz; ideale per i veterinari, per la misurazione di routine della pressione del sangue sugli animali domestici. I segnali di flusso sono individuati facilmente dal piccolo e leggero trasduttore a fascio stretto, mentre l'elaborazione del segnale interno minimizza gli artefatti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrasuoni		Alimentazione	
Frequenza:	onda continua 8 MHz	Batterie alcaline 9V (non incluse)	
Trasduttore:	a 2 cristalli, a raggio stretto	Durata batteria: > 9 ore	
Potenza di uscita:	<15 mW/cm² SATA		
Risposta Audio:	300 Hz - 4 kHz		
Comandi		Uscite	
Tasti:	1 tasto (per accensione/ spegnimento dell'unità)	Materiale:	ABS / Noryl
Controlli:	volume a rotella	Dimensioni:	150x75 mm
Indicatori:	LED giallo per batteria scarica	Peso:	299 g (con il trasduttore)
		Classificazione:	Classe I Tipo B - IEC

OTTIMA QUALITÀ  
PRODUZIONE  
INGLESE  
GARANZIA 3 ANNI



80600

# STETOSCOPIO VET

## • 32545 REGALITE VET - nero

Duofono di alta qualità a padiglione singolo. Sistema acustico multi-frequenza "ring-o-raised™" brevettato. Padiglione cromato con membrana interna fluttuante ed esclusivo sistema "due tubi in uno", latex free. Fornito in scatola deluxe, foderata, con olive morbide e membrana di ricambio.

LUNGHEZZA  
LIRA 90 CM



32545

# TERMOMETRO


## • 25588

### TERMOMETRO VET RETTALE


Appositamente progettato al fine di essere ergonomicamente corretto per gli animali. Regolazioni selezionabili per cuccioli, suini, e bestiame. Adatto anche per altri animali.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Raggio di misurazione: 32 ~ 43°C  
Precisione: ±0,1°C (35 ~ 39°C);  
±0,2°C (<35°C, >39°C)  
La batteria ha una durata di circa 5000 misurazioni.  
Dimensioni: 190x110x35 mm

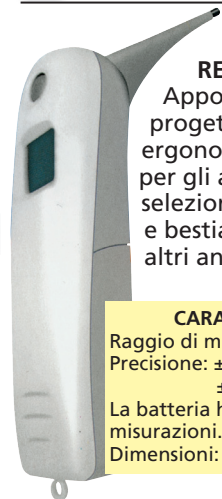

# STRUMENTI INOX

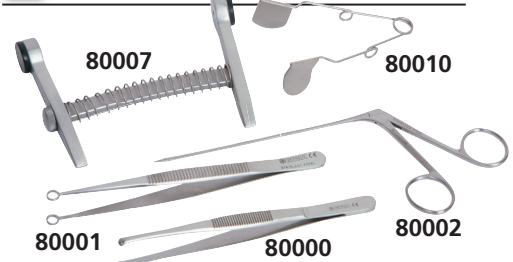

- 80000 Pinza Durante - 15 cm
- 80001 Pinza terza palpebra - 11 cm
- 80002 Pinza Hartmann lunga - 14,5 cm
- 80005 Apribocca - 7 cm
- 80006 Apribocca - 11 cm
- 80007 Apribocca - 15 cm
- 80010 Apribocca per roditori - 6 cm
- 80011 Apribocca per roditori - 8,5 cm