


## SIRINGHE ED AGHI DA INSULINA BD MICRO-FINE™

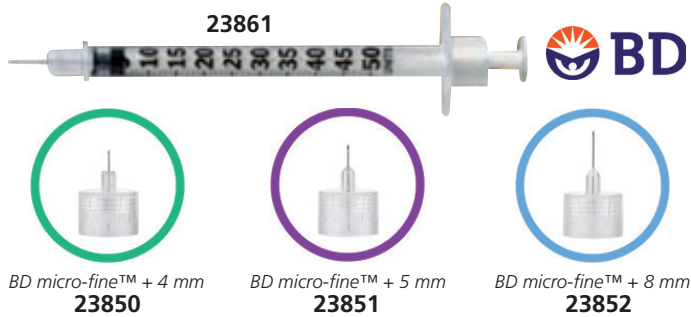


| Codice GIMA | Codice BD | AGHI BD MICRO-FINE™            | Minimo vendita |
|-------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| 23850       | 320140    | Aghi Micro-fine BD 4 mm - 32 G | conf. da 100   |
| 23851       | 320594    | Aghi Micro-fine BD 5 mm - 31 G | conf. da 100   |
| 23852       | 320592    | Aghi Micro-fine BD 8 mm - 31 G | conf. da 100   |

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina disponibili sul mercato (Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Novo Nordisk, Owen Mumford)

| SIRINGHE BD MICRO-FINE™ |        |                                            |              |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------|--------------|
| 23860                   | 324826 | Siringhe Micro-Fine BD 0,3 ml - 8 mm - 30G | conf. da 100 |
| 23861                   | 324825 | Siringhe Micro-Fine BD 0,5 ml - 8 mm - 30G | conf. da 100 |

## SIRINGHE DA INSULINA

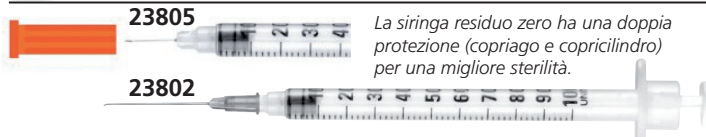

Fornite con ago assemblato e residuo zero. Le siringhe da insulina con zero residuo hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa senza spazio residuo. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

| Codice GIMA                      | SIRINGA DA INSULINA - AGO ASSEMBLATO       | Minimo vendita   |
|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 23802                            | Siringa da Insulina 1ml - 25G - 0,5x16 mm  | Conf. da 100 pz. |
| SIRINGA DA INSULINA RESIDUO ZERO |                                            |                  |
| 23805                            | Siringa da Insulina 0,5ml - 30G - 0,3x8 mm | Conf. da 100 pz. |

## SET PER INFUSIONE

Il set comprende: un perforatore con presa d'aria, una camera in pvc, un tubo in pvc da 150 cm, una rotella in abs, un attacco luer lock in pvc senza ago. Senza ftalati. Punto iniezione latex free. Sterilizzato all'ossido di etilene.

- 26074 SET PER INFUSIONE - SACCHETTO - conf. da 350 pz.
- 26075 SET PER INFUSIONE - BLISTER - conf. da 100 pz.



## SECURITY SYSTEM GIMA PER FONDERE AGHI FINO A Ø 1,6 mm

• 25820 SECURITY SYSTEM - distruttore aghi  
Per una semplice eliminazione degli aghi usati, GIMA ha realizzato Security System. Questo distruttore di aghi è stato studiato per fondere rapidamente aghi fino a 1,2 mm di diametro, ma grazie alla sua potenza, raggiungendo una temperatura di 1'000 °C, può fondere aghi fino a 1,6 mm di diametro. Gli aghi vengono distrutti e sterilizzati simultaneamente, mentre il materiale di scarto, raccolto in un cassetto alla base dell'apparecchio può esser smaltito per le vie normali senza i problemi ed i costi propri dello smaltimento come rifiuti speciali. L'apparecchio è semplice, sicuro, costruito con materiali della miglior qualità in conformità alle norme CEI 62-5 (IEC 601-1) ed è garantito per una lunga durata nel tempo. I carboncini di fusione devono essere sostituiti ogni 4'000 aghi per mantenere l'apparecchio al massimo di efficienza. Produzione italiana.

• 25821 CARBONCINI - di ricambio

minimo vendita: conf. da 2 pz.

**RIDUCE IL RISCHIO DI CONTAGIO DI MALATTIE INFETTIVE CAUSATO DA PUNTURE D'AGO ACCIDENTALI**

## AGHI PER PENNE DA INSULINA



Aghi monouso e sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Con una forma fine per minimizzare il fastidio dell'iniezione, gli aghi ultra-sottili garantiscono un'iniezione non traumatica e indolore grazie ad una pellicola in silicone. Apirogeni. Rimborsabili SSN.

| Codice GIMA | AGHI PER PENNE DA INSULINA GIMA - UNIVERSALI | Minimo vendita   |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| 23840       | Aghi per penne da insulina GIMA 4 mm - 32G   | Conf. da 100 pz. |
| 23841       | Aghi per penne da insulina GIMA 5 mm - 31G   | Conf. da 100 pz. |
| 23842       | Aghi per penne da insulina GIMA 6 mm - 31G   | Conf. da 100 pz. |
| 23843       | Aghi per penne da insulina GIMA 8 mm - 31G   | Conf. da 100 pz. |

Compatibili con la maggior parte delle penne da insulina presenti sul mercato (Sanofi-Aventis, Novo Nordisk, Eli Lilly, Owen Mumford)

## SIRINGA 5 ml

• 25983 SIRINGA 5ml  
Siringa con ago 23Gx1¼" 0,60x32 mm. Sterile, impacchettata in blister singolo, conf. da 10 siringhe, ideale per la vendita al dettaglio

Minimo di vendita:  
cartone da 30 conf. da 10 siringhe



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: cm 22x14x h 9    Peso: 4 kg    Assorbimento: 90 Watt    Fusibili: 2x2,5 A T  
Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz    Norme: CEI 62-5 - IEC 601-1  
Temperatura di fusione: 1'000°C    Produzione italiana: GIMA S.p.A.

