

SUTURE MONOUSO STERILI

SUTURA CLINISILK IN SETA NERA

Il filo di sutura Clinisilk non assorbibile è costituito da seta naturale pura, ritorta in modo da formare un unico filo. Questo filo viene trattato 2 volte con una copertura in silicone per prevenire fenomeni di capillarità e permettere un facile passaggio attraverso il tessuto. Le suture in seta sono considerate le migliori da maneggiare. Lunghezza: 45 cm. Applicazione: sutura dei tessuti molli.

SUTURA CLINILON MONOFILO IN NYLON BLU

Clini-Ny è una sutura monofilo non assorbibile sintetica ricavata da Poliammide 6,6. È virtualmente esente da reazioni del tessuto, ha un'eccellente resistenza alla tensione ed è molto maneggevole. Il Nylon è un materiale altamente indicato per suture della pelle. Lunghezza: 45 cm. Applicazione: chirurgia generale e sutura dei tessuti molli.

Codice GIMA		SUTURE CLINISILK E CLINILON - confezione da 12 pz.					
Seta	Nylon	Calibro USP	Calibro Metrico	Ago	Forma dell'ago	Tipo di ago	Lunghezza
25910	25920	2/0	3	26 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
25911	-	3/0	2	22 mm	1/2	Taglio convenzionale	45 cm
-	25921	3/0	2	20 mm	3/8	Taglio convenzionale	45 cm
25912	25922	3/0	2	24 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
-	25923	3/0	2	25 mm	3/8	Taglio convenz. Fine	45 cm
25914	25924	4/0	1,5	19 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
-	25925	5/0	1	16 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
25916	25926	5/0	1	19 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
-	25927	6/0	0,7	12 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
25918	25928	6/0	0,7	16 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm

SUTURA CLINITRO MONOFILO IN PVDF BLU NON ASSORBIBILE

Indicata per suture e legature di vasi e tessuti molli compresa la fascia, nei casi in cui sia indicato l'uso di suture in materiale non assorbibile. CliniTro viene usato al posto del nylon per la sua maggiore morbidezza e flessibilità.

Conferisce quindi caratteristiche di resistenza che ne migliorano le proprietà di annodamento.

I nostri aghi super glide sono aghi a dorso tagliente di qualità superiore. Sono particolarmente indicati per la dermatologia e la chirurgia plastica e rappresentano l'equivalente degli aghi Multipass Ethicon.

Codice GIMA	SUTURE CLINITRO - conf. da 12 pz.					
	Calibro USP	Metrico	Ago	Forma dell'ago	Tipo di ago	Lunghezza
25930	2/0	3	24 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25931	3/0	2	24 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25932	4/0	1,5	19 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25933	5/0	1	19 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25934	5/0	1	16 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25935	6/0	0,7	13 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm

SUTURA CLINISORB SINTETICA

ASSORBIBILE STERILE - colore viola

Clinisorb è un filo di sutura sintetica assorbibile ritorto derivato da un polimero dell'Acido Glicolico, materiale inerte ad elevata resistenza alla tensione e all'assorbimento che permette il supporto della ferita per circa 21 giorni e l'assorbimento completo in 56-70 giorni. È trattato in superficie con una copertura che assicura un delicato passaggio e migliora lo scorrimento del nodo. Nessun rischio di infezione, processi infiammatori o esposizione ad enzimi del tratto gastro intestinale. Utilizzabile per suture della pelle e ove sia richiesto un supporto non permanente: suture dentali e della pelle, ginecologica, chirurgia plastica e generale, ortopedia e urologia.

Codice GIMA		SUTURE CLINISORB - confezione da 12 pz - sintetiche				
	Calibro USP	Metrico	Ago	Forma dell'ago	Tipo ago	Lunghezza
25900	2/0	3	24 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25901	3/0	2	19 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm
25902	4/0	1.5	19 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm

CLINIMONO Q MONOFILO SINTETICO

CliniMono Q è una sutura monofilo sterile ed assorbibile in PGCL non colorata. Assorbimento completo in 90 giorni. Indicata per avvicinamento e/o legature dei tessuti molli superficiali, ma non per l'uso in chirurgia cardiovascolare o neurologica. È l'equivalente del Monocryl Ethicon ed è anche usata per le suture sottocutanee e sottocuticolari nella chirurgia generica o per i pazienti lontani da casa che non possono tornare dal medico per rimuovere i punti.

Codice GIMA	SUTURE CLINIMONO Q - conf. da 12 pz.					
	Calibro		Ago	Forma dell'ago	Tipo di ago	Lunghezza
USP	Metrico					
25904	2/0	3	24 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25905	3/0	2	24 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25906	4/0	1,5	19 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25907	5/0	1	16 mm	3/8	Tagliente esterno	70 cm
25908	6/0	0.7	11 mm	3/8	Tagliente esterno	45 cm



Fornito con manuale in GB, FR, IT, PT, ES, Arabo

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO




• 25890 SUTURATRICE CUTANEA - 35 punti

Semplice e facile da usare. I punti sono in acciaio inossidabile di ottima qualità 317 L per uso medico e ogni suturatrice è dotata di 35 punti. La sua grande velocità riduce il tempo di suturazione ed il rischio di contrarre infezioni. Le cicatrici sono più sottili ed il tempo di cicatrizzazione è velocizzato. La rimozione delle graffette è indolore e agevole grazie all'utilizzo dell'apposita levapunti.

Da usare per suture cutanee in sala operatoria, sala parto, pronto soccorso, cliniche, ospedali e ambulatori medici.

PINZE RIMUOVI PUNTI

25892

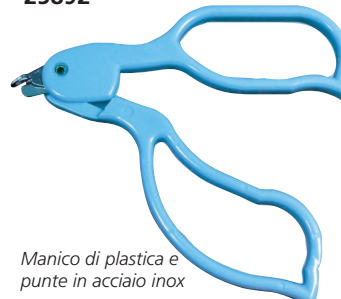

Manico di plastica e punta in acciaio inox



Manico di plastica e punta in acciaio inox

• 25892 PINZA RIMUOVI PUNTI - conf. da 20 pz.

Pratiche pinze monouso sterili per rimuovere i punti regolari e di grandi dimensioni.

• 25895 PINZA LEVAPUNTI SR-3 - conf. da 10 pz.

Originale levapunti 3M per punti metallici.

LEVA PUNTI/SUTURE ACCIAIO INOX:

- 26737 FORBICE SPENCER - 13 cm
- 26722 PINZA MICHEL LEVAPUNTI - 13 cm



26737

26722