

ANALIZZATORE DI GRASSO CORPOREO CON BORSA PER IL TRASPORTO

• 27322 ANALIZZATORE DI GRASSO CORPOREO

Ideale per dietologi, palestre e centri sportivi, ma perfetto anche per l'uso domiciliare. Permette di conoscere non solo il peso ideale ma anche lo stato di salute nutrizionale. L'analizzatore di grasso corporeo GIMA misura il flusso dei segnali elettrici (impedenza o resistenza elettrica del corpo umano) attraverso i tessuti ADIPOSI, MAGRI (muscoli, ossa, organi) o l'ACQUA. Quando cambia la quantità di tessuti adiposi, magri o dell'acqua, varia anche il segnale di massa corporea, che fornisce così una misura affidabile e precisa della proporzione di ciascuno di questi componenti nel peso totale. Nel preciso, si applicano 4 elettrodi sui metacarpi e metatarsi, con una corrente di 50 kHz. Il livello del segnale corrisponde all'indice di massa idrica e di massa grassa totale. **Bastano 2 minuti per questo test essenziale e semplicissimo.** La procedura dura solo 2 minuti e fornisce la stessa precisione di altri dispositivi più costosi.

Grande quantità di dati utilissimi:

MASSA GRASSA: peso reale dei tessuti adiposi del corpo

MASSA MAGRA: peso reale dei tessuti magri, principalmente muscoli e organi

ACQUA: livello di acqua nel corpo

% MASSA GRASSA: percentuale di massa grassa rispetto al peso totale

% MASSA MAGRA: percentuale di massa magra rispetto al peso totale

Metabolismo basale (BMR)

Peso target: obiettivo di peso in condizioni ottimali

% ideale della massa adiposa rispetto al sesso e all'età

Le misure ridotte e la leggerezza lo rendono portatile, per l'esecuzione del test ovunque. **L'analizzatore vi aiuta a ritrovare la forma e a mantenerla.** Permette di massimizzare il vostro livello ideale di forma fisica, sia che vogliate perdere peso, aumentare la massa muscolare, il tono e l'assetto muscolare, o semplicemente mantenere la vostra forma attuale:

- permette di controllare l'efficacia del vostro programma dietetico stabilendo con precisione l'origine del vostro calo di peso (tessuto adiposo, organico o acqua).
- aiuta a monitorare i miglioramenti nella massa muscolare come risultato di esercizi fisici e/o dieta.
- stabilisce un parametro base della vostra composizione corporea in modo da poter monitorare regolarmente nel tempo i vostri miglioramenti dietetici o fisici.

Una calibrazione frequente è necessaria per avere risultati accurati (27324 kit calibrazione). Fornito con borsa per il trasporto, kit di 2 cavi porta elettrodi, conf. 20 pz. di elettrodi, batterie 2x9 V, alimentatore e manuale d'uso (italiano, inglese, francese, spagnolo).



• 27321 CAVO PORTA ELETTRODI (set di 2 pz.)

per apparecchi venduti dopo 06/2002

• 27323 ELETTRODI (conf. da 20 pz.) - ricambio

Ogni elettrodo può essere riutilizzato 5-6 volte

• 32205 BATTERIE 9 V ALCALINE

• 27324 KIT CALIBRAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 66x176x208 mm Peso: 1'500 g (con batterie e cavi)
Frequenza test: 50 KHz circa Corrente durante il test: meno di 1 mA
Alimentazione: 2 batterie da 9 V o trasformatore 230 V
Norme: 89/336/EEC (non è un dispositivo medico)


PLICOMETRO

• 27318 PLICOMETRO

Plicometro in plastica.

Dimensioni 16,5x10x0,5 cm. Peso 22 g.

Fornito in bustina di plastica inserita in una scatola.

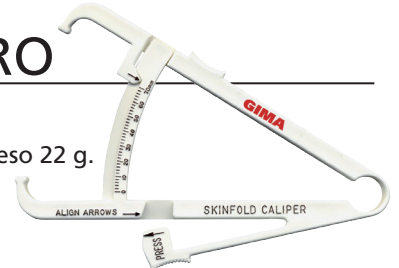

BODY FAT MONITOR



• 27348 BODY FAT MONITOR

Pratico monitor portatile per la valutazione del grasso corporeo. Ideale per uso personale.

Principali caratteristiche:

- funzione di analizzatore di grasso corporeo
- calcolo della percentuale del grasso corporeo
- funzione BMI
- funzione del calcolo delle calorie
- spegnimento automatico (quando non è in funzione per circa due minuti)
- capacità di memoria: fino a 9 dati personali
- 1 area di memoria per altri utenti (attiva dopo lo spegnimento)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure: 240x160x43 mm
Peso: 305 g
Alimentazione: 2 batterie AAA (non incluse)

CARDIOFREQUENZIMETRO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Impermeabilità all'acqua 30 metri <orologio>
Impermeabilità all'acqua 10 metri <trasmettitore>
Rilevamento batteria debole
Batterie 3V sostituibili Risparmio energetico

• 28400 CARDIOFREQUENZIMETRO - 20 funzioni* - con fascia torace

20 FUNZIONI

- Due programmi di allenamento automatici in base all'età:
 - Programmi per bruciare i grassi e di miglioramento della resistenza cardiovascolare
- Zona target e tempo di esercizio liberamente programmabili
- Tre differenti allarmi acustici
- Due differenti allarmi visivi
- Percentuale della resistenza cardiovascolare
- Percentuale di efficienza del tempo di esercizio preimpostato
- Conto alla rovescia del tempo di esercizio preimpostato
- Frequenza cardiaca corrente registrata 35-250 battiti al minuto
- Massima frequenza cardiaca registrata 35-250 battiti al minuto
- Frequenza cardiaca media in 6 periodi opzionali <10-60 minuti>
- Tempo totale oltre il limite inferiore <fino a 9:59:59>
- Tempo totale oltre il limite superiore <ore/minuti/secondi>
- Cronometro 9:59:59 (ore/minuti/secondi)
- Indicatore LED trasmissione
- Formato orologio 12/24 ore
- Indicatore zona target
- Zona target resettabile e ricontronabile
- Livello di resistenza cardiovascolare corrente
- Barra del tempo in secondi
- Retroilluminato

*Adatto ad utenti fino a 60 anni.