


PLICOMETRI PROFESSIONALI GIMA: MECCANICO E DIGITALE



27320

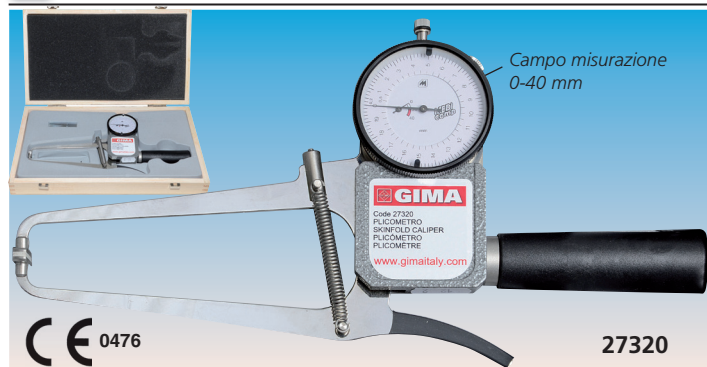

27346

• 27320 PLICOMETRO PROFESSIONALE - meccanico

• 27346 PLICOMETRO - digitale - con cavo USB per trasferimento dati e software incluso

Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto.

Possibilità di calibrazione

Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro Gima è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm² e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo.

Facile da usare e leggere

Viene fornito con una doppia scala di lettura (cod. 27320) o display digitale (cod. 27346) ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente.

Design elegante e di facile utilizzo

Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno. Produzione italiana, sottoposto alla certificazione CE per dispositivi medicali. Manuale in GB, FR, IT, ES.

Gestione dei dati su PC (solo 27346)

Compatibile con Windows 2000, e XP, (service pack 2) USB 2.0 minimo. Produzione italiana.

METRO BMI



27341

• 27341 metro BMI

Metro tascabile retrattile 150 cm con calcolatore frontale di BMI (Indice Massa Corporea)

• 27342 metro BMI

Versione economica del cod. 27341. Disponibile in 150 giorni circa per un minimo di 1'000 pz.



27341

PLICOMETRO FAT-1


• 27344 PLICOMETRO FAT-1

Plicometro economico e preciso, di produzione italiana.

Misura lo spessore delle pliche cutanee in vari distretti dell'organismo, secondo le caratteristiche ideate da Tanner e Whitehouse:

- pressione esercitata sulla plica: 10 g/mm² circa
- superficie di contatto sulla plica: 6x11 mm circa

Questo strumento dà un'esatta valutazione dello stato nutrizionale del soggetto in esame e di come si distribuisce settorialmente il suo tessuto adiposo. L'utilizzatore solleva tra le dita una piega della pelle per misurarne lo spessore con le pinze dello strumento: sul bordo superiore è riportata una scala in millimetri su cui si muove una freccia che misura immediatamente la plica (tricipitale, sottoscapolare etc.) con un'approssimazione di circa 1/2 mm. Le fasce colorate inserite in prossimità della scala consentono di paragonare il valore rilevato con i percentili di riferimento distinti per uomini e donne. Fornito con manuale d'uso che aiuta nell'interpretazione dei valori. Utile in dietologia, cardiologia, medicina dello sport, medicina estetica, ginecologia, pediatria, etc. Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR.

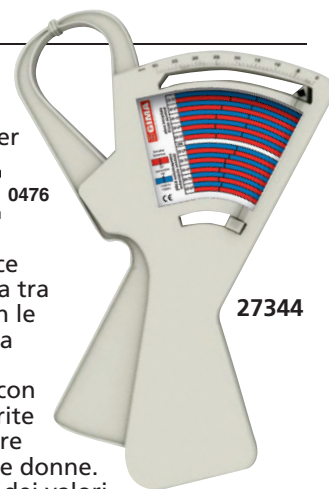

27344

MISURATORE CORPOREO

• 27343 MISURATORE CORPOREO

Prende le misure del corpo e dei suoi progressi. Misura tutte le parti del corpo: braccia, cosce, polpacci, petto, vita, ecc.

Misurazioni sia in pollici che in cm; lunghezza max di misurazione: 60 pollici / 152 cm. Elegante

design e misurazione semplice. Robusto nastro in vinile. Bottone retrattile per bloccare il metro e agevolare la misurazione, garantendo una maggiore precisione.



MISURATORE PROFESSIONALE - CORPO+TESTA

• 27347 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE

• 27350 NASTRO MISURATORE PROFESSIONALE in scatola con regolo dei percentili per uso pediatrico

Brevettato, approvato dal ministero italiano della salute per l'uso su adulti e bambini. Colorato su entrambi i lati per evidenziare il rischio metabolico con una misura addominale per uomini e donne. Lunghezza del nastro: 8-150 cm.


Può essere usato anche per le misurazioni della testa.

Confezionato in una scatola singola. Il codice 27350 è fornito in una scatola con un regolo per paragonare la circonferenza della testa con le percentuali di crescita infantile da 0 a 36 mesi (percentili). Adatto per entrambi i sessi.



27347

Manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, GR, PT, PL, AR.

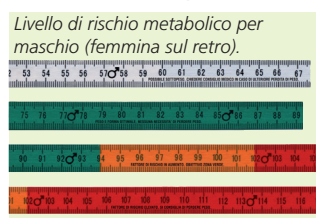

27350