

LETTO ALTEZZA VARIABILE

Scomparto per asta solleva malato e asta flebo

4 sponde a contenimento totale in tecnopolimeri, abbattibili singolarmente



Peso letto: 150 kg

4 ruote Ø 150 mm con sistema centralizzato per bloccaggio con controllo direzionale

Pannelli testa/piedi sagomati e rimovibili, con maniglioni integrati utili per i movimenti

• 44800 LETTO ELETTRICO AD ALTEZZA VARIABILE

Letto ospedaliero a 3 snodi e 4 sezioni regolabili elettricamente e ad altezza variabile. Posizione Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (15°). Tutti le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche con additivo antimicrobico. Sezione schiena regolabile con attuatore elettrico con funzione anti schiacciamento e rototraslazione per evitare la compressione addominale. Su entrambi i lati del letto sono presenti maniglie CPR per manovre d'emergenza. Sezione gambale regolabile da meccanismo a scatto in 6 posizioni. Pulsantiera con comandi ad azione mantenuta disattivabile tramite chiave magnetica. La pulsantiera regola lo schienale, l'altezza piano rete, le gambe e i piedi, la posizione comfort, Trendelenburg e Reverse Trendelenburg.

• 44801 ASTA SOLLEVA MALATO

• 44802 ASTA FLEBO

• 44803 MATERASSO IGNIFUGO - con fodera impermeabile
Carico: 280 kg. Densità: 35 kg/m². Dimensioni: 85x195x18 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza piano rete min/max: 380-780 mm
Regolazione altezza schienale max: 70°
Regolazione gambe max: 30° Regolazione piedi max: 30°
Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: 15°
Altezza min/max: 835-1235 mm
Larghezza/lunghezza totale letto: 1010/2260 mm (con paracolpi e sponde)
Larghezza/lunghezza utile piano rete: 880/2000 mm
Alimentazione: 220 V, 50 Hz Peso max paziente: 230 kg Portata max: 270 kg
Classe isolamento: I / B Grado di protezione: IP66 Produzione italiana


LETTO BARIATRICO ELETTRICO

Regolazione elettrica delle sezioni, dell'altezza e delle posizioni TR e RTR

4 sponde laterali multi posizione rimovibili di colore coordinato alla struttura del letto

PORTATA 400 kg

2 sedili per asta flebo nella sezione di testa

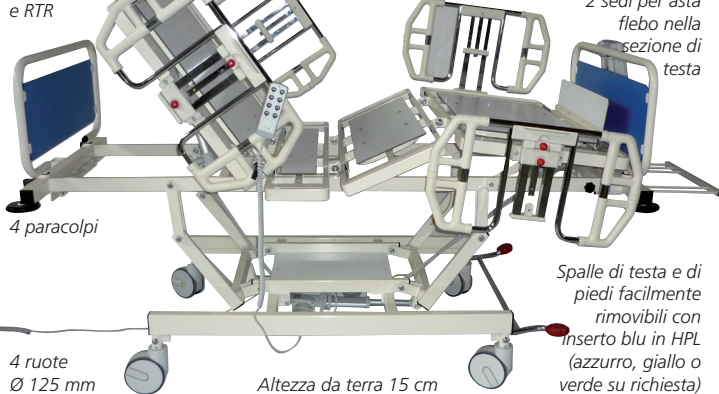

4 paracolpi

4 ruote Ø 125 mm

Altezza da terra 15 cm

Spalle di testa e di piedi facilmente rimovibili con inserto blu in HPL (azzurro, giallo o verde su richiesta)

• 27636 LETTO BARIATRICO ALLUNGABILE - elettrico, 4 sezioni

Letto bariatrico a 4 sezioni retrattili, in acciaio resistente, con altezza variabile e TR-RTR con motori elettrici.

- regolazione sezioni: alzaschiena 0°-54°, alzagambe 0°-24°
- pulsantiera per regolazione sezioni e chiavetta interdizione movimenti + supervisore

- funzione regolazione elettrica CPR - TR e RTR 18°

- posizione poltrona per maggiore naturalezza e comfort

- batteria d'emergenza

- sistema di pedale freno centralizzato a 3 posizioni per una grande maneggevolezza: direzionale, libero, frenato

• 27638 ASTA DI SOLLEVAMENTO con 2 ganci flebo inclusi

• 27639 PORTACOPERTE ESTRAIBILE • 27640 ASTA FLEBO

• 44810 MATERASSO BARIATRICO IGNIFUGO - 4 pezzi - con fodera impermeabile e traspirante. Densità: 40 kg/m².

Carico: 300 kg. Dimensioni: 90x200x18 cm
(2 laterali 15x200x18, 1 allunga letto 15x120x18)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni telaio superiore letto: - complet. retratto - 226x100 cm (paraurti inclusi)
- complet. esteso - 242x128 cm (sponde laterali incluse)
Regolazione piattaforma: - complet. esteso - 200x90 cm
materasso: - posizione intermedia - 200x105 cm
- complet. esteso - 200x120 cm
- estensione del piede - da 200 a 216 cm
Posizione più bassa e più alta: 41-81 cm
Peso: 175 kg Portata: 400 kg
Protezione elettrica: Class 1 Grado di protezione liquido: IP 66

SOLLEVATORI ELETTRICO E MANUALE



Gancio di supporto
H. Min 82 cm
H. Max 177 cm

Portata massima: 200 kg

27757

27767

27753


Base regolabile 63-105 cm

Lunghezza 134 cm



Sollevatore elettrico; alimentato a batteria, base regolabile. Massima portata 170 kg

27752

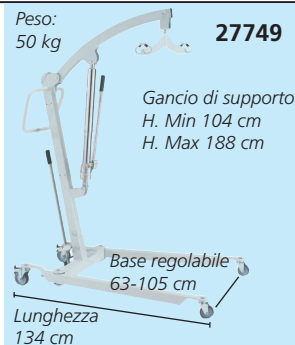

Peso: 50 kg

27749

Gancio di supporto
H. Min 104 cm
H. Max 188 cm

Base regolabile 63-105 cm

Lunghezza 134 cm

con gancio per tetraplegici (27767). Produzione Italiana.

• 27752 SOLLEVATORE ELETTRICO 170 - portata 170 kg

• 27753 SOLLEVATORE ELETTRICO 200 - portata 200 kg

Simile al codice 27749 ma con controlli elettrici

tramite motore a 24 V D.C. e pulsante. Alimentazione

a batteria tramite trasformatore con un pulsante

d'emergenza per l'arresto immediato. Il codice 27752 è

fornito con imbragatura universale, il codice 27753 con

imbragatura per tetraplegici.

• 27757 IMBRAGATURA UNIVERSALE - ricambio -

portata 170 kg

• 27767 IMBRAGATURA TETRAPLEGICI - ricambio -

portata 200 kg

Prodotto in polipropilene antiallergico, atossico e lavabile.

ASTA SOLLEVAMENTO



27645

• 27645 ASTA SOLLEVAMENTO

Struttura in acciaio verniciato con snodo regolabile in acciaio cromato. Può essere completamente smontata per ridurre l'ingombro. 3 regolazioni in altezza. Completa di triangolo e cinghia regolabile.