

POLTRONA DONATORI

• 27557 POLTRONA PRELIEVO - blu

Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5; quadro 30x30x1,5 per il telaio centrale, tubo tondo per i cuscini 20x1,5 diam). Struttura interamente verniciata con polvere epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle). Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM. Regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas (600 N). L'inclinazione dello schienale è di +60° e -5° in posizione Trendelenburg, la pediera -80° e +5°. I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°. Sono presenti quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale. Fabbricato in Italia.

• 27553 ASTA PORTA FLEBO • 27556 SUPPORTO REGGI LENZUOLINI



Struttura verniciata con colore ral bianco 9003, spessore minimo 70/80 micron. Finitura lucida.

27557

MATERASSO DOCCIA

• 27836 MATERASSO DOCCIA

Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l'igiene personale delle persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con acqua corrente, senza necessità di trasferimento / sollevamento. L'assistito all'interno del "Materasso Doccia" può essere lavato con l'acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l'apposito serbatoio d'acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico permette la fuoriuscita dell'acqua da raccogliere in idoneo raccogliatore.

A corredo tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d'acqua.

• 27837 SERBATOIO DI ACQUA

Serbatoio di acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta azionabile con un bottone.

• 27838 TUBO ESTENSIONE DOCCIA

Tubo flessibile di 6 m munito di doccetta azionabile con un bottone e un adattatore per il rubinetto.

27837



27836

27838



BARELLA DOCCIA - REGOLAZIONE ALTEZZA ELETTRICA E IDRAULICA



27814



27815

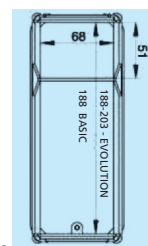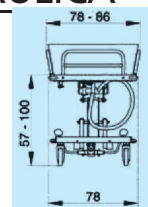

• 27814 BARELLA DOCCIA BASIC - regolazione idraulica

• 27815 BARELLA DOCCIA EVOLUTION - idraulica

• 27816 BARELLA DOCCIA EVOLUTION - a batteria

• 27817 BARELLA DOCCIA EVOLUTION - idraulica con testiera inclinabile

• 27818 CUSCINO - 55x55x14/2 h cm

La barella è idonea per trasferimenti ed uso doccia. La struttura è sottoposta a processo anticorrosione, il pianale è in materiale plastico ABS; le sponde e la viteria in acciaio Inox e le ruote hanno protezioni interne e lavabili. Le sponde laterali di sicurezza sono bloccabili facilmente abbattibili con una mano. È possibile abbattere anche la sponda lato testa per pazienti di statura superiore a cm 188 (solo Evolution). L'ingombro delle sponde laterali può essere ridotto durante i trasferimenti. La barella è dotata di foro di drenaggio con tubo di lunghezza cm 150 per lo scarico dell'acqua. Pianale inclinabile dall'operatore mediante comando con molla a gas. Le ruote hanno un sistema di freno centralizzato (solo Evolution). Blocco direzionale per favorire i trasferimenti. Carico di lavoro in sicurezza: 180 kg.

Modello con regolazione elettrica dell'altezza.

Batteria 24 V ricaricabile e controllo manuale.


Il caricabatteria 110/220 V - 50/60 Hz è incluso.

Modello con testiera inclinabile (27817) - idraulica.

Schienale regolabile con controllo manuale e mediante pistone, con regolazione idraulica dell'altezza. Fabbricato in Italia.



Schienale alzabile fino a 63° solo per codice 27817

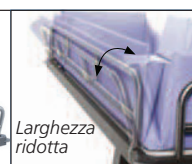

Larghezza ridotta



Cuscino con inclinazione di 15°, 55x55x14/2 h cm

27818

CARATTERISTICHE TECNICHE

	BASIC	EVOLUTION
Carico di lavoro in sicurezza	160 kg	180 kg
Peso	97 kg	107 kg
Diametro ruote	12,5 cm	15 cm
Sistema di freno	individuale su ogni ruota	centralizzato
Sistema direzionale	si	si
Riduzione ingombro sponde laterali	si	si
Sponda lato testa reclinabile	no	40°
Inclinazione per deflusso acqua	5°	5°
Lunghezza tubo di scarico	150 cm	150 cm