

BARELLA PROFESSIONALE CON ALZATESTA REGOLABILE

• 27827 BARELLA PROFESSIONALE CON ALZATESTA REGOLABILE E SPONDE LATERALI

Carrello in alluminio anodizzato con telai perimetrali in acciaio e profilo rigido in PVC.

Verniciatura con polveri epossidiche avorio RAL 1013.

Piano rete rigido in tondo di acciaio.

Struttura portante, sponde laterali e maniglia di spinta in alluminio anodizzato.

Componenti in nylon con morfologia a maniglia

Ruote girevoli Ø 200 mm, di cui due con freno in diagonale.

Fornita smontata.

Produzione italiana.

• 27830 ASTA PORTAFLEBO - altezza fissa 100 cm - 2 ganci di plastica

• 27831 CESTELLO PORTA OGGETTI IN ACCIAIO - 56x38xh 9 cm

• 27832 CESTELLO PORTABOMBOLE - Ø 18x37 cm

• 27834 MATERASSO IGNIFUGO 7 cm - nero - 185x58xh 7 cm



BARELLA REGOLABILE IN ALTEZZA CON TR E RTR

• 27828 BARELLA REGOLABILE IN ALTEZZA

Con Trendelenburg (TR), e Trendelenburg/Inverso (RTR) e sponde laterali.

Piano rete composto da due settori in tondo di acciaio verniciato con polveri epossidiche avorio RAL 1013, smontabili per pulizia, fissati su supporti in nylon e appoggiati su traverse in acciaio ricoperto con profilo in pvc rigido. Sollevamento e abbassamento della sezione testa mediante molla a gas utilizzando la levetta posta sulla sezione stessa. Struttura del carrello di base con profili a sezione arrotondata e verniciata con polveri epossidiche avorio RAL 1013. Regolazione altezza (cm. 50-80) mediante pompa oleodinamica e pedale.

Movimento del TR-RTR regolato da una maniglia situata ai piedi del carrello. Bloccaggio meccanico. Controllo dell'inclinazione e del piano rete tramite bolla di livello. TR 14° RTR 11°. Quattro ruote girevoli Ø 200 mm, di cui una direzionale. Bloccaggio simultaneo a tre posizioni: blocco totale, girevole totale, girevole e direzionale.

Produzione italiana

• 27830 ASTA PORTAFLEBO - altezza fissa 100 cm - 2 ganci di plastica

• 27833 CESTELLO PORTABOMBOLE (max. 7 l) A GRIGLIA - multifunzionale

• 27835 MATERASSO IGNIFUGO 10 cm - 2 sezioni - 185x58xh 10 cm

Fissaggio facile e rapido dell'asta ai 4 lati



TAVOLO DA LAVORO



• 27909 TAVOLO DA LAVORO INOX

Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassetti affiancati su ogni lato. Realizzato in acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore in lamiera liscia ed un piano inferiore liscio. Montato su 4 ruote Ø 80 mm di cui due frenanti. Peso 50 kg. Misure: 120x70xh 95 cm.

Portata massima per piano 40 kg.

Fornito smontato: 122x35x72 cm.

Produzione italiana.

TAVOLI STRUMENTARIO SALA OPERATORIA

Ripiano: 120x65 cm




• 27913 TAVOLO STRUMENTARIO - 2 ripiani

Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 304 finitura scotch brite; composto da 2 piani superficie liscia. Completo di 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Portata per ripiano: 40 kg. Fornito smontato (123x13x68 cm). Produzione italiana.

Ripiano: 120x65 cm

Portata per ripiano:
40 kg

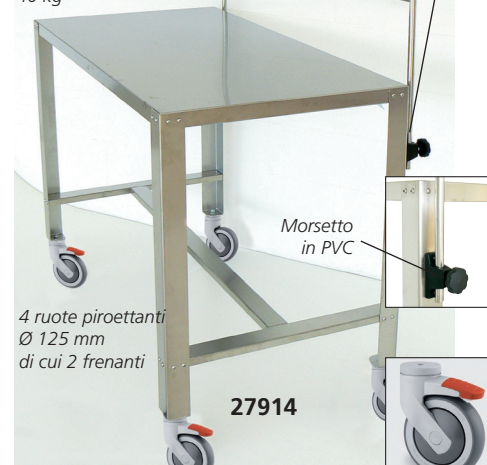

• 27914 TAVOLO STRUMENTARIO - 1 ripiano

Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in lamiera di acciaio INOX AISI 304 finitura scotch brite; composto da 1 piano superficie liscia ed un'alzata regolabile in altezza (105-136 cm) completa di 4 ganci portastrumenti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Fornito smontato (123x13x68 cm). Produzione italiana.