

CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION - ALTA QUALITÀ

AURION MEDICAZIONE



27861


27858

CARRELLI AURION

Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa.

La scocca è formata da un unico elemento arrotondato di poliuretano Baydur fabbricato da Bayer AG. Può essere lavato e disinfettato. Non genera reazioni con acidi diluiti, alcali e solventi. Il dispositivo è auto estinguente in conformità con la classe UL V0. Tutti i carrelli sono privi di lattice. Per garantire il massimo livello di sicurezza le maniglie sono termoformate sulla scocca. La parte superiore del carrello è dotata di un vassoio con bordo rialzato sui 4 lati al fine di evitare qualsiasi rovesciamento o caduta dei materiali. L'articolo include un paraurti a protezione del personale, carrello e dispositivi medici. Dimensioni: 775x710xh 920 mm.

- 27860 CARRELLO AURION BASIC - giallo - 5 cassetti
 - 27859 CARRELLO AURION BASIC - marrone - 6 cassetti
 - 27861 CARRELLO AURION MEDICAZIONE - verde - 4 cassetti
 - 27858 CARRELLO AURION MEDICAZIONE - azzurro - 5 cassetti
 - 27862 CARRELLO AURION EMERGENZA - rosso - 5 cassetti
 - 27863 CARRELLO AURION EMERGENZA - blu - 4 cassetti
- Con asta portaflebo e cassetti nella parte superiore
- Con asta portaflebo e cassetti nella parte superiore
- Con asta portaflebo, portadefibrillatore e ripiano per aspiratore
- Con asta portaflebo e porta defibrillatore

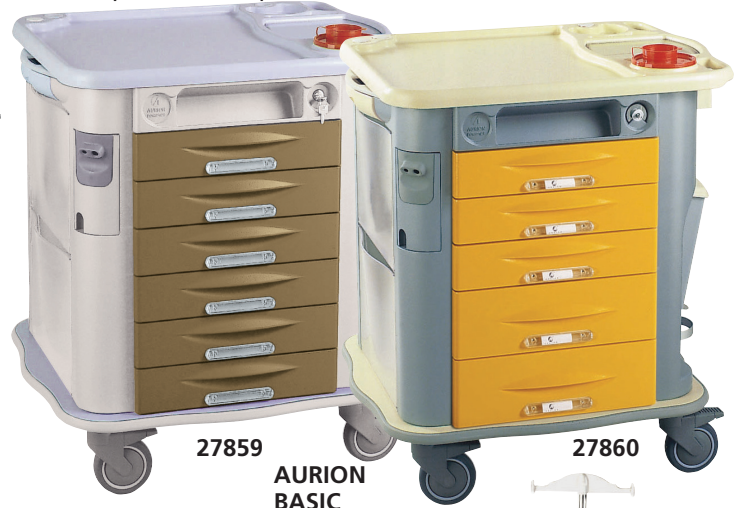


27859

AURION
BASIC

27860

RETRO (tutti i carrelli)

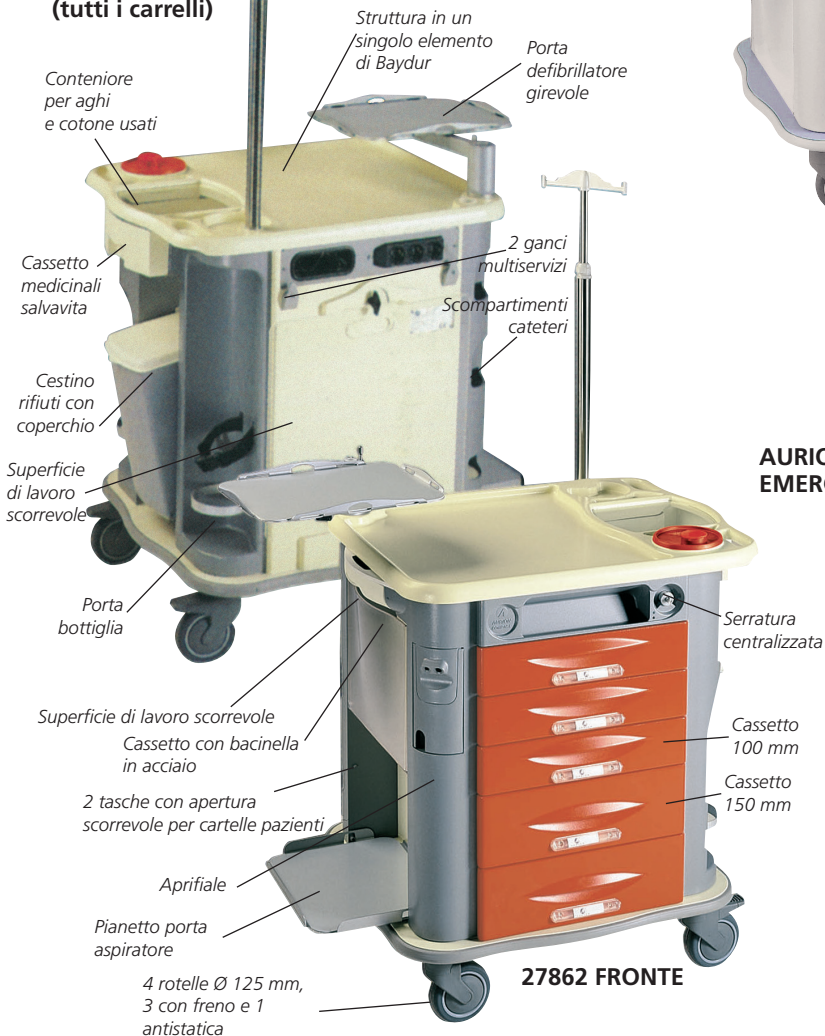

27862 FRONTE

AURION EMERGENZA



27863