


LITS D'HÔPITAL MANUELS À 3 OU 4 ARTICULATIONS

Support de protection

Support de protection latéral escamotable à 6 barres en alliage d'aluminium, avec blocage de sécurité

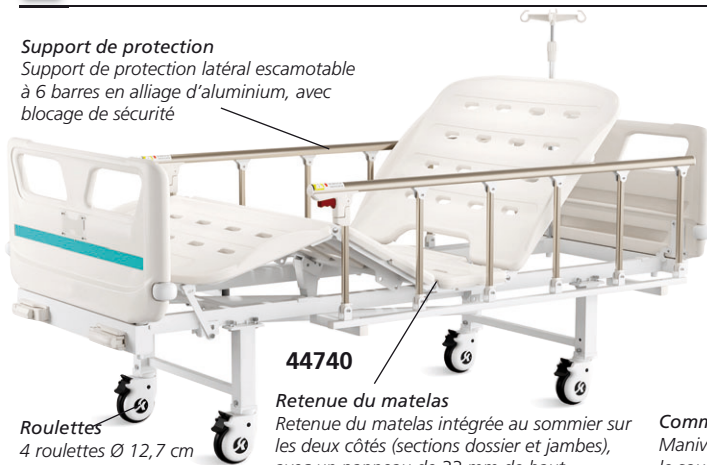

44740

Retenue du matelas


Retenue du matelas intégrée au sommier sur les deux côtés (sections dossier et jambes), avec un panneau de 33 mm de haut

Roulettes
4 roulettes Ø 12,7 cm

Commande manuelle
Manivelles pour régler le soulèvement

Potence à sérum

Potence à sérum en acier inox, charge 15 kg

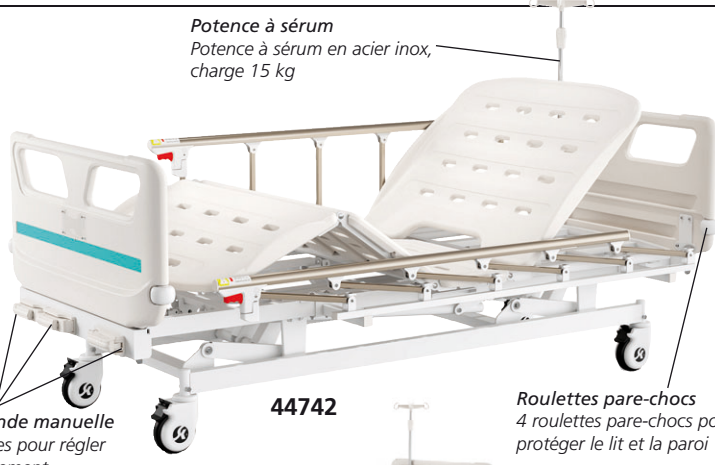

44742

Roulettes pare-chocs
4 roulettes pare-chocs pour protéger le lit et la paroi

- 44740 LIT 3 ARTICULATIONS - 2 manivelles - roulettes
- 44742 LIT 4 ARTICULATIONS - 3 manivelles - hauteur variable - roulettes


Lits d'hôpital à 3 ou 4 articulations réglables par 2 ou 3 manivelles. Sections de tête et de pieds en PP, avec roulette pare-chocs Ø 65 mm, pour éviter les collisions. Sommier en PP, divisé en 4 ou 5 sections avec retenue du matelas intégrée. Parties en plastique et peintes époxy.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions:	2130x995 mm
Hauteur:	500 mm (44740), réglable 420-730 mm (44742)
Sommier:	1925x900 mm
Charge max:	200 kg
Mouvement:	2 manivelles (44740), 3 manivelles (44742)
Réglage dossier:	0-70° (± 5°)
Réglage jambes:	0-38° (± 5°)

ACCESSOIRES STANDARD

- 2 supports latéraux pliables potence à sérum 4 crochets
- 4 fixations potence à sérum
- 2 crochets de drainage

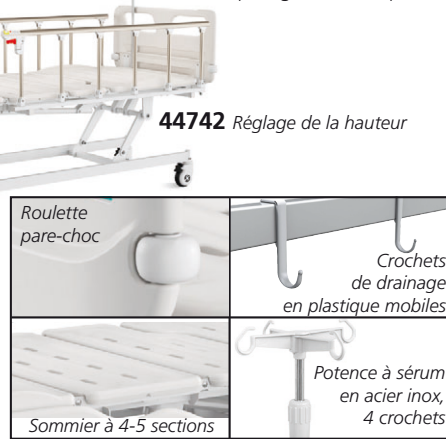

44742 Réglage de la hauteur

LITS D'HÔPITAL ÉLECTRIQUES

Retenue du matelas

Retenue du matelas intégrée au sommier sur les deux côtés (sections dossier et jambes), avec un panneau de 33 mm de haut

Support de protection

Support de protection latéral escamotable à 6 barres en alliage d'aluminium, avec blocage de sécurité

Potence à sérum

Potence à sérum en acier inox, charge 15 kg

Indicateur angle


Indicateur angle intégré pour montrer clairement la position du dossier et la position Trendelenburg

Support de protection

Le support de protection latéral avec butoir intégré peut être rangé. La poignée aide le patient à se soulever et à descendre du lit

Commande manuelle

Commande avec câble spiralé flexible pour faciliter l'utilisation. Toutes les fonctions standard peuvent être contrôlées

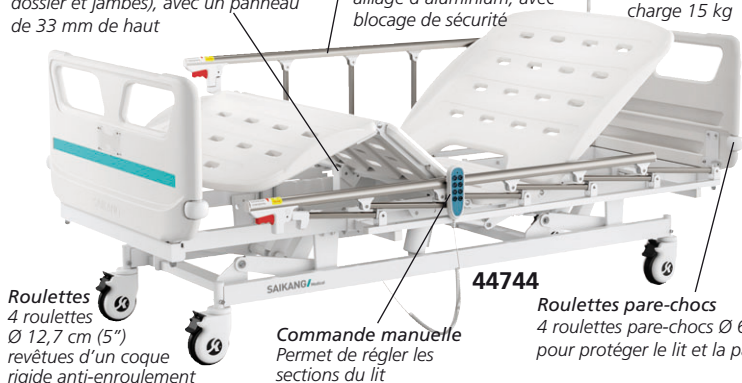


44744

Roulettes
4 roulettes Ø 12,7 cm (5") revêtues d'un coque rigide anti-enroulement

Commande manuelle
Permet de régler les sections du lit

Roulettes pare-chocs
4 roulettes pare-chocs Ø 65 mm pour protéger le lit et la paroi

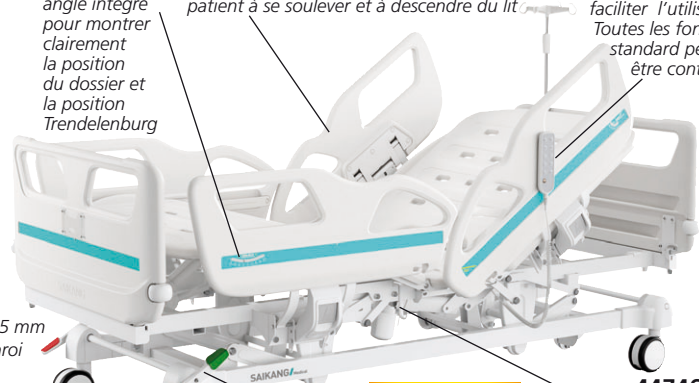

44746

TR + RTR

Roulettes
4 roulettes doubles Ø 12,7 cm (5") avec blocage central. Coque rigide anti-enroulement

Système de freinage
Le ressort du frein conserve sa qualité même près 10 000 utilisations


Crochets de drainage
Crochets de drainage en plastique intégrés à l'intérieur des barrières latérales

- 44744 LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE - hauteur variable
- 44746 LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE avec TR et RTR - hauteur variable

Lits d'hôpital électriques avec sommier en PP intégré et moteur électrique pour faciliter les mouvements des sections du lit. La commande manuelle permet de contrôler les fonctions standard. Tous les deux modèles ont un moteur américain avec standard UL/ROHS/EN. Parties en plastique et peintes époxy. Les sections de tête et de pied en PP sont pourvues de 4 roulettes pare-choc Ø 65 mm. Autorégession 10+9 cm (44746 uniq.) pour minimiser la pression et les forces de cisaillement dans la région pelvique du patient et réduire la formation d'escarres.

ACCESSOIRES STANDARD

- 1 commande manuelle
- 1 série supports latéraux pliables (44744 uniq.)
- 1 série support latéraux PP extra hauteur (44746 uniq.)
- 1 potence à sérum avec 4 crochets
- 4 fixations potence à sérum
- 2 crochets de drainage
- 4 indicateurs angle (44746 uniq.)

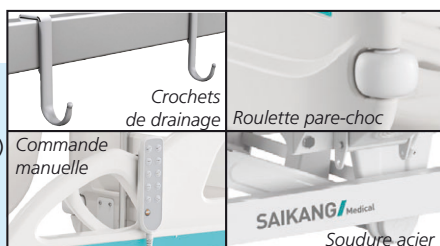

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	44744	44746
Dimensions:	208,5x99,5 cm	208,5x102,5 cm
Réglage hauteur:	42 - 73 cm	45,5 - 74,5 cm
Sommier:	192,5x90 cm	
Charge de travail admissible:	200 kg	250 kg
Réglage dossier:	0-75° (± 5°)	
Réglage repose-jambes:	0-46° (± 5°)	0-32° (± 5°)
Trendelenburg:	-	0-12°
Trendelenburg Inverse:	-	0-12°
Indicateur angle:	-	0-90°
Autorégession:	-	10+9 cm
Ligne de position:	30°	
Moteur: durée:	20 000 mouvements	
bruit:	inférieur à 50 dB	
Tension:	100-240 V - 50/60 Hz	