

RI-FORMER®: UNITÉ CENTRALE MODULAIRE DE DIAGNOSTIC 3,5 V



UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE RI-FORMER

Le centre de diagnostic modulaire s'adapte à tous les besoins et toutes les installations, extensible à gauche et à droite. Le module Ri-Former® de base est disponible avec une poignée et peut être combiné à 4 modules de poignée supplémentaires.

- éclairage au xénon ou à LED de 3,5 V permettant de recréer la lumière du jour
- efficacité électronique optimale grâce à un variateur réglable
- tension de sortie constante indépendante de l'alimentation secteur, prolongeant la durée de vie utile des lampes et garantissant une intensité d'éclairage optimale
- activation/désactivation automatiques des poignées lors de leur retrait ou remise en place sur l'unité, favorisant les économies d'énergie et prolongeant la durée de vie utile des lampes
- poignées ergonomiques antidérapantes avec rhéostat: réglage de l'intensité de l'éclairage et activation/désactivation manuelles possibles à partir de la poignée
- cordon spiral extensible jusqu'à 3 m



UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE - XÉNON - 100-240V, 50/60 HZ

- 31800** Centre de diagnostic Ri-Former 3,5 - standard (avec 2 poignées, tête oto et ophtalmo, distributeur de spéculums auriculaires, horloge)
- 31805** Centre de diagnostic Ri-Former 3,5 - grand modèle (31800 + sphymo inclus)

UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE - LED - 100-240V, 50/60 HZ

- 31801** Centre de diagnostic Ri-Former 3,5 - standard (avec 2 poignées, tête LED oto et ophtalmo, distributeur de spéculums auriculaires, horloge)
- 31806** Centre de diagnostic Ri-Former 3,5 - grand modèle (31801 + sphymo inclus)


MODULES RI-FORMER - 100-240V, 50/60 HZ

- 31807** Centre de diagnostic de base 1 poignée 3,5 - 3652
- 31808** Centre de diagnostic de base 2 poignées 3,5 - 3652-300
- 31809** Centre de diagnostic de base 1 poignée 3,5 - 3650
- 31810** Module d'extension 1 poignée - 300

TÊTES, THERMOMÈTRE ET ACCESSOIRES RI-FORMER

- 31811** Tête otoscope Ri-scope L2 - LED 3,5 V - 10565
- 31812** Tête otoscope Ri-scope L1 - Xénon 3,5 V - 10563
- 31813** Tête ophtalmoscope Ri-scope L1 - Xénon 3,5 V - 10569
- 31814** Tête rétinoscope Ri-scope - Xénon 3,5 V - 10544
- 31815** Tête dermatoscope Ri-scope - LED 3,5 V - 10577
- 31817** Spéculum auriculaire Ri-scope L1, L2 Ø 2,5 mm - autocl. 134° C - boîte de 10
- 31819** Spéculum auriculaire Ri-scope L1, L2 Ø 4 mm - autocl. 134° C - boîte de 10
- 31827** Spéculum auriculaire Ri-scope L1, L2 Ø 2,5 mm - jetable - boîte de 100
- 31828** Spéculum auriculaire Ri-scope L1, L2 Ø 4 mm - jetable - boîte de 100
- 31820** Distributeur Ri-spec de spéculums auriculaires - spéculums non fournis - 3654
- 31822** Sphygmomanomètre avec support - LF3655-109
- 31823** Thermomètre IR Ri-thermo N avec 40 protecteurs de sonde - 3656
- 31824** Protecteurs de sonde pour 31823 - boîte de 100 - 12704 - recharge
- 31825** Ampoule au xénon L1 pour otoscope 3,5 V - 10487 - recharge
- 31826** Ampoule au xénon L1/L2/L3 pour ophtalmoscope 3,5 V - 10608 - recharge

RI-SCOPE® L: LED + PILES Li-ion

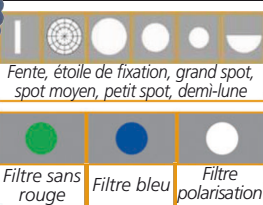

Éclairage à LED: lumière blanche intense à durée de vie illimitée!
La lumière blanche monochromatique (4 000 °Kelvin) de la lampe du Ri-scope®L assure un éclairage froid et des couleurs vraies. IRC > 90. Les lampes dotées de la technologie LED ont une durée d'au moins 10 000 heures (comparée aux 20-30 h des lampes halogènes et au xénon).

Piles Li-ion: une puissance considérable

Ces piles légères ont une haute capacité de charge et une durée de vie prolongée. Elles garantissent des performances élevées jusqu'à 1 200 cycles de charge. Les LED alimentées par piles au lithium peuvent fonctionner pendant près de 50 heures.

- **31831 OTOSCOPE RI-SCOPE L XL L2 - 2,5 V - poignée C - 3716**
- **31829 OTOSCOPE RI-SCOPE L LED L2 - 2,5 V - poignée AA - 3708**
- **31830 OTOSCOPE RI-SCOPE L LED L2 - 3,5 V - poignée C - 3703-550**

La dernière génération d'otoscopes Ri-scope®L avec verre optique et réduction des reflets allie d'exceptionnelles propriétés optiques et des performances inégalées avec la fiabilité et l'efficacité de la technologie LED/lithium-ion (31830 uniquement).

- qualité du faisceau et transmission de la lumière optimales
- verre optique 3X étanche à rotation bidirectionnelle
- idéaux pour les tests pneumatiques (fournis sans soufflerie)
- poignée C: fonctionne à piles Li-ion (non fournis)

Étui rigide de luxe contenant 10 spéculums auriculaires. Les codes 31831/2/4* comprennent aussi la lampe de recharge.

*Uniquement pour ophtalmoscope

Spéculums auriculaires de recharge: originaux codes 31817-31819 (autoclavables) ou 31827-31828 (jetables). Compatibles: 31485 à 31499 (jetables), page 266.

- **31832 OPHTALMOSCOPE XÉNON RI-SCOPE L2 - 3,5 V**
Modèle de base amélioré avec filtre de polarisation, filtre bleu et filtre sans rouge montables séparément sur chaque diaphragme.
- Disque dioptrique avec 29 lentilles de correction: Plus 1-10, 12, 15, 20, 40, Moins 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Molette de réglage manuel du diaphragme facile à utiliser pour demi-lune, petit/moyen/grand cercle, étoile de fixation et fente
- Disque porte-filtres montable avec tous les diaphragmes offrant l'affichage des symboles, filtre sans rouge, filtre bleu et filtre de polarisation
- **31834 OTOSCOPE RI-SCOPE L LED L2 + OPHTALMOSCOPE XÉNON L2 - 3,5 V - poignée C**
- **31826 AMPOULE AU XÉNON L1/L2/L3 POUR OPHTALMOSCOPE 3,5 V - recharge**
- **31841 PILE Li-ion RI-ACCU L 3,5 V**
taille C - 10691
- **31840 RI-CHARGER L 230 V**

MADE IN GERMANY
Chargeur de bureau (avec support mural)
permettant de charger 2 poignées "C" à piles Li-ion.



31840