


# CARRELLI MULTIFUNZIONALI AURION - ALTA QUALITÀ

## CARRELLI AURION

Una gamma di carrelli multifunzionali caratterizzata da design innovativo, qualità superiore e una dotazione di accessori completa.

### In poliuretano Baydur®

Il poliuretano Baydur® è un materiale ad alte prestazioni che unisce le migliori caratteristiche della plastica a quelle del metallo. Leggero, robusto, molto resistente a graffi e urti. Resistente ai raggi UV. Chimicamente inerte, non provoca reazione agli acidi, organici e inorganici, agli alcali e ai solventi (DIN 68861/1).

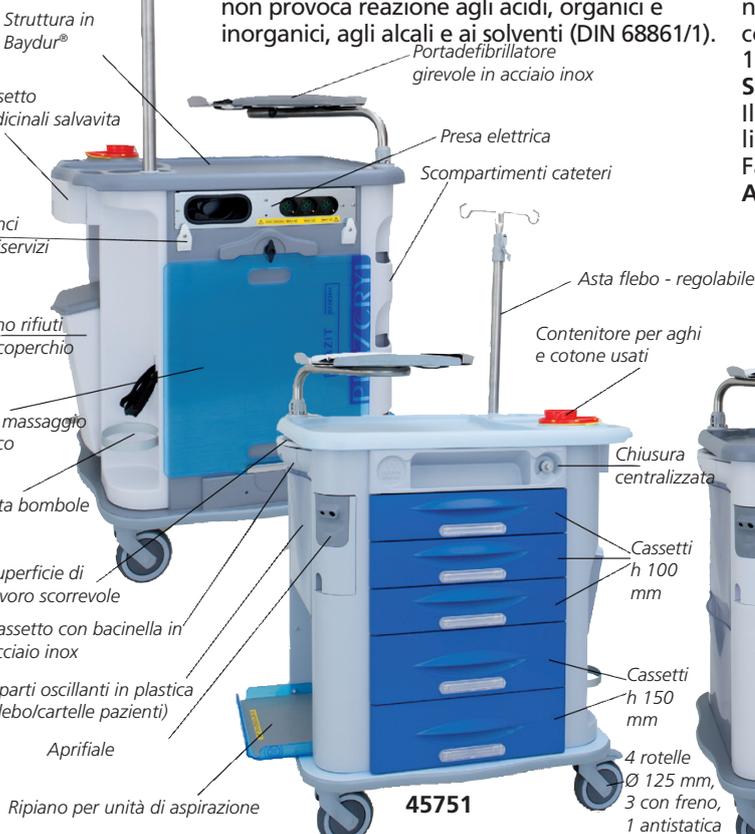

- 45751 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - blu scuro - 5 cassetti
- 45750 CARRELLO DI EMERGENZA AURION - rosso - 4 cassetti con asta portaflebo, porta defibrillatore, ripiano per unità di aspirazione (solo 45751), tavola per massaggio cardiaco, presa elettrica (solo 45751)

Ignifugo, autoestinguente (Classe I, UL94 V-O). Atossico, in caso di combustione non produce diossina.

### Progettazione eccellente

I carrelli Aurion sono ergonomici e modulari. Le maniglie sono termoformate sulla scocca, così come lo è il piano di lavoro dall'ampia superficie e bordatura perimetrale contenitiva. Ogni cassetto presenta un supporto per etichetta.

### Facilmente trasportabili

Struttura leggera e rotelle di alta qualità anticorrosione che non lasciano segni. Ogni rotella è montata su cuscinetti a sfera con lubrificazione sigillata (2 per ruota), 3 con freno, 1 antistatica.

### Sicuri e igienici

Il design dalle forme lisce e senza spigoli garantisce un ottimo livello di sicurezza ed evita l'accumulo di batteri e sporcizia. Facili da pulire e disinfettare anche con detergenti aggressivi

### Alto livello di sicurezza

I morbidi paraurti perimetrali impediscono di arrecare danni agli operatori sanitari, ai pazienti, ad altri oggetti o al carrello stesso. Sistema di blocco centrale con chiave (45740-45746) o sigillo (45750-45751). Dimensioni: 775x710x920 mm



- 45755 CARRELLO AMAGNETICO AURION - giallo - 5 cassetti con ruote amagnetiche, senza sistema di blocco



- 45740 CARRELLO PER TERAPIA AURION - verde - 4 cassetti
- 45741 CARRELLO PER TERAPIA AURION - azzurro - 5 cassetti con asta portaflebo (solo 45741), cassetti superiori, cestino (solo 45741)
- 45744 CARRELLO MEDICAZIONE AURION - blu - 5 cassetti
- 45746 CARRELLO MONODOSE AURION - marrone - 2 cassetti + 2 cassette monodose (10 cassettoni ognuna)